


TOUCHBeauty

ПРИБОР ДЛЯ УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ

AS-1185

ИНСТРУКЦИЯ

УСТРОЙСТВО:

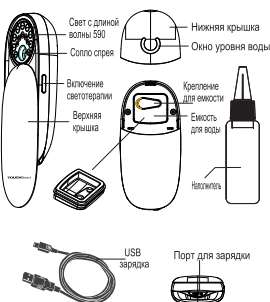

ОСОБЕННОСТИ:

- Усовершенствованный эффект увлажнения кожи с нано распылением всего за 30 секунд.
- Свет с длиной волны 590 нм способствует развитию и росту коллагена и эластина, а также разложению меланина. Это может улучшить гибкость и текстуру кожи, сохранить цвет, и молодость кожи.
- Автоотключение через 30 сек, легко и просто.
- Аккумуляторные Батареи с USB зарядкой.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ:


Этот прибор подходит для всех лиц, особенно для тех, кто часто путешествует и для офисных работников.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

• **Как активировать устройство:**


- В общей сложности 5 часов необходимо для зарядки устройства. Прибор может непрерывно работать в течение 3 часов после полной подзарядки.
- Вставьте провод USB в порт USB на приборе и подключитесь к компьютеру.
- Индикатор становится красным, когда идет подзарядка, и становится зеленым, когда прибор полностью заряжен.

• **Как пользоваться:**



- Заполните контейнер очищенной водой или разбавленным тонизирующим лосьоном.
- Снимите крышку резервуара для воды и заполните жидкостью емкость для воды.
- Снимите верхнюю крышку, раздвинув язык "Бит". Сработает опция - легкий обдув распыления паром. Держите прибор на расстоянии 5-10см от лица. 30 секунд спустя, распыление остановится и опция издаст звук "Бип".
- Во время распыления, нажмите кнопку ВКЛ света, чтобы перейти от распыления в режим фототерапии. Избегайте контакта с глазами. Держите прибор вверх-низ на расстоянии 3 см от лица. Нажмите дважды, чтобы отключить функцию фототерапии или подождите 30 секунд автоматического отключения. Используйте функцию фототерапии два раза в день по 1 минуте для омоложения кожи. Используйте фототерапию совместно с распылением для лучшего ухода за кожей.

• **Как чистить:**



- Чистите прибор с влажной / сухой тканью или салфеткой после каждого использования, чтобы удалить капли и грязь на продукте.
- Снимите резервуар для воды, промойте резервуар для воды и наполните.
- Не мойте прибор под водой.

ВНИМАНИЕ:

- Пожалуйста, прекратите использовать это устройство, если есть воспаления, ожоги или тяжелые угри на коже.
- Тоники и масла не рекомендуются использовать в этом устройстве.
- Пожалуйста, выньте оставшуюся воду из емкости для воды, если прибор не может работать должным образом.
- Не допускайте, чтобы устройство располагалось горизонтально во время распыления для правильного функционирования.
- Держите резервуар для воды сухим, если прибор не используется в течение длительного времени.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

Характер	Причина	Метод устранения
Устройство не работает	Отсутствие зарядки Низкий заряд	Перезарядите устройство
Спрей работает слабо	Застой воды в сопле	Удалите воду
	Нет воды в резервуаре, нет распыления	Проверьте воду через окно на задней панели.
	Тонизированный лосьон не разбавлен достаточно	Система издает для вас сигнал тревоги: разбавленный лосьон
Открытие сопла	Засорение сопла	Прочистите отверстие и заново налейте воды.
	Открытие сопла зашло в состояние не использования прибора в течение длительного периода	Прочистите отверстие чистой тканью

Эффект не очевидный

Прибор держите строго близко от кожи при использовании. Спрей направляется в кожу лица, которая может не поглотится кожей из-за своих крупных размеров.

При распылении держите прибор от 5 до 10 см от кожи

Пожалуйста, обратитесь к официальному представителю для дальнейшей проверки, если прибор все еще не работает.

СОВЕТЫ:

Специальные преимущества увлажнения кожи:

Дом	Увлажнение кожи после умывания лица
Путешествие	Используйте свет 590 нм для фототерапии после применения по уходу за кожей, чтобы сделать вашу кожу более молодой.
	Используйте в самолете, где достаточно сухой воздух
Работа	При быстрой смене погоды, особенно важно для чувствительной кожи глубокое увлажнение.
	Увлажнение кожи необходимо, чтобы чувствовать себя лучше после пребывания на солнце и обильной потливости. Фототерапия поможет вам восстановить тонус кожи, отбелит и защитит кожу.
	Увлажнение кожи необходимо в сухих помещениях с кондиционером. После дремоты в постель, свежий туман поможет вам проснуться.
Периодически освежайте ваш мейк-ап и причёску.	

ПРИБОР ДЛЯ УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ


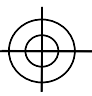
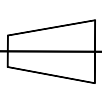
Модель: AS-1185

Material: ABS Stainless steel, Glass

Manufacturer: Shenzhen TOUCHBeauty Ind. & Exp. Co., Ltd.

Addr: 7/F, Building A, Marina Bay Center, No. 2021, Haixiu Road, Bao'an Central District, Shenzhen, China 516133

AS-1185-003

名称	说明书	 <p>TOUCHBeauty TOUCH-BEAUTY BEAUTY FOR YOU 渲美</p>		业务包材设计	
尺寸	300*100mm				
材质	80g书写纸	订单号	国外说明书	编号	附件
工艺	单黑单面	型号	AS-1185	日期	2014-2-27
其它	风琴5折后 (50*100mm) 成品	 	单位 毫米	设计	周苏辉