

ИОННОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ИОНОФОРЕЗ

ВИБРОМАССАЖ

ИК ПРОГРЕВ



GÉZATONE

GALVANIC BEAUTY SPA +
BIO SONIC m 776



ПРОГРАММЫ КРАСОТЫ



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

СОЧЕТАНИЕ 4 МЕТОДИК В АППАРАТЕ GEZATONE BIO SONIC m776 ПОЗВОЛЯЕТ ЭФФЕКТИВНО ОЧИСТИТЬ КОЖУ И СКОРРЕКТИРОВАТЬ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ НЕДОСТАТКИ, ПОВЫСИТЬ СТЕПЕНЬ УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ «ИЗНУТРИ» И УЛУЧШИТЬ ЕЁ ВЛАГОУДЕРЖИВАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ, АКТИВИЗИРОВАТЬ СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА, УМЕНЬШИТЬ МОРЩИНЫ И ПРИЗНАКИ СТАРЕНИЯ, УЛУЧШИТЬ ЦВЕТ ЛИЦА, ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРИЗНАКОВ СТРЕССА И УСТАЛОСТИ.



ЖИРНАЯ КОЖА, РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ, ЧЕРНЫЕ ТОЧКИ, ПОВЫШЕННОЕ САЛОУДЕЛЕНИЕ



ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ И ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ



НЕРОВНЫЙ ТОН, ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА, «УСТАВШАЯ» КОЖА



СНИЖЕНИЕ УПРУГОСТИ И ЭЛАСТИЧНОСТИ МОРЩИНЫ



ОТЕКИ ПАСТОЗНОСТЬ,



НЕДОСТАТОК ВЛАГИ И ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ, ШЕЛУШЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ

КОМПАКТНЫЙ АППАРАТ GEZATONE BIO SONIC m776 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И КОМПЛЕКСНОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛЮБОГО ТИПА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕТОДИК: ДЕЗИНКРУСТАЦИИ, ИОНОФЕРЕЗА, ВИБРАЦИОННОГО МАССАЖА И ИК ПРОГРЕВА.



ИОННОЕ ОЧИЩЕНИЕ

- УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, КОМЕДОНОВ И ИЗБЫТКА КОЖНОГО САЛА
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- ПРОФИЛАКТИКА ВОСПАЛЕНИЙ
- УСИЛЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ
- СОКРАЩЕНИЕ ПОР И НОРМАЛИЗАЦИЯ САЛООТДЕЛЕНИЯ



ИОНОФЕРЕЗ

- ГЛУБОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ДЕПО В КОЖЕ.
- СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН
- ПРОТИВООТЕЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ДЕТОКС
- ТОНИЗАЦИЯ И СОКРАЩЕНИЕ ПОР
- КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН И ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА



ВИБРОМАССАЖ

- УСТРАНЕНИЕ СПАЗМА МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ
- СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН И ПОДТЯЖКА КОЖИ
- ПРОТИВООТЕЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
- АКТИВИЗАЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЛИМФОДРЕНАЖА
- ВЫВЕДЕНИЕ ТОКСИНОВ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ.



ИК ПРОГРЕВ

- АКТИВИЗАЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЛИМФОДРЕНАЖА
- ВЫВЕДЕНИЕ ТОКСИНОВ
- УСТРАНЕНИЕ СПАЗМА МЫШЦ
- УСИЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОСМЕТИКИ
- СТИМУЛЯЦИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- ПОВЫШЕНИЕ УПРУГОСТИ КОЖИ.

ИОННОЕ ОЧИЩЕНИЕ / ДЕЗИНКРУСТАЦИЯ



ИОННОЕ ОЧИЩЕНИЕ / ДЕЗИНКРУСТАЦИЯ - ОМЫЛЕНИЕ ЖИРНЫХ КИСЛОТ КОЖНОГО САЛА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ТОКА И ЛОСЬОНА-ДЕЗИНКРУСТАНТА.

ЛОСЬОН ДЛЯ ДЕЗИНКРУСТАЦИИ ДОПОЛНЯЕТ ДЕЙСТВИЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ТОКА И ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВОДЯЩЕЙ СРЕДОЙ. ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТОКА И ЛОСЬОНА, ИДЕТ РЕАКЦИЯ ОМЫЛЕНИЯ КОЖНОГО САЛА, КОМЕДОН ПРЕВРАЩАЕТСЯ В МЫЛО И ЛЕГКО ВЫМЫВАЕТСЯ ИЗ ПОР.

РЕЗУЛЬТАТЫ



СОКРАЩЕНИЕ ПОР



УСТРАНЕНИЕ «ЧЕРНЫХ ТОЧЕК»



ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ БЕЗ ТРАВМЫ



УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ



НОРМАЛИЗАЦИЯ САЛООТДЕЛЕНИЯ




УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА



ПРОФИЛАКТИКА ВОСПАЛЕНИЙ

ИОНОФОРЕЗ

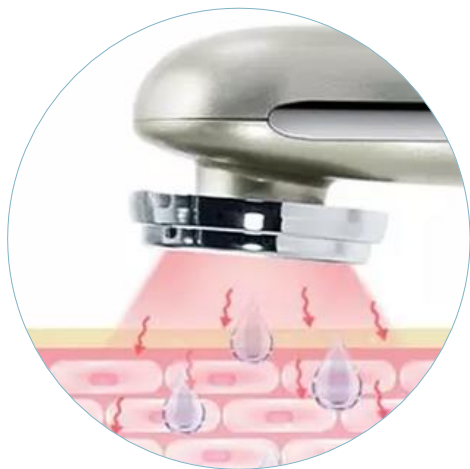

ИОНОФОРЕЗ = ВОЗДЕЙСТВИЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ ТОКОМ ПОСРЕДСТВОМ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ + КОСМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО.

МЕЖДУ ЭЛЕКТРОДАМИ ОБРАЗУЮТСЯ ЗАРЯЖЕННЫЕ ИОНЫ НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ, ПЕРЕДВИГАЯСЬ В ТКАНЯХ, УСКОРЯЮТ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ, ПРОЦЕССЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ



УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА




УВЛАЖНЕНИЕ
И ПИТАНИЕ
КОЖИ




УКРЕПЛЕНИЕ
И ТОНИЗАЦИЯ
КОЖИ



СОКРАЩЕНИЕ
ОТЕЧНОСТИ
ДЕТОКСИКАЦИЯ

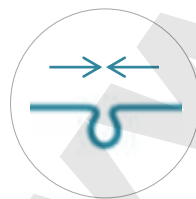

УМЕНЬШЕНИЕ
РАСШИРЕННЫХ
ПОР

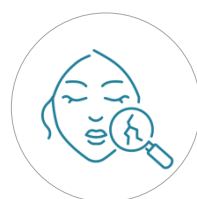

КОРРЕКЦИЯ
ВОЗРАСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ




АКТИВИЗАЦИЯ
РЕГЕНЕРАЦИИ



ВЫРАВНИВАНИЕ
КОЖНОГО
МИКРОРЕЛЬЕФА

ВИБРОМАССАЖ

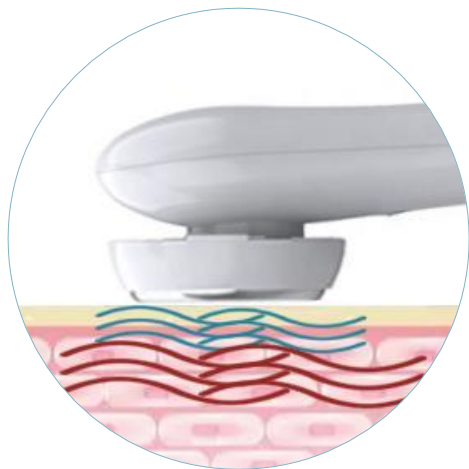

ВИБРОМАССАЖ

ОСНОВАН НА ВОЗДЕЙСТВИИ ВИБРАЦИИ НА НЕРВНЫЕ ОКОНЧАНИЯ КОЖИ, ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ОТВЕТНУЮ РЕАКЦИЮ НЕРВНОЙ, КРОВЕНОСНОЙ И ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМ.

ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА КОЖУ, СОСУДЫ И МЫШЕЧНУЮ ТКАНЬ. ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВИБРАЦИИ РАСШИРЯЮТСЯ СОСУДЫ, ПОВЫШАЕТСЯ ОКСИГЕНАЦИЯ ТКАНЕЙ, АКТИВИЗИРУЕТСЯ КРОВООБРАЩЕНИЕ И ЛИМФОДРЕНАЖ


РЕЗУЛЬТАТЫ



ДРЕНАЖ
ДЕТОКСИКАЦИЯ



УСТРАНЕНИЕ
СПАЗМОВ МЫШЦ

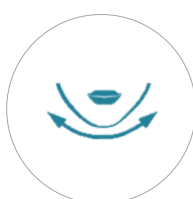

УКРЕПЛЕНИЕ
ОВАЛА ЛИЦА



ПОВЫШЕНИЕ
УПРУГОСТИ
КОЖИ



АКТИВИЗАЦИЯ
КРОВООБРАЩЕНИЯ




НОРМАЛИЗАЦИЯ
РАБОТЫ
САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ



УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА

ИК ПРОГРЕВ

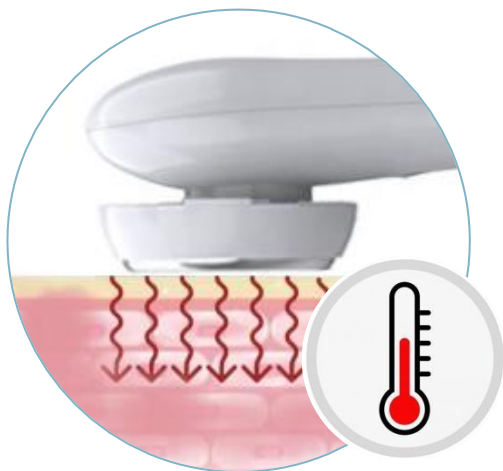

ОБЕСПЕЧИВАЕТ МЯГКИЙ ПРОГРЕВ ТКАНЕЙ НА ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ГЛУБИНУ, ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ НАСЫЩЕНИЯ КЛЕТОК КИСЛОРОДОМ И ПИТАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ. СТИМУЛИРУЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ И ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ, УСИЛИВАЕТ ВЫРАБОТКУ КОЛЛАГЕНА, УКРЕПЛЯЕТ И ПОДТЯГИВАЕТ КОЖУ.

ПРОНИКАЮЩЕЕ ТЕПЛО УСТРАНЯЕТ СПАЗМЫ МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ, ЧТО ПОМОГАЕТ СОКРАТИТЬ ГЛУБИНУ МОРЩИН И КОЖНЫХ СКЛАДОК.

РЕЗУЛЬТАТЫ



УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА



ПОВЫШЕНИЕ
УПРУГОСТИ КОЖИ



СОКРАЩЕНИЕ
ОТЕЧНОСТИ



АКТИВИЗАЦИЯ
РЕГЕНЕРАЦИИ



ГЛУБОКОЕ
ПРОНИКНОВЕНИЕ
КОСМЕТИКИ



АКТИВИЗАЦИЯ
КРОВООБРАЩЕНИЯ



УСТРАНЕНИЕ СПАЗМОВ
МИМИЧЕСКИХ МЫШЦ



ВЫРАВНИВАНИЕ
КОЖНОГО
МИКРОРЕЛЬЕФА

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВАШЕГО АППАРАТА



3

3 РЕЖИМА РАБОТЫ

5

5 УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

РЕЖИМ DEEP CLEAN / РЕЖИМ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ



- УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ С ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ
- УСТРАНЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЗ ПОР
- ОЧИЩЕНИЕ ОТ ЧЕРНЫХ ТОЧЕК
- РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ САЛОТДЕЛЕНИЯ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- СОКРАЩЕНИЕ РАСШИРЕННЫХ ПОР
- ПОДГОТОВКА К КОРРЕКТИРУЮЩЕМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ

РЕЖИМ FULLY ABSORB / РЕЖИМ ПИТАНИЯ



- ГЛУБОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
- ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ И УМЕНЬШЕНИЕ ПОР
- ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КЛЕТОК
- ВЫРАВНИВАНИЕ МИКРОРЕЛЬЕФА
- КОРРЕКЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
- СОКРАЩЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА

РЕЖИМ MOISTURE / РЕЖИМ УВЛАЖНЕНИЯ И ЛИФТИНГА



- ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ
- УСИЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ
- СОКРАЩЕНИЕ ГЛУБИНЫ МОРЩИН
- УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ
- СТИМУЛЯЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ
- УСТРАНЕНИЕ СПАЗМА МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ

БЫСТРЫЙ СТАРТ ИЛИ ГДЕ У НЕГО КНОПКА



ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР ПОДКЛЮЧИТЕ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ К МИКРО-USB РАЗЪЕМУ НА ПРИБОРЕ.



ВКЛЮЧИТЕ ПРИБОР. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ИЗ ТРЕХ РЕЖИМОВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО НАЖИМАЯ КНОПКУ. НАГРЕВ И ВИБРАЦИЯ РАБОТАЮТ ВО ВСЕХ РЕЖИМАХ.



С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ВЫБЕРИТЕ ОДИН ИЗ ПЯТИ УРОВНЕЙ, КОМФОРТНЫЙ ВАМ, ОРИЕНТИРУЯСЬ НА ИНДИКАТОР НА ЭКРАНЕ.



НАНЕСИТЕ КОСМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО НА САЛФЕТКУ И ЗАКРЕПИТЕ ЕЁ ПРИ ПОМОЩИ КОЛЬЦА.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ДЕРЖИТЕ АППАРАТ ТАК, ЧТОБЫ КОНТАКТ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ВНИЗУ НА ЗАДНЕЙ И БОКОВОЙ СТОРОНАХ КОРПУСА, ХОРОШО КАСАЛСЯ КОЖИ ЛАДОНИ И ПАЛЬЦЕВ.



ПРОВЕДИТЕ ПРОЦЕДУРУ, ДВИГАЯСЬ АППАРАТОМ ПО МАССАЖНЫМ ЛИНИЯМ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОБАВЛЯЙТЕ КОНТАКТНЫЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ.



ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ УДАЛИТЕ КОНТАКТНЫЙ ГЕЛЬ, ПОЛОЖИТЕ НА ЛИЦО МАСКУ, ЗАТЕМ НАНЕСИТЕ КРЕМ / СЫВОРОТКУ.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО РАБОТА ПРИБОРА В КАЖДОМ ИЗ РЕЖИМОВ НАЧНЕТСЯ ПОСЛЕ КАСАНИЯ К КОЖЕ КОНТАКТНОГО ЭЛЕКТРОДА.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОЦЕДУРЫ С АППАРАТОМ ПРОХОДИЛИ КОМФОРТНО И С РЕЗУЛЬТАТОМ, ПРИМИТЕ ВО ВНИМАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

ВАЖНО

- НЕ ОКАЗЫВАЙТЕ ЧРЕЗМЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ НА КОЖУ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР.
- ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ДЕРЖИТЕ АППАРАТ ТАК, ЧТОБЫ КОНТАКТ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО БОКАМ И НА ЗАДНЕЙ КРЫШКЕ ПРИБОРА, ХОРОШО КАСАЛСЯ СЛЕГКА ВЛАЖНОЙ КОЖИ ЛАДОНИ И ПАЛЬЦЕВ.
- ВО ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА В ОБЛАСТИ ВИСКОВ И ВОКРУГ ОБЛАСТИ ГЛАЗ ВОЗМОЖНО ПОЯВЛЕНИЕ ЛЕГКИХ МЕРЦАТЕЛЬНЫХ ЗРИТЕЛЬНЫХ ОЩУЩЕНИЙ.
- ПРИ ПРИМЕНЕНИИ АППАРАТА ВОКРУГ РТА ВЫ МОЖЕТЕ ОЩУТИТЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗУБОВ.
- ПРИ НАЛИЧИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗУБНЫХ ИМПЛАНТАНТОВ ИЛИ БРЕКЕТОВ, ИХ СЛЕДУЕТ ИЗОЛИРОВАТЬ ОТ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЩЕК ИЛИ ГУБ С ПОМОЩЬЮ ЛЮБОГО МАТЕРИАЛА (НАПРИМЕР, ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА)
- ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТА НА ЛИЦЕ СЛЕДУЕТ ПРОВЕСТИ ТЕСТ НА МАЛОЗАМЕТНОМ УЧАСТКЕ КОЖИ (НАПРИМЕР, НА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ ПРЕДПЛЕЧЬЯ) И ПОДОЖДАТЬ 24 ЧАСА. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
- **ПРОЦЕДУРЫ ПРОВОДЯТСЯ ПО ПРОВОДЯЩЕМУ ГЕЛЮ ИЛИ СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ КОСМЕТИЧЕСКОМУ СРЕДСТВУ. РАБОТА ПО СУХОЙ КОЖЕ ЗАПРЕЩЕНА!**

ВЫБЕРИТЕ ВАШ ТИП КОЖИ

ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ К ПРОГРАММЕ КРАСОТЫ, РАЗРАБОТАННОЙ
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС

НОРМАЛЬНАЯ

ЖИРНАЯ И СМЕШАННАЯ

СУХАЯ

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ

УВЯДАЮЩАЯ



НОРМАЛЬНАЯ
КОЖА

GALVANIC BEAUTY SPA +
BIO SONIC m 776

.....

ПРОГРАММА КРАСОТЫ ШАГ ЗА ШАГОМ

1й ШАГ: ОЧИЩЕНИЕ / ДЕМАКИЯЖ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА НЕОБХОДИМО ОЧИСТИТЬ КОЖУ ОТ МАКИЯЖА И ВНЕШНИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СКРАБЫ И СРЕДСТВА С АНА КИСЛОТАМИ ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ.

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ-МУСС



4516072 – 120 мл

1

ОЧИСТИТЕ КОЖУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИЦЕЛЛЯРНОГО ОЧИЩАЮЩЕГО ГЕЛЬ-МУССА

НАНЕСИТЕ НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ГЕЛЯ НА КОЖУ ЛИЦА И ШЕИ. СЛЕГКА ПОМАССИРУЙТЕ ВЛАЖНЫМИ КОНЧИКАМИ ПАЛЬЦЕВ, ЗАТЕМ ТЩАТЕЛЬНО СМОЙТЕ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПОВТОРИТЕ МАНИПУЛЯЦИИ. ПРОМОКНИТЕ КОЖУ САЛФЕТКОЙ.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК «HYDRO ACTIVE 30 h»



4516079 – 120 мл

2

ЗАВЕРШИТЕ ОЧИЩЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УВЛАЖНЯЮЩЕГО ТОНИКА

НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРЕПАРАТА НАНЕСИТЕ ПРИ ПОМОЩИ ВАТНОГО ДИСКА НА КОЖУ ЛИЦА И ШЕИ.

2й ШАГ: ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

РЕЖИМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМИ ТОКАМИ, ВИБРАЦИЕЙ И ИК ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ.

ЛОСЬОН ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ "ДЕЗИНКРУСТАНТ"



4501420AR – 250 мл

ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ 4 минуты


1

УСТАНОВИТЕ КНОПКОЙ «ВКЛ/ ВЫКЛ / ВЫБОР РЕЖИМА» РЕЖИМ **DEEP CLEAN**
ВЫБЕРИТЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ КНОПКОЙ «L»


2



ПРОПИТАЙТЕ ЛОСЬОНОМ ДЕЗИНКРУСТАНТОМ МАРЛЕВУЮ ИЛИ НЕТКАНУЮ САЛФЕТКУ, ЗАКРЕПИТЕ ПРИ ПОМОЩИ КОЛЬЦА НА ПРИБОРЕ.

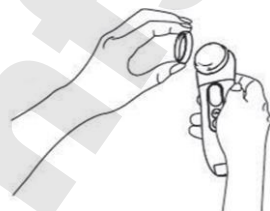


СНИМИТЕ КРЕПЕЖНОЕ КОЛЬЦО С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИБОРА

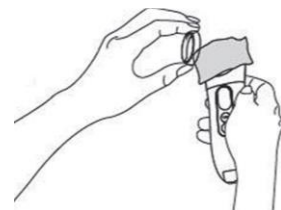

НАНЕСИТЕ ЛОСЬОН НА САЛФЕТКУ. ПРИЛОЖИТЕ САЛФЕТКУ К РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ. ЗАКРЕПИТЕ КОЛЬЦО

3

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ СООТВЕТСТВУЕТ МАССАЖНЫМ ЛИНИЯМ ЛИЦА

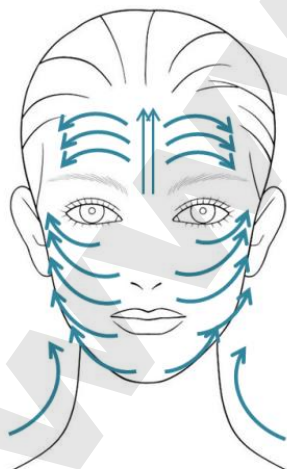

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОВОДИТСЯ МЕДЛЕННЫМИ ПЛАВНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ САЛФЕТКА ДОЛЖНА БЫТЬ ВЛАЖНОЙ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОБАВЛЯЙТЕ ЛОСЬОН НА САЛФЕТКУ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ДЕРЖИТЕ АППАРАТ ТАК, ЧТОБЫ КОНТАКТ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ВНИЗУ НА ЗАДНЕЙ И БОКОВОЙ СТОРОНАХ КОРПУСА, ХОРОШО КАСАЛСЯ КОЖИ ЛАДОНИ И ПАЛЬЦЕВ.

ПО ОКОНЧАНИИ ПРОЦЕДУРЫ СМОЙТЕ С ЛИЦА ОСТАТКИ ЛОСЬОНА, ПРОМОКНИТЕ НАСУХО САЛФЕТКОЙ.

3й ШАГ: ПИТАНИЕ

РЕЖИМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМИ ТОКАМИ, ВИБРАЦИЕЙ И ИК ДЛЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ.

СЫВОРОТОЧНЫЙ
КОНЦЕНТРАТ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 24
ЧАСА "HYDRO BALANCE"



Арт. 4506010KPRO
– 5 X 3 мл

КИСЛОРОДНЫЙ
ГЕЛЬ С
ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ



Арт. 4501418AR
– 250 мл


1

УСТАНОВИТЕ КНОПКОЙ «ВКЛ/ ВЫКЛ / ВЫБОР РЕЖИМА» РЕЖИМ **FULLY ABSORB**. ВЫБЕРИТЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ КНОПКОЙ «L»


2



ПРОПИТАЙТЕ ГЕЛЕМ МАРЛЕВУЮ ИЛИ НЕТКАНУЮ САЛФЕТКУ, ЗАКРЕПИТЕ ПРИ ПОМОЩИ КОЛЬЦА НА ПРИБОРЕ.

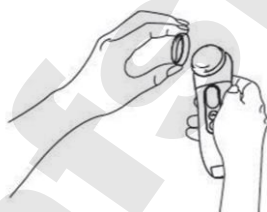

СНИМИТЕ КРЕПЕЖНОЕ КОЛЬЦО С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИБОРА

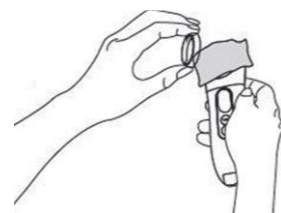

НАНЕСИТЕ ГЕЛЬ НА САЛФЕТКУ. ПРИЛОЖИТЕ САЛФЕТКУ К РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ. ЗАКРЕПИТЕ КОЛЬЦО

ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ 4 минуты

3

НАНЕСИТЕ КОНЦЕНТРАТ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА КОЖУ ПО ЗОНАМ. СНАЧАЛА НАНЕСИТЕ НА ОДНУ ЗОНУ ЛИЦА ОБРАБОТАЙТЕ ЭТУ ЗОНУ АППАРАТОМ, ПРОДОЛЖИТЕ ПРОЦЕДУРУ НА ДРУГОЙ ЗОНЕ.

4


НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ СООТВЕТСТВУЕТ МАССАЖНЫМ ЛИНИЯМ ЛИЦА

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОВОДИТСЯ МЕДЛЕННЫМИ ПЛАВНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ КОЖА И САЛФЕТКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЛАЖНЫМИ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОБАВЛЯЙТЕ ГЕЛЬ.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ДЕРЖИТЕ АППАРАТ ТАК, ЧТОБЫ КОНТАКТ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ВНИЗУ НА ЗАДНЕЙ И БОКОВОЙ СТОРОНАХ КОРПУСА, ХОРОШО КАСАЛСЯ КОЖИ ЛАДОНИ И ПАЛЬЦЕВ.

ПО ОКОНЧАНИИ ПРОЦЕДУРЫ СМОЙТЕ С ЛИЦА ОСТАТКИ ГЕЛЯ, ПРОМОКНИТЕ НАСУХО САЛФЕТКОЙ.

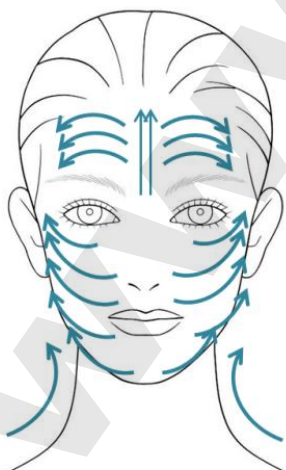

4й ШАГ: УВЛАЖНЕНИЕ И ЛИФТИНГ

РЕЖИМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМИ ТОКАМИ, ВИБРАЦИЕЙ И ИК ДЛЯ ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ И ПОДТЯЖКИ КОЖИ.

СЫВОРОТОЧНЫЙ
КОНЦЕНТРАТ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 24
ЧАСА "HYDRO BALANCE"



Арт. 4506010KPRO
– 5 X 3 мл

КИСЛОРОДНЫЙ
ГЕЛЬ С
ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ



Арт. 4501418AR
– 250 мл

ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ 4 минуты


1

УСТАНОВИТЕ КНОПКОЙ «ВКЛ/ ВЫКЛ / ВЫБОР РЕЖИМА» РЕЖИМ **MOISTURE**. ВЫБЕРИТЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ КНОПКОЙ «L»


2



ПРОПИТАЙТЕ ГЕЛЕМ МАРЛЕВУЮ ИЛИ НЕТКАНУЮ САЛФЕТКУ, ЗАКРЕПИТЕ ПРИ ПОМОЩИ КОЛЬЦА НА ПРИБОРЕ.

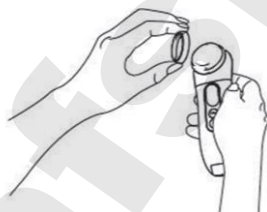

СНИМИТЕ КРЕПЕЖНОЕ КОЛЬЦО С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИБОРА

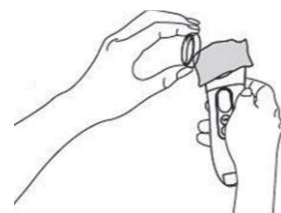

НАНЕСИТЕ ГЕЛЬ НА САЛФЕТКУ. ПРИЛОЖИТЕ САЛФЕТКУ К РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ. ЗАКРЕПИТЕ КОЛЬЦО

3

НАНЕСИТЕ КОНЦЕНТРАТ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА КОЖУ ПО ЗОНАМ. СНАЧАЛА НАНЕСИТЕ НА ОДНУ ЗОНУ ЛИЦА ОБРАБОТАЙТЕ ЭТУ ЗОНУ АППАРАТОМ, ПРОДОЛЖИТЕ ПРОЦЕДУРУ НА ДРУГОЙ ЗОНЕ.

4


НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ СООТВЕТСТВУЕТ МАССАЖНЫМ ЛИНИЯМ ЛИЦА

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОВОДИТСЯ МЕДЛЕННЫМИ ПЛАВНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ КОЖА И САЛФЕТКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЛАЖНЫМИ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОБАВЛЯЙТЕ ГЕЛЬ.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ДЕРЖИТЕ АППАРАТ ТАК, ЧТОБЫ КОНТАКТ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ВНИЗУ НА ЗАДНЕЙ И БОКОВОЙ СТОРОНАХ КОРПУСА, ХОРОШО КАСАЛСЯ КОЖИ ЛАДОНИ И ПАЛЬЦЕВ.

ПО ОКОНЧАНИИ ПРОЦЕДУРЫ СМОЙТЕ С ЛИЦА ОСТАТКИ ГЕЛЯ, ПРОМОКНИТЕ НАСУХО САЛФЕТКОЙ.

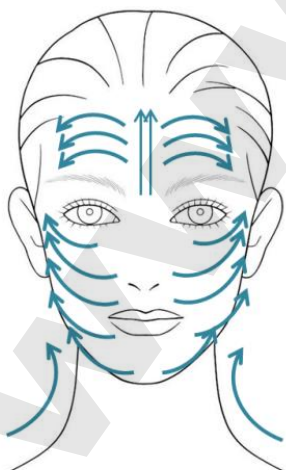

5й ШАГ: ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

ПОСЛЕ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА НУЖНО СОХРАНИТЬ ВЛАГУ И ОБЕСПЕЧИТЬ КОЖЕ НЕОБХОДИМУЮ ЗАЩИТУ ОТ ВНЕШНЕЙ АГРЕССИИ.

РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ
ГИАЛУРОНОВАЯ МАСКА С БЕТА-ГЛЮКАНОМ
"SEA ICE SPRING"



4515939K- 30 мл

ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
«HYDRO ACTIVE 30 h» SPF 15



4516089 – 30 мл



1

АККУРАТНО ИЗВЛЕКИТЕ
МАСКУ ИЗ УПАКОВКИ,
РАЗВЕРНИТЕ И ПОМЕСТИТЕ НА
ЛИЦО, РАЗГЛАДЬТЕ И СЛЕГКА
ПРИЖМИТЕ.



2

ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦИИ
20 - 25 МИНУТ.
ЗАТЕМ АККУРАТНО
СНИМИТЕ МАСКУ, ЛЕГКО
МАССИРУЙТЕ ДЛЯ
ВПИТЫВАНИЯ РАСТВОРА.



3

НАНЕСИТЕ ИНТЕНСИВНО
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
«HYDRO ACTIVE 30 h» SPF 15
ЛЕГКИМИ ДВИЖЕНИЯМИ.

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД – ЗАЛОГ УСПЕХА

НОРМАЛЬНАЯ КОЖА – ЭТО «ИДЕАЛЬНЫЙ» ТИП, КОТОРОМУ ХАРАКТЕРЕН ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС. ЧТОБЫ НЕ НАРУШИТЬ РАВНОВЕСИЕ И СОХРАНИТЬ КРАСОТУ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ, НЕОБХОДИМО РЕГУЛЯРНО УХАЖИВАТЬ ЗА КОЖЕЙ.

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД СЕРИЯ «HYDRO ACTIVE 30 h»



ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДНОГО БАЛАНСА КОЖИ, НАСЫЩАЕТ ВЛАГОЙ И ПОМОГАЕТ СОХРАНИТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ УВЛАЖНЕННОСТИ НА ДОЛГОЕ ВРЕМЯ.

ЭКСПРЕСС – УХОД



4515941K
УВЛАЖНЯЮЩАЯ
АНТИОКСИДАНТНАЯ МАСКА С
КОМПЛЕКСОМ ГИДРОНЕЗИС +
БИОЛИН



4515944K
РЕВИТАЛИЗУЮЩАЯ
ПИТАТЕЛЬНАЯ НОЧНАЯ МАСКА
С КОМПЛЕКСОМ МОДУКИН +
БИОЛИН

МАСКИ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-УХОДА ПОМОГУТ БЫСТРО ВОССТАНОВИТЬ ЖИЗНЕННУЮ ЭНЕРГИЮ КОЖИ, ЕСЛИ ВЫ УСТАЛИ.

КУРС ИНТЕНСИВНОГО УХОДА

**15
ПРОЦЕДУР**

**2 -3 РАЗА В
НЕДЕЛЮ**

ИСПОЛЬЗУЙТЕ АППАРАТ

1 РАЗ В 6 МЕСЯЦЕВ для
ИНТЕНСИВНОГО УХОДА ЗА
КОЖЕЙ И ЗАМЕДЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОВ СТАРЕНИЯ

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ УХОД

**1 РАЗ В
НЕДЕЛЮ**

**В ТЕЧЕНИЕ
1 МЕСЯЦА**

ИСПОЛЬЗУЙТЕ АППАРАТ
для ПОДДЕРЖАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ в ТЕЧЕНИЕ 1
МЕСЯЦА ПОСЛЕ
ОСНОВНОГО КУРСА
КОРРЕКЦИИ.



ЖИРНАЯ
И СМЕШАННАЯ
КОЖА

GALVANIC BEAUTY SPA +
BIO SONIC m 776



ПРОГРАММА КРАСОТЫ ШАГ ЗА ШАГОМ

1й ШАГ: ОЧИЩЕНИЕ / ДЕМАКИЯЖ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА НЕОБХОДИМО ОЧИСТИТЬ КОЖУ ОТ МАКИЯЖА И ВНЕШНИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СКРАБЫ И СРЕДСТВА С АНА КИСЛОТАМИ ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ.

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ КОЖИ



4516503 – 120 мл

1

ОЧИСТИТЕ КОЖУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИЦЕЛЛЯРНОГО ОЧИЩАЮЩЕГО ГЕЛЯ «UNIMATT + »

НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ГЕЛЯ НАНЕСИТЕ НА ЛИЦО И ШЕЮ, ИЗБЕГАЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ. СЛЕГКА ПОМАССИРУЙТЕ КОНЧИКАМИ ПАЛЬЦЕВ, ЗАТЕМ ТЩАТЕЛЬНО СМОЙТЕ.

МАТИРУЮЩИЙ ТОНИК С ПРЕБИОТИКОМ ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ КОЖИ



4516501 - 120 мл

2

ЗАВЕРШИТЕ ОЧИЩЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТИРУЮЩЕГО ТОНИКА

НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ТОНИКА НАНЕСИТЕ ПРИ ПОМОЩИ ВАТНОГО ДИСКА НА КОЖУ ЛИЦА И ШЕИ.

2й ШАГ: ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

РЕЖИМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМИ ТОКАМИ, ВИБРАЦИЕЙ И ИК ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ.

ЛОСЬОН ДЛЯ ГЛУБОКОГО
ОЧИЩЕНИЯ "ДЕЗИНКРУСТАНТ"



4501420AR – 250 мл


1

УСТАНОВИТЕ КНОПКОЙ «ВКЛ/ ВЫКЛ / ВЫБОР РЕЖИМА» РЕЖИМ DEEP CLEAN
ВЫБЕРИТЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ КНОПКОЙ «L»


2



ПРОПИТАЙТЕ ЛОСЬОНОМ
ДЕЗИНКРУСТАНТОМ МАРЛЕВУЮ ИЛИ
НЕТКАНУЮ САЛФЕТКУ, ЗАКРЕПИТЕ ПРИ
ПОМОЩИ КОЛЬЦА НА ПРИБОРЕ.

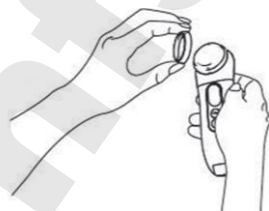

СНИМИТЕ КРЕПЕЖНОЕ КОЛЬЦО С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИБОРА

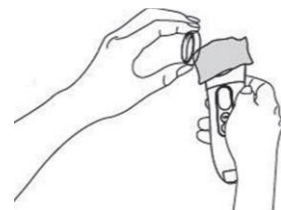

НАНЕСИТЕ ЛОСЬОН НА САЛФЕТКУ.
ПРИЛОЖИТЕ САЛФЕТКУ К РАБОЧЕЙ
ПОВЕРХНОСТИ. ЗАКРЕПИТЕ КОЛЬЦО

ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ 4 минуты

3


НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ СООТВЕТСТВУЕТ
МАССАЖНЫМ ЛИНИЯМ ЛИЦА

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОВОДИТСЯ МЕДЛЕННЫМИ ПЛАВНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ САЛФЕТКА ДОЛЖНА БЫТЬ ВЛАЖНОЙ.
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОБАВЛЯЙТЕ ЛОСЬОН НА САЛФЕТКУ ВО
ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ДЕРЖИТЕ АППАРАТ ТАК, ЧТОБЫ КОНТАКТ,
РАСПОЛОЖЕННЫЙ ВНИЗУ НА ЗАДНЕЙ И БОКОВОЙ СТОРОНАХ
КОРПУСА, ХОРОШО КАСАЛСЯ КОЖИ ЛАДОНИ И ПАЛЬЦЕВ.

ПО ОКОНЧАНИИ ПРОЦЕДУРЫ СМОЙТЕ С ЛИЦА ОСТАТКИ ЛОСЬОНА,
ПРОМОКНИТЕ НАСУХО САЛФЕТКОЙ.

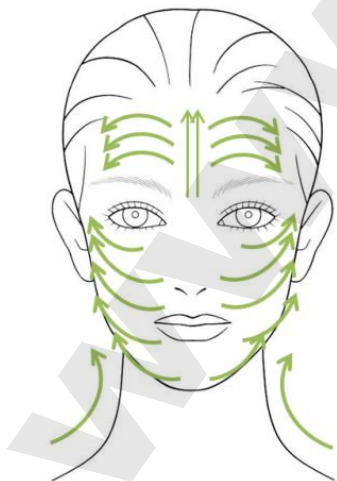

3й ШАГ: ПИТАНИЕ

РЕЖИМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМИ ТОКАМИ, ВИБРАЦИЕЙ И ИК ДЛЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ.



СЫВОРОТОЧНЫЙ
КОНЦЕНТРАТ АНТИ-
АКНЕ
"STOP ACNE"

4506013KPRO
– 5 x 3 мл



ГЕЛЬ «АКВА-ГЕЛЬ
АЛОЭ-ВЕРА»

4501417AR
– 250 мл

ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ 2 минуты


1

УСТАНОВИТЕ КНОПКОЙ «ВКЛ/ ВЫКЛ / ВЫБОР РЕЖИМА» РЕЖИМ FULLY ABSORB. ВЫБЕРИТЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ КНОПКОЙ «L»


2



ПРОПИТАЙТЕ ГЕЛЕМ МАРЛЕВУЮ ИЛИ НЕТКАНУЮ САЛФЕТКУ, ЗАКРЕПИТЕ ПРИ ПОМОЩИ КОЛЬЦА НА ПРИБОРЕ.

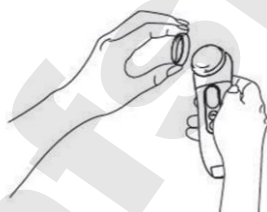

СНИМИТЕ КРЕПЕЖНОЕ КОЛЬЦО С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИБОРА

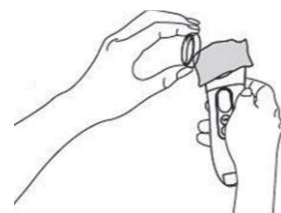

НАНЕСИТЕ ГЕЛЬ НА САЛФЕТКУ. ПРИЛОЖИТЕ САЛФЕТКУ К РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ. ЗАКРЕПИТЕ КОЛЬЦО

3

НАНЕСИТЕ КОНЦЕНТРАТ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА КОЖУ ПО ЗОНАМ. СНАЧАЛА НАНЕСИТЕ НА ОДНУ ЗОНУ ЛИЦА, ОБРАБОТАЙТЕ ЭТУ ЗОНУ АППАРАТОМ, ПРОДОЛЖИТЕ ПРОЦЕДУРУ НА ДРУГОЙ ЗОНЕ.

4


НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ СООТВЕТСТВУЕТ МАССАЖНЫМ ЛИНИЯМ ЛИЦА

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОВОДИТСЯ МЕДЛЕННЫМИ ПЛАВНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ КОЖА И САЛФЕТКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЛАЖНЫМИ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОБАВЛЯЙТЕ ГЕЛЬ.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ДЕРЖИТЕ АППАРАТ ТАК, ЧТОБЫ КОНТАКТ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ВНИЗУ НА ЗАДНЕЙ И БОКОВОЙ СТОРОНАХ КОРПУСА, ХОРОШО КАСАЛСЯ КОЖИ ЛАДОНИ И ПАЛЬЦЕВ.

ПО ОКОНЧАНИИ ПРОЦЕДУРЫ СМОЙТЕ С ЛИЦА ОСТАТКИ ГЕЛЯ, ПРОМОКНИТЕ НАСУХО САЛФЕТКОЙ.

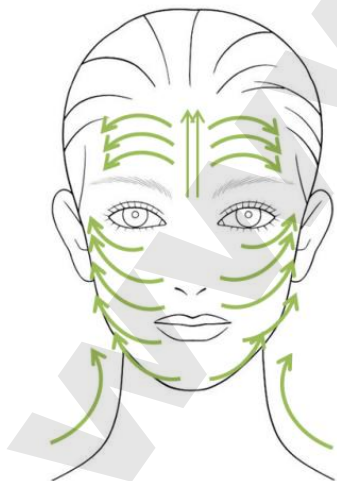

4й ШАГ: УВЛАЖНЕНИЕ И ЛИФТИНГ

РЕЖИМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМИ ТОКАМИ, ВИБРАЦИЕЙ И ИК ДЛЯ ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ И ПОДТЯЖКИ КОЖИ.

СЫВОРОТОЧНЫЙ
КОНЦЕНТРАТ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 24
ЧАСА "HYDRO BALANCE"



Арт. 4506010KPRO
– 5 X 3 мл

ГЕЛЬ «АКВА-ГЕЛЬ
АЛОЭ-ВЕРА»



4501417AR
– 250 мл

ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ 4 минуты


1

УСТАНОВИТЕ КНОПКОЙ «ВКЛ/ ВЫКЛ / ВЫБОР РЕЖИМА» РЕЖИМ **MOISTURE**. ВЫБЕРИТЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ КНОПКОЙ «L»


2



ПРОПИТАЙТЕ ГЕЛЕМ МАРЛЕВУЮ ИЛИ НЕТКАНУЮ САЛФЕТКУ, ЗАКРЕПИТЕ ПРИ ПОМОЩИ КОЛЬЦА НА ПРИБОРЕ.

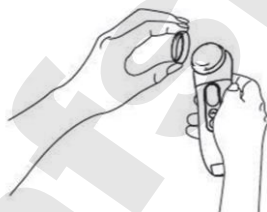

СНИМИТЕ КРЕПЕЖНОЕ КОЛЬЦО С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИБОРА

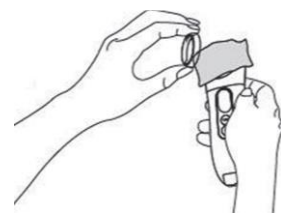

НАНЕСИТЕ ГЕЛЬ НА САЛФЕТКУ. ПРИЛОЖИТЕ САЛФЕТКУ К РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ. ЗАКРЕПИТЕ КОЛЬЦО

3

НАНЕСИТЕ КОНЦЕНТРАТ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА КОЖУ ПО ЗОНАМ. СНАЧАЛА НАНЕСИТЕ НА ОДНУ ЗОНУ ЛИЦА ОБРАБОТАЙТЕ ЭТУ ЗОНУ АППАРАТОМ, ПРОДОЛЖИТЕ ПРОЦЕДУРУ НА ДРУГОЙ ЗОНЕ.

4


НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ СООТВЕТСТВУЕТ МАССАЖНЫМ ЛИНИЯМ ЛИЦА

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОВОДИТСЯ МЕДЛЕННЫМИ ПЛАВНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ КОЖА И САЛФЕТКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЛАЖНЫМИ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОБАВЛЯЙТЕ ГЕЛЬ.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ДЕРЖИТЕ АППАРАТ ТАК, ЧТОБЫ КОНТАКТ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ВНИЗУ НА ЗАДНЕЙ И БОКОВОЙ СТОРОНАХ КОРПУСА, ХОРОШО КАСАЛСЯ КОЖИ ЛАДОНИ И ПАЛЬЦЕВ.

ПО ОКОНЧАНИИ ПРОЦЕДУРЫ СМОЙТЕ С ЛИЦА ОСТАТКИ ГЕЛЯ, ПРОМОКНИТЕ НАСУХО САЛФЕТКОЙ.

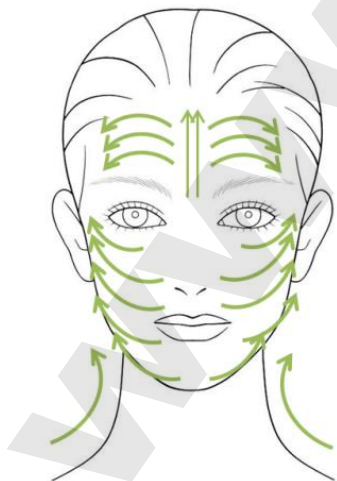

5й ШАГ: ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

ПОСЛЕ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА НУЖНО СОХРАНИТЬ ВЛАГУ И ОБЕСПЕЧИТЬ КОЖЕ НЕОБХОДИМУЮ ЗАЩИТУ ОТ ВНЕШНЕЙ АГРЕССИИ.

МАСКА С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ



4515879K

КРЕМ-КОРРЕКТОР ПОР И
САЛЬНОГО БЛЕСКА ДЛЯ ЖИРНОЙ
И СМЕШАННОЙ КОЖИ



4516506 – 30 мл



1

АККУРАТНО ИЗВЛЕКИТЕ
МАСКУ ИЗ УПАКОВКИ,
РАЗВЕРНИТЕ И ПОМЕСТИТЕ НА
ЛИЦО, РАЗГЛАДЬТЕ И СЛЕГКА
ПРИЖМИТЕ.



2

ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦИИ
20 - 25 МИНУТ.
ЗАТЕМ АККУРАТНО СНИМИТЕ
МАСКУ, ЛЕГКО МАССИРУЙТЕ
ДЛЯ ВПИТЫВАНИЯ РАСТВОРА.



3

НАНЕСИТЕ КРЕМ-
КОРРЕКТОР ПОР И
САЛЬНОГО БЛЕСКА
ЛЕГКИМИ
ДВИЖЕНИЯМИ.

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД – ЗАЛОГ УСПЕХА

ЖИРНАЯ КОЖА ОЧЕНЬ НУЖДАЕТСЯ В УВЛАЖНЕНИИ И СОХРАНЕНИИ БАЛАНСА. ЧТОБЫ КОЖА БЫЛА ЧИСТОЙ, МАТОВОЙ И ЗДОРОВОЙ, НЕОБХОДИМ РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД.

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД СЕРИЯ «UNIMATT +»



ПРЕПАРАТЫ СЕРИИ **UNIMATT +** НОРМАЛИЗУЮТ ПРОЦЕССЫ САЛООТДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩАЮТ ВОСПАЛЕНИЕ И БЛЕСК, УМЕНЬШАЮТ РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ, ВОССТАНАВЛИВАЮТ МИКРОБИОМ КОЖИ И ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЩАДЯЩИЙ УХОД.

ЭКСПРЕСС – УХОД



4516421K
КАРБОКСОТЕРАПИЯ
МАСКА ПУЗЫРЬКОВАЯ
"ДЕТОКС И СИЯНИЕ"



4515939K
РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ
УВЛАЖНЯЮЩАЯ
ГИАЛУРОНОВАЯ МАСКА С БЕТА-
ГЛЮКАНОМ "SEA ICE SPRING"

МАСКИ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-УХОДА ПОМОГУТ БЫСТРО ВОССТАНОВИТЬ ЖИЗНЕННУЮ ЭНЕРГИЮ КОЖИ, ЕСЛИ ВЫ УСТАЛИ.

КУРС ИНТЕНСИВНОГО УХОДА

15
ПРОЦЕДУР

2 -3 РАЗА В
НЕДЕЛЮ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ АППАРАТ

1 РАЗ В 6 МЕСЯЦЕВ ДЛЯ
ИНТЕНСИВНОГО УХОДА ЗА
КОЖЕЙ И ЗАМЕДЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОВ СТАРЕНИЯ

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ УХОД

1 РАЗ В
НЕДЕЛЮ

В ТЕЧЕНИЕ
1 МЕСЯЦА

ИСПОЛЬЗУЙТЕ АППАРАТ
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ В ТЕЧЕНИЕ 1
МЕСЯЦА ПОСЛЕ
ОСНОВНОГО КУРСА
КОРРЕКЦИИ.



GALVANIC BEAUTY SPA +
BIO SONIC m 776



ПРОГРАММА КРАСОТЫ ШАГ ЗА ШАГОМ

1й ШАГ: ОЧИЩЕНИЕ / ДЕМАКИЯЖ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА НЕОБХОДИМО ОЧИСТИТЬ КОЖУ ОТ МАКИЯЖА И ВНЕШНИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СКРАБЫ И СРЕДСТВА С АНА КИСЛОТАМИ ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ.

ОЧИЩАЮЩИЕ СЛИВКИ



4516077 – 120 мл

1

ОЧИСТИТЕ КОЖУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЧИЩАЮЩИХ СЛИВОК.

НАНЕСИТЕ НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРЕПАРАТА ВАТНЫМИ ДИСКАМИ ИЛИ РУКАМИ НА КОЖУ ЛИЦА И ШЕИ. СЛЕГКА ПОМАССИРУЙТЕ ВЛАЖНЫМИ КОНЧИКАМИ ПАЛЬЦЕВ, ЗАТЕМ ТЩАТЕЛЬНО СМОЙТЕ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПОВТОРИТЕ МАНИПУЛЯЦИИ. ПРОМОКНИТЕ КОЖУ САЛФЕТКОЙ.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК «HYDRO ACTIVE 30 h»



4516079 – 120 мл

2

ЗАВЕРШИТЕ ОЧИЩЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УВЛАЖНЯЮЩЕГО ТОНИКА

НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРЕПАРАТА НАНЕСИТЕ ПРИ ПОМОЩИ ВАТНОГО ДИСКА НА КОЖУ ЛИЦА И ШЕИ.

2й ШАГ: ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

РЕЖИМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМИ ТОКАМИ, ВИБРАЦИЕЙ И ИК ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ.

ЛОСЬОН ДЛЯ ГЛУБОКОГО
ОЧИЩЕНИЯ "ДЕЗИНКРУСТАНТ"



4501420AR – 250 мл


1

УСТАНОВИТЕ КНОПКОЙ «ВКЛ/ ВЫКЛ / ВЫБОР РЕЖИМА» **РЕЖИМ DEEP CLEAN**
ВЫБЕРИТЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ КНОПКОЙ «L»


2



ПРОПИТАЙТЕ ЛОСЬОНОМ
ДЕЗИНКРУСТАНТОМ МАРЛЕВУЮ ИЛИ
НЕТКАНУЮ САЛФЕТКУ, ЗАКРЕПИТЕ ПРИ
ПОМОЩИ КОЛЬЦА НА ПРИБОРЕ.

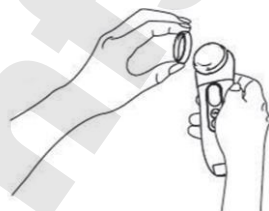

СНИМИТЕ КРЕПЕЖНОЕ КОЛЬЦО С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИБОРА

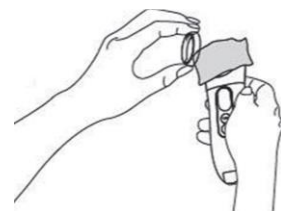


НАНЕСИТЕ ЛОСЬОН НА САЛФЕТКУ.
ПРИЛОЖИТЕ САЛФЕТКУ К РАБОЧЕЙ
ПОВЕРХНОСТИ. ЗАКРЕПИТЕ КОЛЬЦО

ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ 2 минуты

3

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ СООТВЕТСТВУЕТ
МАССАЖНЫМ ЛИНИЯМ ЛИЦА

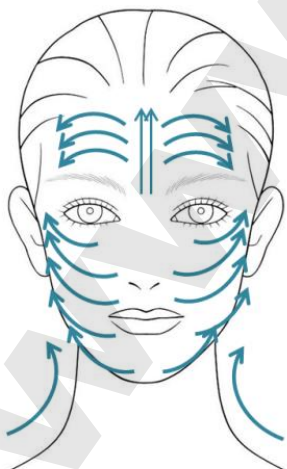

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОВОДИТСЯ МЕДЛЕННЫМИ ПЛАВНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ САЛФЕТКА ДОЛЖНА БЫТЬ ВЛАЖНОЙ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОБАВЛЯЙТЕ ЛОСЬОН НА САЛФЕТКУ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ДЕРЖИТЕ АППАРАТ ТАК, ЧТОБЫ КОНТАКТ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ВНИЗУ НА ЗАДНЕЙ И БОКОВОЙ СТОРОНАХ КОРПУСА, ХОРОШО КАСАЛСЯ КОЖИ ЛАДОНИ И ПАЛЬЦЕВ.

ПО ОКОНЧАНИИ ПРОЦЕДУРЫ СМОЙТЕ С ЛИЦА ОСТАТКИ ЛОСЬОНА, ПРОМОКНИТЕ НАСУХО САЛФЕТКОЙ.

3й ШАГ: ПИТАНИЕ

РЕЖИМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМИ ТОКАМИ, ВИБРАЦИЕЙ И ИК ДЛЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ.

СЫВОРОТОЧНЫЙ
КОНЦЕНТРАТ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 24
ЧАСА "HYDRO BALANCE"



4506010KPRO
– 5 X 3 мл

КИСЛОРОДНЫЙ
ГЕЛЬ С
ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ



4501418AR
– 250 мл


1

УСТАНОВИТЕ КНОПКОЙ «ВКЛ/ ВЫКЛ / ВЫБОР РЕЖИМА» **РЕЖИМ FULLY ABSORB**. ВЫБЕРИТЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ КНОПКОЙ «L»


2



ПРОПИТАЙТЕ ГЕЛЕМ МАРЛЕВУЮ ИЛИ НЕТКАНУЮ САЛФЕТКУ, ЗАКРЕПИТЕ ПРИ ПОМОЩИ КОЛЬЦА НА ПРИБОРЕ.

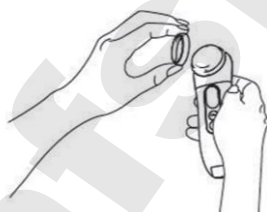

СНИМИТЕ КРЕПЕЖНОЕ КОЛЬЦО С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИБОРА

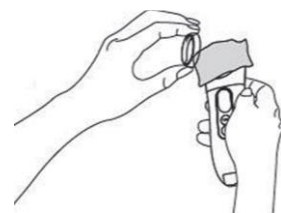

НАНЕСИТЕ ГЕЛЬ НА САЛФЕТКУ. ПРИЛОЖИТЕ САЛФЕТКУ К РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ. ЗАКРЕПИТЕ КОЛЬЦО

ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ 4 минуты

3

НАНЕСИТЕ КОНЦЕНТРАТ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА КОЖУ ПО ЗОНАМ. СНАЧАЛА НАНЕСИТЕ НА ОДНУ ЗОНУ ЛИЦА ОБРАБОТАЙТЕ ЭТУ ЗОНУ АППАРАТОМ, ПРОДОЛЖИТЕ ПРОЦЕДУРУ НА ДРУГОЙ ЗОНЕ.

4


НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ СООТВЕТСТВУЕТ МАССАЖНЫМ ЛИНИЯМ ЛИЦА

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОВОДИТСЯ МЕДЛЕННЫМИ ПЛАВНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ КОЖА И САЛФЕТКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЛАЖНЫМИ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОБАВЛЯЙТЕ ГЕЛЬ.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ДЕРЖИТЕ АППАРАТ ТАК, ЧТОБЫ КОНТАКТ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ВНИЗУ НА ЗАДНЕЙ И БОКОВОЙ СТОРОНАХ КОРПУСА, ХОРОШО КАСАЛСЯ КОЖИ ЛАДОНИ И ПАЛЬЦЕВ.

ПО ОКОНЧАНИИ ПРОЦЕДУРЫ СМОЙТЕ С ЛИЦА ОСТАТКИ ГЕЛЯ, ПРОМОКНИТЕ НАСУХО САЛФЕТКОЙ.

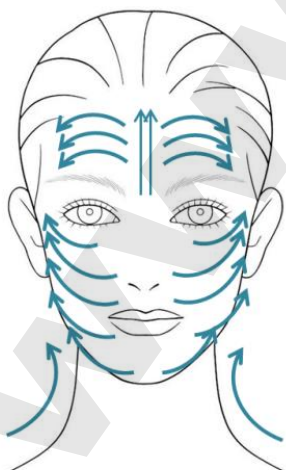

4й ШАГ: УВЛАЖНЕНИЕ И ЛИФТИНГ

РЕЖИМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМИ ТОКАМИ, ВИБРАЦИЕЙ И ИК ДЛЯ ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ И ПОДТЯЖКИ КОЖИ.

СЫВОРОТОЧНЫЙ
КОНЦЕНТРАТ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 24
ЧАСА "HYDRO BALANCE"



Арт. 4506010KPRO
– 5 X 3 мл

КИСЛОРОДНЫЙ
ГЕЛЬ С
ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ



Арт. 4501418AR
– 250 мл


1

УСТАНОВИТЕ КНОПКОЙ «ВКЛ/ ВЫКЛ / ВЫБОР РЕЖИМА» РЕЖИМ **MOISTURE**. ВЫБЕРИТЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ КНОПКОЙ «L»


2



ПРОПИТАЙТЕ ГЕЛЕМ МАРЛЕВУЮ ИЛИ НЕТКАНУЮ САЛФЕТКУ, ЗАКРЕПИТЕ ПРИ ПОМОЩИ КОЛЬЦА НА ПРИБОРЕ.

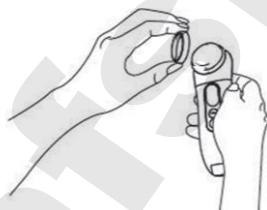

СНИМИТЕ КРЕПЕЖНОЕ КОЛЬЦО С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИБОРА

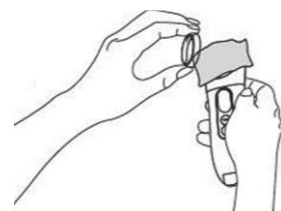

НАНЕСИТЕ ГЕЛЬ НА САЛФЕТКУ. ПРИЛОЖИТЕ САЛФЕТКУ К РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ. ЗАКРЕПИТЕ КОЛЬЦО

ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ 4 минуты

3

НАНЕСИТЕ КОНЦЕНТРАТ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА КОЖУ ПО ЗОНАМ. СНАЧАЛА НАНЕСИТЕ НА ОДНУ ЗОНУ ЛИЦА ОБРАБОТАЙТЕ ЭТУ ЗОНУ АППАРАТОМ, ПРОДОЛЖИТЕ ПРОЦЕДУРУ НА ДРУГОЙ ЗОНЕ.

4


НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ СООТВЕТСТВУЕТ МАССАЖНЫМ ЛИНИЯМ ЛИЦА

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОВОДИТСЯ МЕДЛЕННЫМИ ПЛАВНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ КОЖА И САЛФЕТКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЛАЖНЫМИ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОБАВЛЯЙТЕ ГЕЛЬ.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ДЕРЖИТЕ АППАРАТ ТАК, ЧТОБЫ КОНТАКТ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ВНИЗУ НА ЗАДНЕЙ И БОКОВОЙ СТОРОНАХ КОРПУСА, ХОРОШО КАСАЛСЯ КОЖИ ЛАДОНИ И ПАЛЬЦЕВ.

ПО ОКОНЧАНИИ ПРОЦЕДУРЫ СМОЙТЕ С ЛИЦА ОСТАТКИ ГЕЛЯ, ПРОМОКНИТЕ НАСУХО САЛФЕТКОЙ.

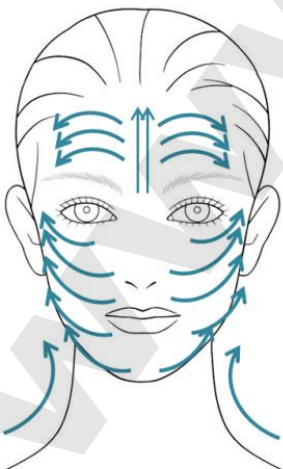

5й ШАГ: ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

ПОСЛЕ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА НУЖНО СОХРАНИТЬ ВЛАГУ И ОБЕСПЕЧИТЬ КОЖЕ НЕОБХОДИМУЮ ЗАЩИТУ ОТ ВНЕШНЕЙ АГРЕССИИ.

РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ
ГИАЛУРОНОВАЯ МАСКА С БЕТА-ГЛЮКАНОМ
"SEA ICE SPRING"



4515939K- 30 мл

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ-ПАРФЕ
С ФОСОФЛИПИДАМИ
«HYALURON - HYDRO ACTIVE» SPF 15



4516087 – 50 мл

1

АККУРАТНО ИЗВЛЕКИТЕ
МАСКУ ИЗ УПАКОВКИ,
РАЗВЕРНИТЕ И ПОМЕСТИТЕ НА
ЛИЦО, РАЗГЛАДЬТЕ И СЛЕГКА
ПРИЖМИТЕ.

2

ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦИИ
20 - 25 МИНУТ.
ЗАТЕМ АККУРАТНО
СНИМИТЕ МАСКУ, ЛЕГКО
МАССИРУЙТЕ ДЛЯ
ВПИТЫВАНИЯ РАСТВОРА.

3

НАНЕСИТЕ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ-ПАРФЕ
С ФОСОФЛИПИДАМИ
«HYALURON - HYDRO ACTIVE»
SPF 15 ЛЕГКИМИ ДВИЖЕНИЯМИ.

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД – ЗАЛОГ УСПЕХА

СУХАЯ КОЖА НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ, ЕЙ НЕОБХОДИМА ВЛАГА И ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ КОЖУ ОТ ВНЕШНЕЙ АГРЕССИИ И СОХРАНИТЬ КРАСОТУ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ, НЕОБХОДИМ РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД.

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД СЕРИЯ «HYDRO ACTIVE 30 h»



ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДНОГО БАЛАНСА КОЖИ, НАСЫЩАЕТ ВЛАГОЙ И ПОМОГАЕТ СОХРАНИТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ УВЛАЖНЕННОСТИ НА ДОЛГОЕ ВРЕМЯ.

ЭКСПРЕСС – УХОД



4515941K
УВЛАЖНЯЮЩАЯ
АНТИОКСИДАНТНАЯ МАСКА С
КОМПЛЕКСОМ ГИДРОНЕЗИС +
БИОЛИН



4515944K
РЕВИТАЛИЗУЮЩАЯ
ПИТАТЕЛЬНАЯ НОЧНАЯ МАСКА
С КОМПЛЕКСОМ МОДУКИН +
БИОЛИН

МАСКИ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-УХОДА ПОМОГУТ БЫСТРО ВОССТАНОВИТЬ ЖИЗНЕННУЮ ЭНЕРГИЮ КОЖИ, ЕСЛИ ВЫ УСТАЛИ.

КУРС ИНТЕНСИВНОГО УХОДА

**15
ПРОЦЕДУР**

**2 -3 РАЗА В
НЕДЕЛЮ**

ИСПОЛЬЗУЙТЕ АППАРАТ

1 РАЗ В 6 МЕСЯЦЕВ ДЛЯ
ИНТЕНСИВНОГО УХОДА ЗА
КОЖЕЙ И ЗАМЕДЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОВ СТАРЕНИЯ

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ УХОД

**1 РАЗ В
НЕДЕЛЮ**

**В ТЕЧЕНИЕ
1 МЕСЯЦА**

ИСПОЛЬЗУЙТЕ АППАРАТ
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ В ТЕЧЕНИЕ 1
МЕСЯЦА ПОСЛЕ
ОСНОВНОГО КУРСА
КОРРЕКЦИИ.



ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ
КОЖА

GALVANIC BEAUTY SPA +
BIO SONIC m 776

.....

ПРОГРАММА КРАСОТЫ ШАГ ЗА ШАГОМ

1й ШАГ: ОЧИЩЕНИЕ / ДЕМАКИЯЖ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА НЕОБХОДИМО ОЧИСТИТЬ КОЖУ ОТ МАКИЯЖА И ВНЕШНИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СКРАБЫ И СРЕДСТВА С АНА КИСЛОТАМИ ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ.

КИСЛОРОДНАЯ ПЕНКА
ДЛЯ УМЫВАНИЯ С ХЛОПКОМ



4516052A – 120 мл

1

ОЧИСТИТЕ КОЖУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КИСЛОРОДНОЙ ПЕНКИ С ХЛОПКОМ

ЭНЕРГИЧНО ВСТРЯХНИТЕ ФЛАКОН, ВЫДАВИТЕ ПЕНКУ НА ЛАДОНЬ. РАСПРЕДЕЛИТЕ ПРЕПАРАТ ПО КОЖЕ ЛИЦА, ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ. ПОМАССИРУЙТЕ КОНЧИКАМИ ПАЛЬЦЕВ, ОЧИЩАЯ КОЖУ ОТ МАКИЯЖА И ГРЯЗИ. ОСТАТКИ ПРЕПАРАТА ОБИЛЬНО СМОЙТЕ ЧУТЬ ТЕПЛОЙ ВОДОЙ, ПРОМОКНИТЕ ЛИЦО САЛФЕТКОЙ.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК
«HYDRO ACTIVE 30 h»



4516079 – 120 мл

2

ЗАВЕРШИТЕ ОЧИЩЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
УВЛАЖНЯЮЩЕГО ТОНИКА

НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРЕПАРАТА НАНЕСИТЕ ПРИ ПОМОЩИ ВАТНОГО ДИСКА НА КОЖУ ЛИЦА И ШЕИ.

2й ШАГ: ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

РЕЖИМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМИ ТОКАМИ, ВИБРАЦИЕЙ И ИК ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ.

ЛОСЬОН ДЛЯ ГЛУБОКОГО
ОЧИЩЕНИЯ "ДЕЗИНКРУСТАНТ"



4501420AR – 250 мл


1

УСТАНОВИТЕ КНОПКОЙ «ВКЛ/ ВЫКЛ / ВЫБОР РЕЖИМА» РЕЖИМ DEEP CLEAN
ВЫБЕРИТЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ КНОПКОЙ «L»


2



ПРОПИТАЙТЕ ЛОСЬОНОМ
ДЕЗИНКРУСТАНТОМ МАРЛЕВУЮ ИЛИ
НЕТКАНУЮ САЛФЕТКУ, ЗАКРЕПИТЕ ПРИ
ПОМОЩИ КОЛЬЦА НА ПРИБОРЕ.

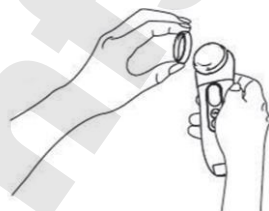

СНИМИТЕ КРЕПЕЖНОЕ КОЛЬЦО С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИБОРА

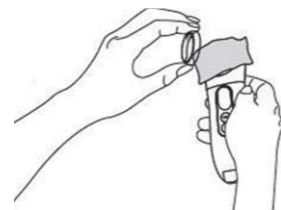

НАНЕСИТЕ ЛОСЬОН НА САЛФЕТКУ.
ПРИЛОЖИТЕ САЛФЕТКУ К РАБОЧЕЙ
ПОВЕРХНОСТИ. ЗАКРЕПИТЕ КОЛЬЦО

ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ 2 минуты

3

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ СООТВЕТСТВУЕТ
МАССАЖНЫМ ЛИНИЯМ ЛИЦА



ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОВОДИТСЯ МЕДЛЕННЫМИ ПЛАВНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ САЛФЕТКА ДОЛЖНА БЫТЬ ВЛАЖНОЙ.
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОБАВЛЯЙТЕ ЛОСЬОН НА САЛФЕТКУ ВО
ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ДЕРЖИТЕ АППАРАТ ТАК, ЧТОБЫ КОНТАКТ,
РАСПОЛОЖЕННЫЙ ВНИЗУ НА ЗАДНЕЙ И БОКОВОЙ СТОРОНАХ
КОРПУСА, ХОРОШО КАСАЛСЯ КОЖИ ЛАДОНИ И ПАЛЬЦЕВ.

ПО ОКОНЧАНИИ ПРОЦЕДУРЫ СМОЙТЕ С ЛИЦА ОСТАТКИ ЛОСЬОНА,
ПРОМОКНИТЕ НАСУХО САЛФЕТКОЙ.

3й ШАГ: ПИТАНИЕ

РЕЖИМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМИ ТОКАМИ, ВИБРАЦИЕЙ И ИК ДЛЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ.

СЫВОРОТОЧНЫЙ
КОНЦЕНТРАТ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 24
ЧАСА "HYDRO BALANCE"



Арт. 4506010KPRO
– 5 X 3 мл

КИСЛОРОДНЫЙ
ГЕЛЬ С
ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ



4501418AR
– 250 мл

ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ 4 минуты


1

УСТАНОВИТЕ КНОПКОЙ «ВКЛ/ ВЫКЛ / ВЫБОР РЕЖИМА» РЕЖИМ **FULLY ABSORB**. ВЫБЕРИТЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ КНОПКОЙ «L»


2



ПРОПИТАЙТЕ ГЕЛЕМ МАРЛЕВУЮ ИЛИ НЕТКАНУЮ САЛФЕТКУ, ЗАКРЕПИТЕ ПРИ ПОМОЩИ КОЛЬЦА НА ПРИБОРЕ.

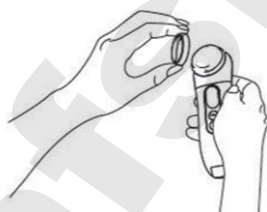

СНИМИТЕ КРЕПЕЖНОЕ КОЛЬЦО С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИБОРА

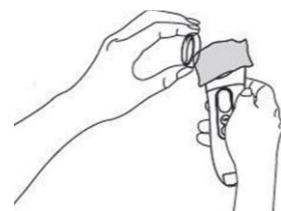

НАНЕСИТЕ ГЕЛЬ НА САЛФЕТКУ. ПРИЛОЖИТЕ САЛФЕТКУ К РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ. ЗАКРЕПИТЕ КОЛЬЦО

3

НАНЕСИТЕ КОНЦЕНТРАТ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА КОЖУ ПО ЗОНАМ. СНАЧАЛА НАНЕСИТЕ НА ОДНУ ЗОНУ ЛИЦА ОБРАБОТАЙТЕ ЭТУ ЗОНУ АППАРАТОМ, ПРОДОЛЖИТЕ ПРОЦЕДУРУ НА ДРУГОЙ ЗОНЕ.

4


НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ СООТВЕТСТВУЕТ МАССАЖНЫМ ЛИНИЯМ ЛИЦА

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОВОДИТСЯ МЕДЛЕННЫМИ ПЛАВНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ КОЖА И САЛФЕТКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЛАЖНЫМИ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОБАВЛЯЙТЕ ГЕЛЬ.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ДЕРЖИТЕ АППАРАТ ТАК, ЧТОБЫ КОНТАКТ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ВНИЗУ НА ЗАДНЕЙ И БОКОВОЙ СТОРОНАХ КОРПУСА, ХОРОШО КАСАЛСЯ КОЖИ ЛАДОНИ И ПАЛЬЦЕВ.

ПО ОКОНЧАНИИ ПРОЦЕДУРЫ СМОЙТЕ С ЛИЦА ОСТАТКИ ГЕЛЯ, ПРОМОКНИТЕ НАСУХО САЛФЕТКОЙ.

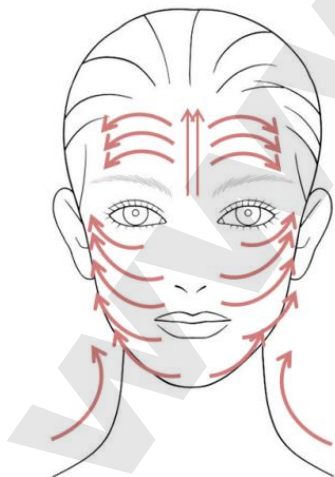

4й ШАГ: УВЛАЖНЕНИЕ И ЛИФТИНГ

РЕЖИМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМИ ТОКАМИ, ВИБРАЦИЕЙ И ИК ДЛЯ ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ И ПОДТЯЖКИ КОЖИ.

СЫВОРОТОЧНЫЙ
КОНЦЕНТРАТ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 24
ЧАСА "HYDRO BALANCE"



Арт. 4506010KPRO
– 5 X 3 мл

КИСЛОРОДНЫЙ
ГЕЛЬ С
ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ



Арт. 4501418AR
– 250 мл


1

УСТАНОВИТЕ КНОПКОЙ «ВКЛ/ ВЫКЛ / ВЫБОР РЕЖИМА» **РЕЖИМ MOISTURE**. ВЫБЕРИТЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ КНОПКОЙ «L»


2



ПРОПИТАЙТЕ ГЕЛЕМ МАРЛЕВУЮ ИЛИ НЕТКАНУЮ САЛФЕТКУ, ЗАКРЕПИТЕ ПРИ ПОМОЩИ КОЛЬЦА НА ПРИБОРЕ.

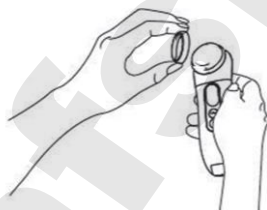

СНИМИТЕ КРЕПЕЖНОЕ КОЛЬЦО С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИБОРА

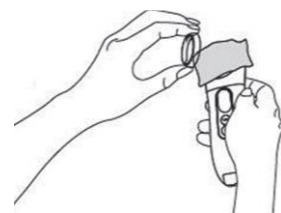

НАНЕСИТЕ ГЕЛЬ НА САЛФЕТКУ. ПРИЛОЖИТЕ САЛФЕТКУ К РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ. ЗАКРЕПИТЕ КОЛЬЦО

ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ 2 минуты

3

НАНЕСИТЕ КОНЦЕНТРАТ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА КОЖУ ПО ЗОНАМ. СНАЧАЛА НАНЕСИТЕ НА ОДНУ ЗОНУ ЛИЦА ОБРАБОТАЙТЕ ЭТУ ЗОНУ АППАРАТОМ, ПРОДОЛЖИТЕ ПРОЦЕДУРУ НА ДРУГОЙ ЗОНЕ.

4

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ СООТВЕТСТВУЕТ МАССАЖНЫМ ЛИНИЯМ ЛИЦА

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОВОДИТСЯ МЕДЛЕННЫМИ ПЛАВНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ КОЖА И САЛФЕТКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЛАЖНЫМИ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОБАВЛЯЙТЕ ГЕЛЬ.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ДЕРЖИТЕ АППАРАТ ТАК, ЧТОБЫ КОНТАКТ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ВНИЗУ НА ЗАДНЕЙ И БОКОВОЙ СТОРОНАХ КОРПУСА, ХОРОШО КАСАЛСЯ КОЖИ ЛАДОНИ И ПАЛЬЦЕВ.

ПО ОКОНЧАНИИ ПРОЦЕДУРЫ СМОЙТЕ С ЛИЦА ОСТАТКИ ГЕЛЯ, ПРОМОКНИТЕ НАСУХО САЛФЕТКОЙ.



5й ШАГ: ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

ПОСЛЕ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА НУЖНО СОХРАНИТЬ ВЛАГУ И ОБЕСПЕЧИТЬ КОЖЕ НЕОБХОДИМУЮ ЗАЩИТУ ОТ ВНЕШНЕЙ АГРЕССИИ.

УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА ПРОТИВ КУПЕРОЗА С ПАНТЕНОЛОМ И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ



4516404K - 30 мл

КРЕМ «РЕЛАКС-24» С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ



4516057A – 30 мл



1

АККУРАТНО ИЗВЛЕКИТЕ МАСКУ ИЗ УПАКОВКИ, РАЗВЕРНИТЕ И ПОМЕСТИТЕ НА ЛИЦО, УДАЛИТЕ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, РАЗГЛАДЬТЕ И СЛЕГКА ПРИЖМИТЕ.



2

ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦИИ 20 - 25 МИНУТ. ЗАТЕМ АККУРАТНО СНИМИТЕ МАСКУ, ЛЕГКО МАССИРУЙТЕ ДЛЯ ВПИТЫВАНИЯ РАСТВОРА.



3

НАНЕСИТЕ КРЕМ «РЕЛАКС-24» С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ ЛЕГКИМИ ДВИЖЕНИЯМИ.

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД – ЗАЛОГ УСПЕХА

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ, ЕЙ НЕОБХОДИМА ВЛАГА И ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ КОЖУ ОТ ВНЕШНЕЙ АГРЕССИИ И СОХРАНИТЬ КРАСОТУ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ, НЕОБХОДИМ РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД.

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД СЕРИЯ «HARMONY»



ФОРМУЛЫ ПРЕПАРАТОВ «ГАРМОНИЯ» ОБЕСПЕЧИВАЮТ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ, ПОМОГАЮТ ЗАМЕДЛИТЬ ПРОЦЕССЫ СТАРЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЭФФЕКТИВНО БОРЮТСЯ С КУПЕРОЗОМ.

ЭКСПРЕСС – УХОД



4515940К
УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА
«СОС» С КОМПЛЕКСОМ
ЛАКТОКИН ФЛЮИД + БИОЛИН



4515943К
СМЯГЧАЮЩАЯ
РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ НОЧНАЯ
МАСКА С КОМПЛЕКСОМ
ДЕРМОХЛОРЕЛЛА + БИОЛИН

МАСКИ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-УХОДА ПОМОГУТ БЫСТРО ВОССТАНОВИТЬ ЖИЗНЕННУЮ ЭНЕРГИЮ КОЖИ, ЕСЛИ ВЫ УСТАЛИ.

КУРС ИНТЕНСИВНОГО УХОДА

**15
ПРОЦЕДУР**
**2-3 РАЗА В
НЕДЕЛЮ**

ИСПОЛЬЗУЙТЕ АППАРАТ
1 РАЗ В 6 МЕСЯЦЕВ ДЛЯ
ИНТЕНСИВНОГО УХОДА ЗА
КОЖЕЙ И ЗАМЕДЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОВ СТАРЕНИЯ

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ УХОД

**1 РАЗ В
НЕДЕЛЮ**
**В ТЕЧЕНИЕ
1 МЕСЯЦА**

ИСПОЛЬЗУЙТЕ АППАРАТ
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ В ТЕЧЕНИЕ 1
МЕСЯЦА ПОСЛЕ
ОСНОВНОГО КУРСА
КОРРЕКЦИИ.



УВЯДАЮЩАЯ
КОЖА

GALVANIC BEAUTY SPA +
BIO SONIC m 776

.....

ПРОГРАММА КРАСОТЫ ШАГ ЗА ШАГОМ

1й ШАГ: ОЧИЩЕНИЕ / ДЕМАКИЯЖ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА НЕОБХОДИМО ОЧИСТИТЬ КОЖУ ОТ МАКИЯЖА И ВНЕШНИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СКРАБЫ И СРЕДСТВА С АНА КИСЛОТАМИ ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ.

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА
ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА



4516074 – 120 мл

1

ОЧИСТИТЕ КОЖУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МИЦЕЛЛЯРНОЙ ВОДЫ

ПРИ ПОМОЩИ ВАТНОГО ДИСКА, СМОЧЕННОГО НЕБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ МИЦЕЛЛЯРНОЙ ВОДЫ, ОЧИСТИТЕ ЛИЦО И ШЕЮ, А ТАКЖЕ ПРОВЕДИТЕ ДЕМАКИЯЖ В ОБЛАСТИ ГЛАЗ, ГУБ. МАНИПУЛЯЦИИ ПОВТОРЯЮТСЯ ДО ПОЛНОГО УДАЛЕНИЯ МАКИЯЖА И ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

ТОНИК ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
«МАТРИКСИЛ»



4515866AR – 120 мл

2

ЗАВЕРШИТЕ ОЧИЩЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОМОЛАЖИВАЮЩЕГО ТОНИКА С МАТРИКСИЛОМ

НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРЕПАРАТА НАНЕСИТЕ
ПРИ ПОМОЩИ ВАТНОГО ДИСКА НА КОЖУ ЛИЦА
И ШЕИ.

2й ШАГ: ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

РЕЖИМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМИ ТОКАМИ, ВИБРАЦИЕЙ И ИК ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ.

ЛОСЬОН ДЛЯ ГЛУБОКОГО
ОЧИЩЕНИЯ "ДЕЗИНКРУСТАНТ"



4501420AR – 250 мл


1

УСТАНОВИТЕ КНОПКОЙ «ВКЛ/ ВЫКЛ / ВЫБОР РЕЖИМА» **РЕЖИМ DEEP CLEAN**
ВЫБЕРИТЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ КНОПКОЙ «L»


2



ПРОПИТАЙТЕ ЛОСЬОНОМ
ДЕЗИНКРУСТАНТОМ МАРЛЕВУЮ ИЛИ
НЕТКАНУЮ САЛФЕТКУ, ЗАКРЕПИТЕ ПРИ
ПОМОЩИ КОЛЬЦА НА ПРИБОРЕ.

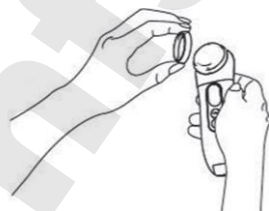

СНИМИТЕ КРЕПЕЖНОЕ КОЛЬЦО С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИБОРА

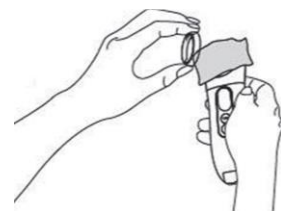


НАНЕСИТЕ ЛОСЬОН НА САЛФЕТКУ.
ПРИЛОЖИТЕ САЛФЕТКУ К РАБОЧЕЙ
ПОВЕРХНОСТИ. ЗАКРЕПИТЕ КОЛЬЦО

ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ 4 минуты

3

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ СООТВЕТСТВУЕТ
МАССАЖНЫМ ЛИНИЯМ ЛИЦА

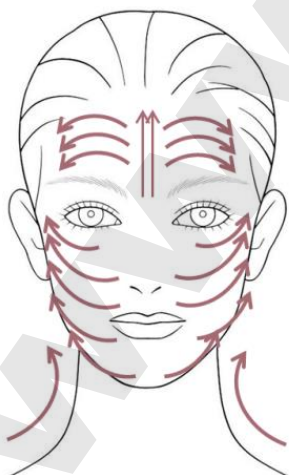

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОВОДИТСЯ МЕДЛЕННЫМИ ПЛАВНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ САЛФЕТКА ДОЛЖНА БЫТЬ ВЛАЖНОЙ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОБАВЛЯЙТЕ ЛОСЬОН НА САЛФЕТКУ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ДЕРЖИТЕ АППАРАТ ТАК, ЧТОБЫ КОНТАКТ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ВНИЗУ НА ЗАДНЕЙ И БОКОВОЙ СТОРОНАХ КОРПУСА, ХОРОШО КАСАЛСЯ КОЖИ ЛАДОНИ И ПАЛЬЦЕВ.

ПО ОКОНЧАНИИ ПРОЦЕДУРЫ СМОЙТЕ С ЛИЦА ОСТАТКИ ЛОСЬОНА, ПРОМОКНИТЕ НАСУХО САЛФЕТКОЙ.

3й ШАГ: ПИТАНИЕ

РЕЖИМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМИ ТОКАМИ, ВИБРАЦИЕЙ И ИК ДЛЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ.



СЫВОРОТОЧНЫЙ
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
КОНЦЕНТРАТ С
ПЕПТИДАМИ
"SUPERLIFT PEPTIDE"

4506014KPRO
– 5 X 3 мл



ЛИФТИНГОВЫЙ
ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА
«УЛЬТРАЛИФТ»

4501416AR
– 250 мл


1

УСТАНОВИТЕ КНОПКОЙ «ВКЛ/ ВЫКЛ / ВЫБОР РЕЖИМА» **РЕЖИМ FULLY ABSORB**. ВЫБЕРИТЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ КНОПКОЙ «L»


2



ПРОПИТАЙТЕ ГЕЛЕМ МАРЛЕВУЮ ИЛИ НЕТКАНУЮ САЛФЕТКУ, ЗАКРЕПИТЕ ПРИ ПОМОЩИ КОЛЬЦА НА ПРИБОРЕ.

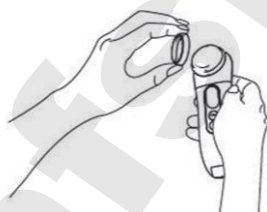

СНИМИТЕ КРЕПЕЖНОЕ КОЛЬЦО С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИБОРА

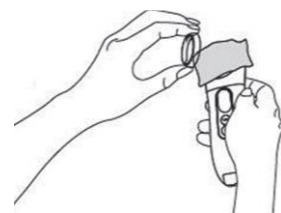

НАНЕСИТЕ ГЕЛЬ НА САЛФЕТКУ. ПРИЛОЖИТЕ САЛФЕТКУ К РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ. ЗАКРЕПИТЕ КОЛЬЦО

ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ 4 минуты

3

НАНЕСИТЕ КОНЦЕНТРАТ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА КОЖУ ПО ЗОНАМ. СНАЧАЛА НАНЕСИТЕ НА ОДНУ ЗОНУ ЛИЦА ОБРАБОТАЙТЕ ЭТУ ЗОНУ АППАРАТОМ, ПРОДОЛЖИТЕ ПРОЦЕДУРУ НА ДРУГОЙ ЗОНЕ.

4


НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ СООТВЕТСТВУЕТ МАССАЖНЫМ ЛИНИЯМ ЛИЦА

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОВОДИТСЯ МЕДЛЕННЫМИ ПЛАВНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ КОЖА И САЛФЕТКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЛАЖНЫМИ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОБАВЛЯЙТЕ ГЕЛЬ.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ДЕРЖИТЕ АППАРАТ ТАК, ЧТОБЫ КОНТАКТ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ВНИЗУ НА ЗАДНЕЙ И БОКОВОЙ СТОРОНАХ КОРПУСА, ХОРОШО КАСАЛСЯ КОЖИ ЛАДОНИ И ПАЛЬЦЕВ.

ПО ОКОНЧАНИИ ПРОЦЕДУРЫ СМОЙТЕ С ЛИЦА ОСТАТКИ ГЕЛЯ, ПРОМОКНИТЕ НАСУХО САЛФЕТКОЙ.

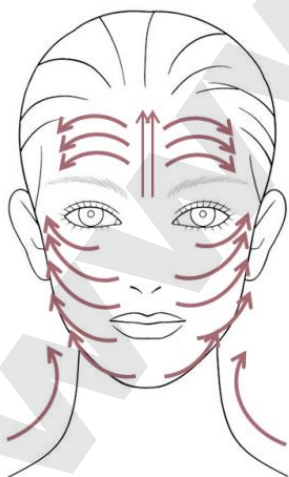

4й ШАГ: УВЛАЖНЕНИЕ И ЛИФТИНГ

РЕЖИМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМИ ТОКАМИ, ВИБРАЦИЕЙ И ИК ДЛЯ ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ И ПОДТЯЖКИ КОЖИ.

СЫВОРОТОЧНЫЙ
КОНЦЕНТРАТ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 24
ЧАСА "HYDRO BALANCE"



Арт. 4506010KPRO
– 5 X 3 мл

ЛИФТИНГОВЫЙ
ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА
«УЛЬТРАЛИФТ»



4501416AR
– 250 мл


1

УСТАНОВИТЕ КНОПКОЙ «ВКЛ/ ВЫКЛ / ВЫБОР РЕЖИМА» **РЕЖИМ MOISTURE**. ВЫБЕРИТЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ КНОПКОЙ «L»


2



ПРОПИТАЙТЕ ГЕЛЕМ МАРЛЕВУЮ ИЛИ НЕТКАНУЮ САЛФЕТКУ, ЗАКРЕПИТЕ ПРИ ПОМОЩИ КОЛЬЦА НА ПРИБОРЕ.

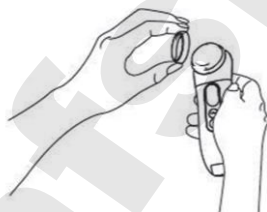

СНИМИТЕ КРЕПЕЖНОЕ КОЛЬЦО С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИБОРА

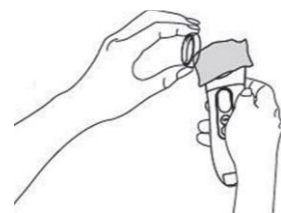

НАНЕСИТЕ ГЕЛЬ НА САЛФЕТКУ. ПРИЛОЖИТЕ САЛФЕТКУ К РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ. ЗАКРЕПИТЕ КОЛЬЦО

ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ 4 минуты

3

НАНЕСИТЕ КОНЦЕНТРАТ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА КОЖУ ПО ЗОНАМ. СНАЧАЛА НАНЕСИТЕ НА ОДНУ ЗОНУ ЛИЦА ОБРАБОТАЙТЕ ЭТУ ЗОНУ АППАРАТОМ, ПРОДОЛЖИТЕ ПРОЦЕДУРУ НА ДРУГОЙ ЗОНЕ.

4


НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ СООТВЕТСТВУЕТ МАССАЖНЫМ ЛИНИЯМ ЛИЦА

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОВОДИТСЯ МЕДЛЕННЫМИ ПЛАВНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ КОЖА И САЛФЕТКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЛАЖНЫМИ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОБАВЛЯЙТЕ ГЕЛЬ.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ДЕРЖИТЕ АППАРАТ ТАК, ЧТОБЫ КОНТАКТ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ВНИЗУ НА ЗАДНЕЙ И БОКОВОЙ СТОРОНАХ КОРПУСА, ХОРОШО КАСАЛСЯ КОЖИ ЛАДОНИ И ПАЛЬЦЕВ.

ПО ОКОНЧАНИИ ПРОЦЕДУРЫ СМОЙТЕ С ЛИЦА ОСТАТКИ ГЕЛЯ, ПРОМОКНИТЕ НАСУХО САЛФЕТКОЙ.

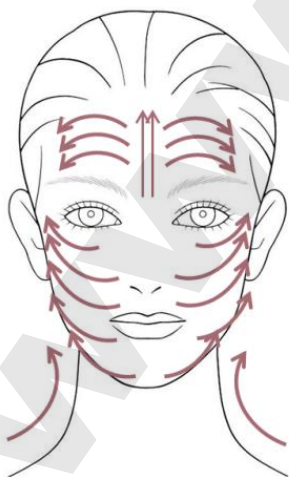

5й ШАГ: ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

ПОСЛЕ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА НУЖНО СОХРАНИТЬ ВЛАГУ И ОБЕСПЕЧИТЬ КОЖЕ НЕОБХОДИМУЮ ЗАЩИТУ ОТ ВНЕШНЕЙ АГРЕССИИ.

УКРЕПЛЯЮЩАЯ МАСКА
С УРСОВОЙ КИСЛОТОЙ
И МАТРИКСИЛОМ "MATRIX S6 "



4515938K - 30 мл

ДНЕВНОЙ
КРЕМ
С МАТРИКСИЛОМ



4515860AR – 30 мл

1

АККУРАТНО ИЗВЛЕКИТЕ
МАСКУ ИЗ УПАКОВКИ,
РАЗВЕРНИТЕ И ПОМЕСТИТЕ
НА ЛИЦО, РАЗГЛАДЬТЕ И
СЛЕГКА ПРИЖМИТЕ.

2

ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦИИ
20 - 25 МИНУТ.
ЗАТЕМ АККУРАТНО
СНИМИТЕ МАСКУ, ЛЕГКО
МАССИРУЙТЕ ДЛЯ
ВПИТЫВАНИЯ РАСТВОРА.

3

НАНЕСИТЕ ДНЕВНОЙ
КРЕМ С
МАТРИКСИЛОМ
ЛЕГКИМИ
ДВИЖЕНИЯМИ.

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД – ЗАЛОГ УСПЕХА

КОЖА СОДЕРЖИТ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО КОЛЛАГЕНА В МОЛОДОСТИ, С ВОЗРАСТОМ ЕГО КОЛИЧЕСТВО НАЧИНАЕТ СНИЖАТЬСЯ. БЛАГОДАРЯ ОСОБОМУ СТРОЕНИЮ МОЛЕКУЛЫ, МАТРИКСИЛ ПРЕОДОЛЕВАЕТ ЭПИДЕРМАЛЬНЫЙ БАРЬЕР И АКТИВИРУЕТ ПРОИЗВОДСТВО КОЛЛАГЕНА.

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД СЕРИЯ «МАТРИКСИЛ»



ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕПАРАТОВ С МАТРИКСИЛОМ, НАБЛЮДАЕТСЯ УМЕНЬШЕНИЕ МОРЩИН, ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ КОЖИ, КОЖА ОБРЕТАЕТ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЛОДОЙ КОЖИ НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ.

ЭКСПРЕСС – УХОД



4515942K
ЛИФТИНГОВАЯ ANTI-ЭЙДЖ
МАСКА С КОМПЛЕКСОМ
ПРОРЕНЬЮ + БИОЛИН



4515945K
РЕСТРУКТУРИРУЮЩАЯ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
НОЧНАЯ ANTI-ЭЙДЖ МАСКА
С КОМПЛЕКСОМ ТРИЛАГЕН +
БИОЛИН

МАСКИ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-УХОДА ПОМОГУТ БЫСТРО ВОССТАНОВИТЬ ЖИЗНЕННУЮ ЭНЕРГИЮ КОЖИ, ЕСЛИ ВЫ УСТАЛИ.

КУРС ИНТЕНСИВНОГО УХОДА

**15
ПРОЦЕДУР**

**2 -3 РАЗА В
НЕДЕЛЮ**

ИСПОЛЬЗУЙТЕ АППАРАТ

1 РАЗ В 6 МЕСЯЦЕВ для
ИНТЕНСИВНОГО УХОДА ЗА
КОЖЕЙ И ЗАМЕДЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОВ СТАРЕНИЯ

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ УХОД

**1 РАЗ В
НЕДЕЛЮ**

**В ТЕЧЕНИЕ
1 МЕСЯЦА**

ИСПОЛЬЗУЙТЕ АППАРАТ
для ПОДДЕРЖАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ в ТЕЧЕНИЕ 1
МЕСЯЦА ПОСЛЕ
ОСНОВНОГО КУРСА
КОРРЕКЦИИ.



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



GEZATONE



Москва 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8(800) 500-95-94
(звонок бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>