

GÉZATONE

АППАРАТ ДЛЯ
ВАКУУМНОЙ ЧИСТКИ

VACU
Silky Skin



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА ДЛЯ ВАКУУМНОЙ ЧИСТКИ VACU SILKY SKIN СПОСОБСТВУЕТ ОЧИЩЕНИЮ ПОР ОТ КОЖНОГО САЛА И СКОПИВШЕЙСЯ ГРЯЗИ, А ТАКЖЕ СТИМУЛИРУЕТ МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ, ЛИМФОДРЕНАЖ И ТОНИЗИРУЕТ КОЖУ. ПОМОГАЕТ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЯВЛЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЙ.



КОМЕДОНЫ,
ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ПОРЫ



СКЛОННОСТЬ К ВОСПАЛЕНИЯМ,
ПОСТАКНЕ, ЗАСТОЙНЫЕ ПЯТНА




ЖИРНАЯ КОЖА, ПОВЫШЕННОЕ
САЛОУДЕЛЕНИЕ



НЕРОВНЫЙ КОЖНЫЙ РЕЛЬЕФ
РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ



НОСОГУБНЫЕ СКЛАДКИ
МОРЩИНЫ

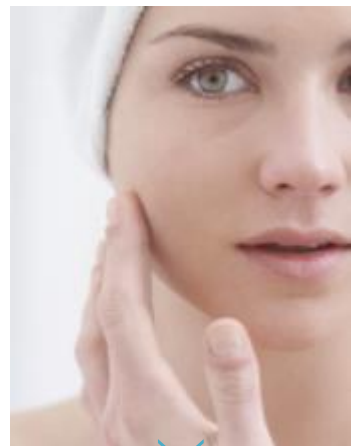

ОТЕЧНОСТЬ, ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ
ЛИЦА





ВАКУУМНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

БЛАГОДАРЯ ПОПУЛЯРНОЙ И ПРОВЕРЕННОЙ ВРЕМЕНЕМ МЕТОДИКЕ ВАКУУМА, ПРИБОР ОЧИЩАЕТ ПОРЫ ОТ СКОПИВШЕГОСЯ КОЖНОГО САЛА И ЗАГРЯЗНЕНИЙ. БЛАГОДАРЯ ТОНИЗИРУЮЩЕМУ ДЕЙСТВИЮ ВАКУУМА, ПОРЫ БЫСТРО СОКРАЩАЮТСЯ В РАЗМЕРЕ.



ВАКУУМ СОЗДАЕТ УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ УЛУЧШАЕТСЯ КРОВООБРАЩЕНИЕ ТКАНЕЙ И УСКОРЯЮТСЯ ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ

УСИЛИВАЕТСЯ ВЫВЕДЕНИЕ ТОКСИНОВ И ИЗБЫТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ, АКТИВИРУЮТСЯ ПРОЦЕССЫ РЕГЕНЕРАЦИИ. УЛУЧШАЕТСЯ ЦВЕТ ЛИЦА.



УСТРАНЕНИЕ КОМЕДОНОВ
ПРОФИЛАКТИКА
ВОСПАЛЕНИЙ



СОКРАЩЕНИЕ
ОТЕЧНОСТИ
ДЕТОКСИКАЦИЯ



ВЫРАВНИВАНИЕ
КОЖНОГО
МИКРОРЕЛЬЕФА




УМЕНЬШЕНИЕ
РАСШИРЕННЫХ
ПОР



АКТИВИЗАЦИЯ
РЕГЕНЕРАЦИИ



АКТИВИЗАЦИЯ
КРОВООБРАЩЕНИЯ
И ЛИМФОДРЕНАЖА

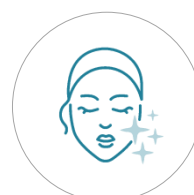

УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА



ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ,
КОРРЕКЦИЯ
МОРЩИН



НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК

ЭТОТ АППАРАТ СТАНЕТ НЕЗАМЕНИМЫМ ПОМОЩНИКОМ В ДОМАШНИХ ПРОЦЕДУРАХ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ ЕСЛИ:

- ВАМ НАДОЕЛИ КОМЕДОНЫ И ВОСПАЛЕНИЯ
- ВАС ОГОРЧАЕТ ПОСТОЯННЫЙ САЛЬНЫЙ БЛЕСК, У ВАС ЖИРНАЯ ИЛИ КОМБИНИРОВАННАЯ КОЖА
- ВЫ ЗАМЕЧАЕТЕ, ЧТО КОЖА СТАЛА БОЛЕЕ ТУСКЛОЙ И БЕЗЖИЗНЕННОЙ.
- ВАША КОЖА ВЫГЛЯДИТ НЕРОВНОЙ.



- ВЫ РЕГУЛЯРНО ИСПОЛЬЗУЕТЕ ДЕКОРАТИВНУЮ КОСМЕТИКУ.
- ВЫ ХОТИТЕ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ЭФФЕКТА ОТ КОСМЕТИЧЕСКИХ СЫВОРОТОК И КРЕМОВ.
- ВЫ ХОТИТЕ СОКРАТИТЬ ГЛУБИНУ МОРЩИН И ПРЕДОТВРАТИТЬ УВЯДАНИЕ КОЖИ.
- ХОТИТЕ ПРОВОДИТЬ КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ И ЭКОНОМИТЬ НА ПОСЕЩЕНИИ СПЕЦИАЛИСТА



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



Арт 1301279


- ДЕЙСТВИЕ АППАРАТА ОСНОВАНО НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДИКИ **ВАКУУМА**
- ПРОЦЕДУРА БЕЗБОЛЕЗНЕННА И БЕЗОПАСНА. НЕТ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПЕРИОДА.
- **УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ**: МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, КАК ЖЕНЩИНАМИ, ТАК И МУЖЧИНАМИ
- КОМФОРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОМА И В ПОЕЗДКАХ
- **ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ**: ЦЕНА НА АППАРАТ ЭКВИВАЛЕНТНА НЕСКОЛЬКИМ СЕАНСАМ ВАКУУМНОЙ ЧИСТКИ В САЛОНЕ
- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ: ПРОЦЕДУРА ЗАНИМАЕТ **10 МИНУТ**
- ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ.



ВАКУУМНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ




ДЛЯ ЖЕНЩИН
И МУЖЧИН

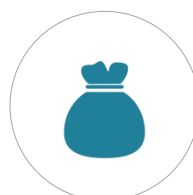

ЭКОНОМИЯ
СРЕДСТВ



УДОБНО
БРАТЬ С СОБОЙ

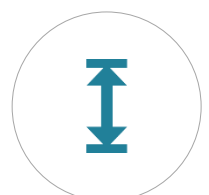

КОМАКТНЫЕ
РАЗМЕРЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



Арт 1301279

- БЛАГОДАРЯ 3 УРОВНЯМ ИНТЕНСИВНОСТИ ВАКУУМА МОЖНО ВЫБРАТЬ МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНЫЙ ВИД ВОЗДЕЙСТВИЯ.
- ПРИБОР РАБОТАЕТ ОТ АККУМУЛЯТОРА, НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ИСКАТЬ РОЗЕТКУ.
- УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ КНОПКОЙ.
- ЭРГОНОМИЧНАЯ ФОРМА И НЕБОЛЬШОЙ ВЕС 125 грамм
- УДОБНО ДЕРЖАТЬ В РУКЕ.
- В КОМПЛЕКТЕ 3 ВИДА НАСАДОК ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАЗНЫЕ ЗОНЫ
- НАСАДКА ДЛЯ ВАКУУМНОГО МАССАЖА И КОРРЕКЦИИ МОРЩИН

3

3 УРОВНЯ
ИНТЕНСИВНОСТИ



РАБОТАЕТ
ОТ АККУМУЛЯТОРА



USB ЗАРЯДКА

3

3 ВИДА
НАСАДОК



ВЕС 125
ГРАММ



УПРАВЛЕНИЕ
1 КНОПКОЙ



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОЦЕДУРА ДОМА



ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ
10 МИНУТ






РЕЖИМЫ РАБОТЫ

НАЛИЧИЕ 3 ВАРИАНТОВ СИЛЫ ВСАСЫВАНИЯ
ПОЗВОЛЯЕТ ПОДОБРАТЬ КОМФОРТНЫЙ ВИД ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ.



Арт 1301279

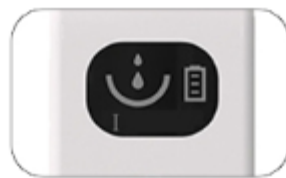

- РЕЖИМ СЛАБОГО ВСАСЫВАНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЖИРНОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЙСЯ ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ, А ТАКЖЕ ПРОЦЕДУР ДЛЯ КОРРЕКЦИИ МОРЩИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНОЙ НАСАДКИ.



- РЕЖИМ ВСАСЫВАНИЯ СРЕДНЕЙ СИЛЫ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ И ПРИ НАЛИЧИИ НЕБОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА КОМЕДОНОВ



- РЕЖИМ ИНТЕНСИВНОГО ВСАСЫВАНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЖИРНОЙ, ТОЛСТОЙ ПОРИСТОЙ КОЖИ С «УПОРНЫМИ» КОМЕДОНАМИ



ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА

НАЛИЧИЕ 3 ВАРИАНТОВ СИЛЫ ВСАСЫВАНИЯ
ПОЗВОЛЯЕТ ПОДОБРАТЬ КОМФОРТНЫЙ ВИД ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ.



НАСАДКА С БОЛЬШИМ
КРУГЛЫМ ОТВЕРСТИЕМ



НАСАДКА С МАЛЕНЬКИМ
КРУГЛЫМ ОТВЕРСТИЕМ



НАСАДКА С ОВАЛЬНЫМ
ОТВЕРСТИЕМ



ШНУР ДЛЯ ЗАРЯДКИ
В КОМПЛЕКТЕ

СМЕННАЯ НАСАДКА

ДИСПЛЕЙ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ /
ВЫКЛЮЧЕНИЯ /
ВЫБОРА
ИНТЕНСИВНОСТИ

ГНЕЗДО ДЛЯ ЗАРЯДКИ
АККУМУЛЯТОРА



Арт 1301279



КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОЦЕДУР

ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ, КАК ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К
ПРОЦЕДУРЕ, ТАК И ПОСЛЕ СЕАНСА.


ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ-
МУСС



4516072 – 120 мл

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК
«HYDRO ACTIVE 30 h»

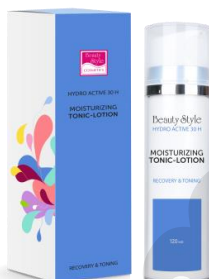

4516079 – 120 мл

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
ДЛЯ ЖИРНОЙ И
СМЕШАННОЙ КОЖИ
"КОНТРОЛЬ"



4515477A – 150 мл

МАТИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН
ДЛЯ ЖИРНОЙ И
СМЕШАННОЙ КОЖИ
"КОНТРОЛЬ"



4515478A – 150 мл

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

КРЕМ – МАСКА
ОЧИЩАЮЩАЯ
"КОНТРОЛЬ"



4515480A – 50 мл

КОЛЛАГЕНОВАЯ
БАЛАНСИРУЮЩАЯ
МАСКА С ЗЕЛеныМ
ЧАЕМ "КОНТРОЛЬ"



4515893K

ГИДРОГЕЛЕВАЯ
УВЛАЖНЯЮЩАЯ
БАЛАНСИРУЮЩАЯ
МАСКА КОНТРОЛЬ



4515894K

КОРРЕКТИРУЮЩАЯ
СЫВОРОТКА
КОНТРОЛЬ



4515479A – 30 мл





КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ



1

ОЧИСТИТЕ КОЖУ ОТ МАКИЯЖА
И ЗАГРЯЗНЕНИЙ



2

ОБЯЗАТЕЛЬНО РАСПАРЬТЕ
ЛИЦО.



3

УСТАНОВИТЕ НАСАДКУ И ВЫБЕРИТЕ
НУЖНЫЙ УРОВЕНЬ ВАКУУМА.
ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ 10 МИНУТ



4

ИЗВЛЕКИТЕ МАСКУ ИЗ
УПАКОВКИ, РАЗВЕРНИТЕ И
ПОМЕСТИТЕ НА ЛИЦО,
РАЗГЛАДЬТЕ И СЛЕГКА
ПРИЖМИТЕ.



5

ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦИИ
20МИНУТ.
ЗАТЕМ АККУРАТНО
СНИМИТЕ МАСКУ

6




ЛЕГКО МАССИРУЙТЕ ДЛЯ
ВПИТЫВАНИЯ АКТИВНОГО
РАСТВОРА МАСКИ.



РЕЗУЛЬТАТЫ



- ОТ ПРОЦЕДУРЫ К ПРОЦЕДУРЕ КОЛИЧЕСТВО ЧЕРНЫХ ТОЧЕК УМЕНЬШАЕТСЯ. НОВЫЕ НЕ ОБРАЗУЮТСЯ.
- СОКРАЩАЮТСЯ ВОСПАЛЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
- СНИЖАЕТСЯ САЛЬНЫЙ БЛЕСК И УМЕНЬШАЕТСЯ ДИАМЕТР РАСШИРЕННЫХ ПОР
- УЛУЧШАЕТСЯ ЦВЕТ ЛИЦА, СОКРАЩАЕТСЯ ОТЕЧНОСТЬ
- СОКРАЩАЕТСЯ ГЛУБИНА МОРЩИН И СКЛАДОК, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ РЕГУЛЯРНОЙ ВАКУУМНОЙ СТИМУЛЯЦИИ

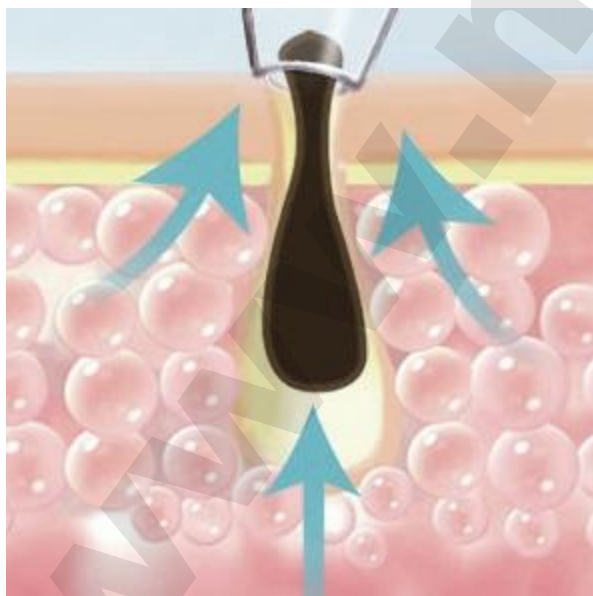



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- СОСУДИСТЫЕ НАРУШЕНИЯ, КУПЕРОЗ
- ОСТРАЯ ФАЗА АКНЕ, ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ХРОНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- СУХАЯ, ТОНКАЯ, ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА
- ДЕРМАТИТЫ И ДЕРМАТОЗЫ
- НОВООБРАЗОВАНИЯ
- РАНЫ, ССАДИНЫ И ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖИ В ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- ОБОСТРЕНИЕ ГЕРПЕСА
- ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ГИПЕРТОНИЯ

НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ИЛИ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ НЕКОТОРЫМИ ПРАВИЛАМИ МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ ВРЕД

- ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ БОЛЕЕ 3 СЕКУНД НА ОДНОМ МЕСТЕ
- ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ КОЖА ДОЛЖНА БЫТЬ РАСПАРЕНА, ЛУЧШЕ ПРОВОДИТЬ ОЧИЩЕНИЕ ПОСЛЕ САУНЫ, ВАННОЙ ИЛИ ДУША
- РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ВАНН 1-2 ДНЯ ПОСЛЕ ЧИСТКИ
- СЕАНСЫ ПРОВОДЯТСЯ С ЧАСТОТОЙ 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
- ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ НЕ СЛЕДУЕТ ПРЕВЫШАТЬ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМИРОВАНИЯ КОЖИ.
- ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К ПРОЦЕДУРЕ НА ЛИЦЕ, ПОПРОБУЙТЕ СИЛУ ВСАСЫВАНИЯ НА КОЖЕ РУКИ.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Арт 1301279

- АДАПТЕР ПИТАНИЯ\ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО:
АС 100...220В, 50 Гц/5В, 1 А
- МАКСИМАЛЬНОЕ СОЗДАВАЕМОЕ
РАЗРЯЖЕНИЕ: 65КПа
- БАТАРЕЯ: 3,7В 560мАч
- РАЗМЕР ПРИБОРА: 185х46х35 мм
- РАЗМЕР УПАКОВКИ: 221х62х38 мм
- ВЕС ПРИБОРА: 125 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- АППАРАТ VACU SILKY SKIN GEZATONE – 1
- ИНСТРУКЦИЯ - 1
- ПРОВОД USB ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА - 1
- СМЕННЫЕ НАСАДКИ - 3



ШНУР
В КОМПЛЕКТЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ
2-2,5 ЧАСА






сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



GÉZATONE

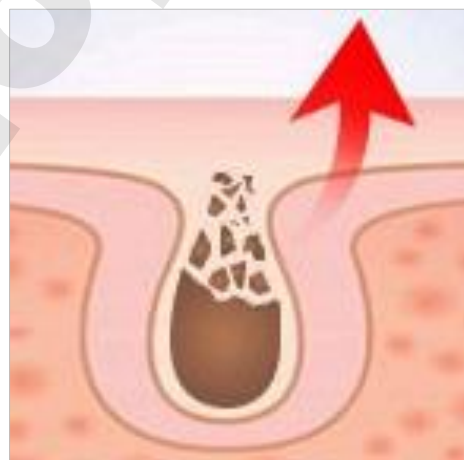

Москва 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8(800) 500-95-94
(звонок бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>