



**АНАЛИЗАТОРЫ ПАРОВ  
ЭТАНОЛА В ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ  
АЛКОТЕКТОР Mark V**

**Руководство по эксплуатации**



**2013**

# СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА .....	4
1.1 Назначение анализатора.....	4
1.1.2 Рабочие условия эксплуатации .....	4
1.2 Технические характеристики .....	4
1.3 Состав анализатора.....	7
1.4 Устройство и работа анализатора .....	8
1.5 Маркировка и пломбирование.....	12
1.6 Упаковка.....	12
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ .....	13
2.1 Эксплуатационные ограничения.....	13
2.2 Включение анализатора .....	13
2.3 Меню анализатора .....	14
2.4 Функции виртуальных кнопок дисплея.....	15
2.5 Установки пользователя .....	16
2.5.3 Установка даты и времени.....	17
2.5.4 Установка времени автоматического отключения .....	17
2.6 Подготовка к работе .....	18
2.7 Порядок работы в режиме измерения.....	19
2.8 Ручной режим отбора пробы .....	27
2.9 Отказ от измерения.....	28
2.10 Порядок работы в режиме скрининга.....	29
2.11 Просмотр памяти тестов .....	32
2.12 Выключение анализатора .....	33
2.13 Возможные неисправности анализатора .....	34
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	35
3.1 Текущее техническое обслуживание .....	35
3.2 Периодическое техническое обслуживание.....	36
3.2.1 Проверка показаний анализатора.....	36
3.2.2 Корректировка показаний анализатора .....	43
3.2.3 Проверка анализатора .....	44
4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ .....	44
ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) Сообщения анализатора .....	45
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное) Копии разрешительных документов.....	47
ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное) Сервисные центры .....	52
Инструкция по работе с программой «Статистика Mark V» .....	56
Методика поверки МП-242-1524-2013 .....	71

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для изучения устройства, принципа действия, метрологических и технических характеристик анализатора паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР Mark V (далее – анализатора) и содержит сведения, необходимые для его правильной эксплуатации и технического обслуживания.

Портативный автоматический анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР Mark V прост и удобен в применении, основан на современных достижениях микроэлектроники.

Применение анализатора АЛКОТЕКТОР Mark V обеспечивает достоверность, датированность и документированность результатов измерений.

К работе с анализатором допускаются лица, ознакомившиеся с настоящим Руководством по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж.

**Изготовитель:** фирма Shenzhen Well Electric Co., Ltd., КНР.

Адрес: North Wing, 4F, Building 9, Tian Jian Industrial Zone, Shang Bao Road, Fu Tian, Shenzhen, China, Tel: 86-755-83160728, Fax: 86-755-83160467.

---

Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР Mark V зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения и социального развития (регистрационное удостоверение ФС № 2006/1967 от 11 декабря 2006 г., срок действия до 11 декабря 2016 г.), внесены в Государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники и разрешены к применению на территории РФ.

Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР Mark V зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под № 54185-13, свидетельство об утверждении типа средств измерений СН.С.39.001.А № 51535, срок действия до 12.07.2018 г.

# 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

## 1.1 Назначение анализатора

1.1.1 Анализатор предназначен для экспрессного измерения массовой концентрации паров этанола в отобранный пробе выдыхаемого воздуха.

Анализатор рекомендуется к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области здравоохранения.

### 1.1.2 Рабочие условия эксплуатации

- диапазон температуры окружающего воздуха, °C: от 15 до 35;
- диапазон относительной влажности окружающего воздуха, %: от 10 до 100 (без конденсации);
- диапазон атмосферного давления, кПа: от 84,0 до 106,7.

## 1.2 Технические характеристики

1.2.1 Диапазон измерений и пределы допускаемой погрешности анализатора приведены в таблице 1.

Таблица 1

Диапазон измерений массовой концентрации этанола, мг/л	Пределы допускаемой погрешности	
	абсолютной	относительной
0 – 0,500	± 0,050	–
св. 0,500 – 0,950	–	± 10 %

Примечания:

- 1) В таблице указаны пределы допускаемой погрешности анализатора в рабочих условиях эксплуатации, приведенных в 1.1.2 настоящего РЭ.
- 2) В анализаторе программным способом установлен минимальный интервал показаний, которые выводятся на дисплей анализатора в виде нулевых показаний: от 0,000 до 0,020 мг/л.
- 3) На дисплее единицы измерений массовой концентрации этанола «мг/л» отображаются в виде «mg/L».
- 4) При поверке анализатора с использованием газовых смесей состава этанол/азот в баллонах под давлением используют коэффициент пересчета показаний  $K^{rc}$ , равный 1,05.

1.2.2 Диапазон показаний, мг/л: от 0,000 до 2,000.

Причина:

1 При показаниях анализатора, превышающих верхний предел измерений 0,950 мг/л, массовая концентрация этанола в выдыхаемом воздухе с учетом пределов допускаемой погрешности составляет не менее 0,855 мг/л.

2 При показаниях анализатора, превышающих верхний предел показаний, на дисплей анализатора выводится надпись «>2.000 mg/L».

1.2.3 Цена младшего разряда шкалы, мг/л: 0,001.

1.2.4 Дополнительные погрешности от наличия неизмеряемых компонентов в анализируемой газовой смеси приведены в таблице 2.

Таблица 2

Неизмеряемый компонент	Содержание неизмеряемого компонента в газовой смеси <sup>1)</sup>	Дополнительная погрешность <sup>2)</sup>
Ацетон	не более 0,50 мг/л	отсутствует
Метан	не более 0,30 мг/л	отсутствует
Оксид углерода	не более 0,20 мг/л	отсутствует
Диоксид углерода	не более 10 % (об.)	отсутствует

<sup>1)</sup> На анализатор подавались тестовые газовые смеси с содержанием неизмеряемых компонентов, превышающим эндогенный уровень в выдыхаемом человеком воздухе.

<sup>2)</sup> Не превышает 0,2 в долях пределов допускаемой погрешности, указанных в таблице 1.

1.2.5 Параметры анализируемой газовой смеси при подаче пробы на вход анализатора (автоматический режим отбора пробы):

- расход анализируемой газовой смеси, л/мин: не менее 15;
- объем пробы анализируемой газовой смеси, л: не менее 1,0.

1.2.6 Время подготовки к работе после включения, с: не более 10.

1.2.7 Время измерения после отбора пробы, с: не более 15.

1.2.8 Время подготовки к работе после измерения, с: не более 15.

1.2.9 Интервал времени работы анализатора без корректировки показаний, месяцев: не менее 12.

Корректировка показаний проводится при поверке по необходимости.

1.2.10 Электрическое питание анализатора может осуществляться через адаптер питания (6В, 500 мА) от сети переменного тока 220 В, через адаптер питания (6В, 500 мА) от внешнего источника постоянного тока напряжением от 10,8 до 16,5 В (бортовая сеть автомобиля) или от элементов питания, указанных в таблице 3.

Т а б л и ц а 3

Типы элементов питания	Число измерений без замены/заряда элементов питания
Батареи питания типа AAA (4x1,5 В)	150
Перезаряжаемые аккумуляторы типа AAA (4x1,2 В)	100 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> При использовании Ni-MH аккумуляторов емкостью не менее 900 мАч.

1.2.11 Датчик для измерения массовой концентрации паров этанола в анализируемой пробе воздуха – электрохимический.

1.2.12 Срок службы электрохимического датчика, установленного в анализаторе, лет: не менее 2.

1.2.13 Режимы работы анализатора:

- режим измерения – режим измерения массовой концентрации паров этанола в отобранный пробе выдыхаемого воздуха;
- режим скрининга – режим предварительной оценки наличия этанола в выдыхаемом воздухе;
- режим корректировки показаний;
- режим передачи данных (сохраненных протоколов измерения) из памяти анализатора в персональный компьютер (далее – ПК).

1.2.14 Режимы отбора пробы:

- автоматический – заборная система анализатора активируется избыточным давлением, создаваемым выдохом обследуемого;
- ручной – заборная система анализатора активируется нажатием на кнопку.

1.2.15 В памяти анализатора сохраняется 2000 результатов последних измерений.

1.2.16 Время автоматического отключения анализатора (устанавливается пользователем), мин: 1/2/5/10.

1.2.17 Габаритные размеры анализатора (ДхШхВ), мм, не более: 150x70x35.

1.2.18 Масса анализатора (с элементами питания), г: не более 230.

1.2.19 Средний срок службы анализатора, лет: 5.

1.2.20 Средняя наработка на отказ, ч: 8000.

### 1.3 Состав анализатора

1.3.1 Конструктивно анализатор выполнен в моноблочном исполнении и представляет собой малогабаритный блок.

1.3.2 Комплект поставки анализатора указан в таблице 4.

Таблица 4

№ п/п	Наименование	Коли- чество
1	Анализатор	1 шт.
2	Мундштук	5 шт.
3	Мундштук-воронка	1 шт.
4	Батареи питания типа AAA 1,5 В	4 шт.
5	Кейс для транспортировки анализатора	1 шт.
6	Руководство по эксплуатации	1 экз.
7	Паспорт	1 экз.
8	Методика поверки МП-242-1524-2013	1 экз.

#### Примечания:

1 При эксплуатации анализатора сменные мундштуки поставляются по отдельным заказам.

2 По дополнительному заказу поставляются:

- адаптер питания анализатора (6 В, 500 мА) от сети переменного тока 220 В,
- адаптер питания анализатора (6 В, 500 мА) от внешнего источника постоянного тока напряжением от 10,8 до 16,5 В (бортовая сеть автомобиля),
- перезаряжаемые аккумуляторы типа AAA 1,2 В с зарядным устройством для аккумуляторов.

*Примечание – Комплект поставки анализатора по специальному заказу может быть изменен за счет увеличения количества мундштуков.*

1.3.3 Дополнительно фирма-поставщик передает покупателю для внутреннего пользования программу «Статистика Mark V» (на компакт-диске). Вышеуказанная программа является внешним про-

граммным обеспечением, которое не является метрологически значимым. Данная программа не может привести к искажениям результатов измерений анализатора, отображаемых на дисплее, так как предназначена для сбора, сохранения и распечатки данных из памяти анализатора на персональном компьютере и не используется анализатором при выполнении экспрессного измерения массовой концентрации паров этанола в отобранный пробе выдыхаемого воздуха.

*Примечание – По дополнительному заказу фирма-поставщик может включить в комплект поставки кабель для подключения анализатора к персональному компьютеру, предназначенный для передачи данных из памяти анализатора в ПК с помощью программы «Статистика Mark V».*

## **1.4 Устройство и работа анализатора**

1.4.1 Принцип действия анализатора основан на применении электрохимического датчика для измерения массовой концентрации паров этанола в анализируемой пробе воздуха.

В анализаторе применен запатентованный электрохимический датчик фирмы Dart Sensors Ltd., Великобритания, представляющий электрохимическую ячейку с двумя платиновыми электродами, на аноде которой осажден катализатор, специфичный по отношению к этанолу. Отличительными свойствами электрохимического датчика являются специфичность по отношению к этанолу, высокая чувствительность, точность и стабильность.

1.4.2 Встроенный микроконтроллер анализатора управляет всем процессом измерений. Анализатор имеет встроенное программное обеспечение Mark.

Встроенное системно-прикладное программное обеспечение анализатора разработано изготовителем специально для решения задачи измерения массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе, а так же отображения результатов измерений на дисплее, хранения измеренных данных и передачи измеренных данных на внешние устройства. Идентификация встроенного программного обеспечения производится путем вывода номера версии на дисплей при включении анализатора.

Идентификационные данные встроенного программного обеспечения анализатора приведены в таблице 5.

Таблица 5

Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
Mark	Mark.RU	RU 1.11	7D4669DE2755 7345888AA90E 49DDA209	MD5

Примечание – Номер версии встроенного программного обеспечения анализатора должен быть не ниже указанного в таблице.

Влияние встроенного программного обеспечения на метрологические характеристики анализатора учтено при их нормировании. Уровень защиты встроенного программного обеспечения анализатора от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «С» по МИ 3286–2010.

1.4.3 Управление анализатором осуществляется с помощью 3-х функциональных кнопок, расположенных на боковых панелях.

1.4.4 Этапы работы и забора проб воздуха анализатора сопровождаются звуковыми сигналами.

1.4.5 Анализатор оснащен микросхемой часов реального времени, питание которой осуществляется от установленной на системной плате литиевой батарейки.

1.4.6 Энергонезависимая память анализатора позволяет хранить данные сервисных настроек, а также результаты 2000 последних измерений.

Вместе с результатом измерения в памяти хранятся порядковый номер теста (измерения), дата и время его проведения, а также режим отбора пробы.

После заполнения памяти анализатора последующие измерения будут сохраняться, замещая измерения с наименьшим порядковым номером, при этом нумерация тестов начнется заново.

1.4.7 Анализатор производит блокировку работы при несоответствии температуры платы с электрохимическим датчиком рабочему диапазону.

1.4.8 Общий вид анализатора и вид сверху представлены на рисунке 1.

1.4.9 **Кнопка вкл/выкл** (⊕), расположенная на боковой панели анализатора, предназначена для включения и выключения анализатора.

1.4.10 **Кнопки А и В** предназначены для перемещения курсора по пунктам-иконкам меню анализатора.



Рисунок 1 – Общий вид анализатора

1.4.11 Дисплей предназначен для предъявления пользователю информации на каждом этапе работы анализатора, сообщения инструкций и предъявления результата измерения пользователю.

*Примечание – Сообщения на дисплее анализатора предъявляются на английском языке, сводная таблица сообщений приведена в приложении А настоящего РЭ.*

1.4.12 Коммуникационный порт **mini USB**, расположенный под резиновой заглушкой на боковой панели анализатора, предназначен для передачи данных из памяти анализатора в ПК, а также для подключения сетевого или бортового адаптера питания.

1.4.13 Элементы питания типа AAA устанавливаются в **отсек питания**, который расположен под крышкой на задней панели анализатора.

1.4.14 Между **направляющими для установки мундштука** анализатор имеет **два входных порта заборной системы**; через один воздух поступает на датчик давления, через другой – на электрохимический датчик.

1.4.15 **Мундштук** предназначен для формирования потока выдыхаемого воздуха, поступающего в заборную систему анализатора. Мундштук запечатан в индивидуальную полиэтиленовую упаковку.

Специальная форма мундштука (рисунок 2) обеспечивает избыточное давление воздуха на входе заборной системы анализатора во время выдоха и тем самым обеспечивает возможность контроля расхода и объема выдыхаемого воздуха. Мундштук имеет два патрубка для входных портов анализатора.

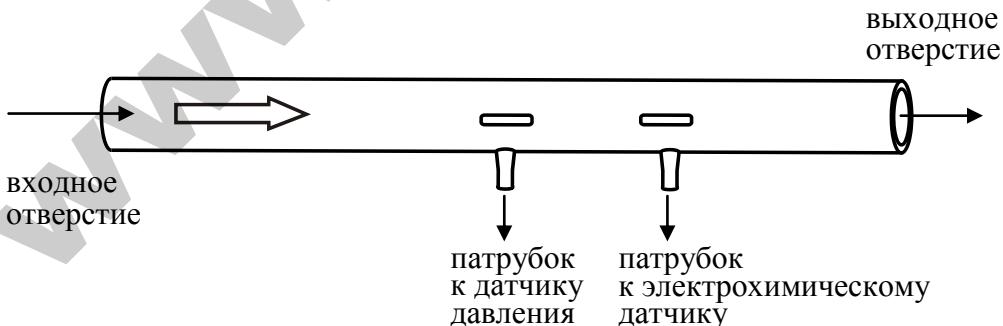


Рисунок 2 – Мундштук

1.4.16 Многоразовый мундштук-воронка (рисунок 3) формирует поток выдыхаемого воздуха для отбора пробы в режиме скринига.

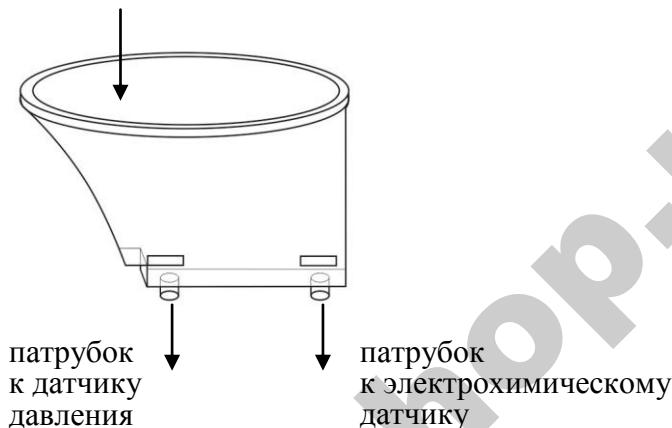


Рисунок 3 – Мундштук-воронка

## 1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 На передней панели нанесено наименование анализатора.

1.5.2 На задней панели анализатора нанесена следующая обязательная маркировка:

- 1) краткая инструкция;
- 2) заводской номер анализатора;
- 3) год изготовления анализатора;
- 4) название и адрес изготовителя;
- 5) название фирмы-поставщика.

1.5.3 Пломбирование анализатора производится на крепежном винте в отсеке питания анализатора.

1.5.4 Фирма-поставщик при входном контроле производит пломбирование анализатора этикеткой с надписью «Нарушение пломбы лишает гарантии», саморазрушающейся при попытке вскрытия анализатора.

## 1.6 Упаковка

Анализатор в полном комплекте упаковывается в транспортную тару фирмы-поставщика.

## **2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ**

### **2.1 Эксплуатационные ограничения**

2.1.1 Перед началом использования анализатора убедитесь, что условия эксплуатации удовлетворяют 1.1.2 настоящего РЭ.

2.1.2 Не допускается хранить и использовать анализатор в помещениях, в которых осуществляется хранение спиртосодержащих веществ в открытых емкостях, а также проводится обработка поверхностей или оборудования спиртосодержащими растворами.

2.1.3 Не допускается хранить и использовать анализатор в помещениях с повышенной запыленностью и загазованностью во избежание загрязнения заборной системы анализатора.

2.1.4 Не допускать скопление конденсата в мундштуке-воронке при использовании анализатора в режиме скрининга во избежание попадания влаги в заборную систему анализатора.

2.1.5 Не допускается подключать адаптер питания к анализатору, если в отсеке питания установлены элементы питания. Для работы от адаптера питания сначала необходимо извлечь элементы питания из отсека питания, затем подсоединить адаптер питания к анализатору (в противном случае возможен выход из строя элементов питания и повреждение анализатора).

### **2.2 Включение анализатора**

2.2.1 Включение анализатора производится нажатием на кнопку вкл/выкл , удерживая ее до звукового сигнала (около 2-х секунд). При этом на дисплей выводится заставка с названием анализатора (Breath alcohol analyzer АЛКОТЕКТОР Mark V) и номером версии программного обеспечения.

Далее проводится автотестирование: происходит контроль температуры платы с электрохимическим датчиком; контроль уровня напряжения питания, после этого на дисплее появляется главное меню анализатора (рисунок 4).

2.2.2 Если температура платы с электрохимическим датчиком выше (ниже) допустимого значения, на дисплей выводится сообщение «**Temperature Extreme high (low)**», и анализатор отключается.

В этом случае выдержите анализатор в условиях эксплуатации, указанных в 1.1.2 настоящего РЭ, и повторите включение.

2.2.3 Если уровень напряжения элементов питания, установ-

ленных в отсеке питания, ниже минимально допустимого, анализатор отключается. В этом случае действуйте согласно 3.1.3 настоящего РЭ.

## 2.3 Меню анализатора

2.3.1 При включении анализатора после заставки с названием анализатора и версией программного обеспечения на дисплее появляется главное меню из 4 пунктов-иконок и индикаторов, информирующих об уровне напряжения элементов питания, текущем времени и дате (рисунок 4).

2.3.2 В главном меню анализатора, в верхней части дисплея, находится **индикатор питания**, который информирует об уровне напряжения элементов питания. По мере понижения уровня напряжения элементов питания (разряда аккумуляторов) закрашенная часть индикатора будет уменьшаться.



Рисунок 4 – Главное меню анализатора

2.3.3 В главном меню анализатора, в верхнем левом углу дисплея, высвечиваются текущие **день недели** и **время**, а внизу дисплея – **дата**, установленные в анализаторе, в следующем формате:

День недели Часы:Минуты:Секунды;  
День/Месяц/Год.

Текущие дата и время фиксируются при отборе пробы, сохраняются в памяти анализатора вместе с результатом измерения.

**2.3.4 Режим измерения** предназначен для проведения измерений массовой концентрации паров этанола в отобранной пробе выдыхаемого воздуха.

**2.3.5 Режим скрининга** предназначен для предварительной оценки наличия этанола в отобранной пробе выдыхаемого воздуха. В этом режиме результат измерения выдается в виде сообщения о наличии или отсутствии алкоголя в отобранной пробе воздуха.

**2.3.6 Меню просмотра памяти тестов** позволяет осуществить просмотр записанных в памяти тестов (сохраненных результатов измерений).

**2.3.7 Меню установок пользователя** предназначено для корректировки пользователем во время эксплуатации текущей даты и времени, установки времени автоматического отключения анализатора, а также для выхода в режим корректировки показаний и в меню инженера.

**2.3.8 Выбор пункта меню** производится перемещением курсора с помощью кнопки А или В на требуемый пункт-иконку, утверждение выбора – кратковременным нажатием на кнопку вкл/выкл.

## **2.4 Функции виртуальных кнопок дисплея**

**2.4.1 Для перехода между окнами меню** предназначены следующие виртуальные кнопки управления, расположенные внизу дисплея:



- переход в следующее окно меню (при достижении последнего окна меню - выход в главное меню);
- возвращение к предыдущему окну;
- переход в главное меню;
- переход к следующему измерению (без выхода в главное меню).

2.4.2 Для активации нужной кнопки переместите курсор с помощью кнопки **A** или **B** на требуемую виртуальную кнопку дисплея и утвердите выбор кратковременным нажатием на кнопку вкл/выкл.




## 2.5 Установки пользователя

2.5.1 Во время эксплуатации пользователь имеет возможность корректировать текущую дату и время, а также устанавливать по своему усмотрению время автоматического отключения анализатора.

Вышеперечисленные настройки производятся в меню «**Установки пользователя**».

2.5.2 Для входа в меню «**Установки пользователя**» в главном меню анализатора выберите пункт-иконку «**Установки пользователя**», перемещая курсор по иконкам главного меню с помощью кнопок **A** и **B**, и утвердите выбор кратковременным нажатием кнопки вкл/выкл. На дисплее появится окно «**SETTING**» – меню из 4-х пунктов (рисунок 5).

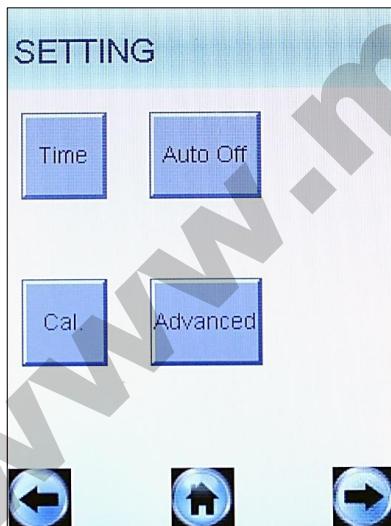

**Time** – Установка текущей даты и времени

**Auto Off** – Установка времени автоматического отключения

**Cal.** – Вход в режим корректировки показаний

**Advanced** – Меню инженера

Рисунок 5 – Меню «Установки пользователя»

### 2.5.3 Установка даты и времени

Для установки текущей даты и времени в анализаторе войдите в меню «Установки пользователя» согласно 2.5.2 настоящего РЭ, далее в этом меню выберите пункт «Time», для этого переместите курсор с помощью кнопки А или В до соответствующей иконки и утвердите выбор кратковременным нажатием на кнопку вкл/выкл. На дисплее появится окно «Set Time and Date» (рисунок 6).

Для установки даты переместите курсор с помощью кнопки А или В до виртуальной кнопки «+» или «-» рядом с параметром, который необходимо изменить, и нажмите на кнопку вкл/выкл необходимое количество раз. Текущее время устанавливается аналогичным способом.



Рисунок 6 – Меню установки даты и времени

### 2.5.4 Установка времени автоматического отключения

Для установки времени автоматического отключения войдите в меню «Установки пользователя» согласно 2.5.2 настоящего РЭ, далее в этом меню выберите пункт «Auto Off», для этого переместите курсор с помощью кнопки А или В до соответствующей

иконки и утвердите выбор кратковременным нажатием на кнопку вкл/выкл. На дисплее появится окно «**Auto Off**» (рисунок 7).

Выберите одну из четырех установок: 1, 2, 5 или 10 минут, перемещая курсор по значениям с помощью кнопок **A** и **B**, и затем утвердив выбранное значение кратковременным нажатием на кнопку вкл/выкл. Анализатор будет автоматически отключаться спустя установленное количество минут после последнего действия пользователя.

Рекомендуется выбирать оптимальное время автоматического отключения для экономии электропитания.

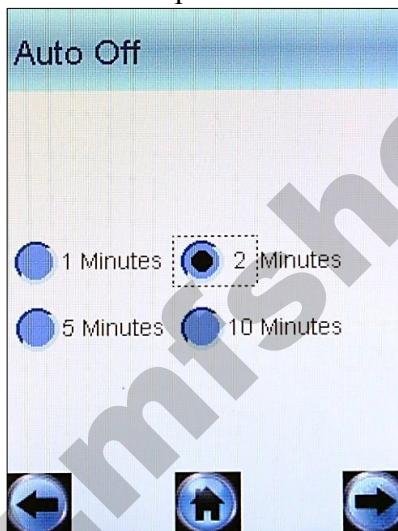


Рисунок 7 – Установка времени автоматического отключения

**2.5.5 Пункты «Cal.» и «Advanced» в меню «Установки пользователя»** предназначены для входа в режим корректировки показаний и меню инженера соответственно. Вход в данные пункты меню защищен паролем. Описание меню инженера, а также описание процедуры корректировки показаний поставляется фирмой-поставщиком по письменному запросу.

## 2.6 Подготовка к работе

Перед началом работы проведите внешний осмотр анализатора и подготовку к работе:

- проверьте наличие пломбы;

- убедитесь в отсутствии механических повреждений, влияющих на работоспособность анализатора;
- проверьте уровень напряжения элементов питания и при необходимости замените/зарядите их (согласно 3.1.3 настоящего РЭ); или подключите анализатор к сети переменного тока 220 В или бортовой сети автомобиля, используя соответствующий адаптер питания (при наличии);
- проверьте правильность текущей даты и времени, которые установлены в анализаторе и отображаются в главном меню; при необходимости скорректируйте дату и время согласно 2.5.3 настоящего РЭ.

***ВНИМАНИЕ! Во время эксплуатации анализатора пользователь самостоятельно должен следить за правильностью текущей даты и времени и корректировать их при необходимости.***



## 2.7 Порядок работы в режиме измерения

2.7.1 Включите анализатор нажатием на кнопку вкл/выкл, удерживая ее до звукового сигнала (около 2 секунд). После заставки с названием анализатора и версией программного обеспечения, на дисплее появится главное меню анализатора (рисунок 4).

2.7.2 Выберите режим измерения, переместив курсор с помощью кнопки А или В на соответствующую иконку и утвердив выбор кратковременным нажатием на кнопку вкл/выкл. Анализатор начнет процедуру подготовки к измерению, на дисплее последовательно появятся окна «Wait» и «Set mouthpiece» (рисунок 8).

2.7.3 Вскройте упаковку мундштука.

2.7.4 Установите мундштук следующим образом: соблюдая направление стрелки на мундштуке (как указано на рисунке 1), вставьте мундштук между направляющими анализатора, совместив патрубки мундштука с входными портами анализатора до упора.

Посмотрев на боковые панели анализатора, визуально проверьте правильность установки мундштука: оба патрубка мундштука должны быть полностью утоплены во входные порты анализатора.

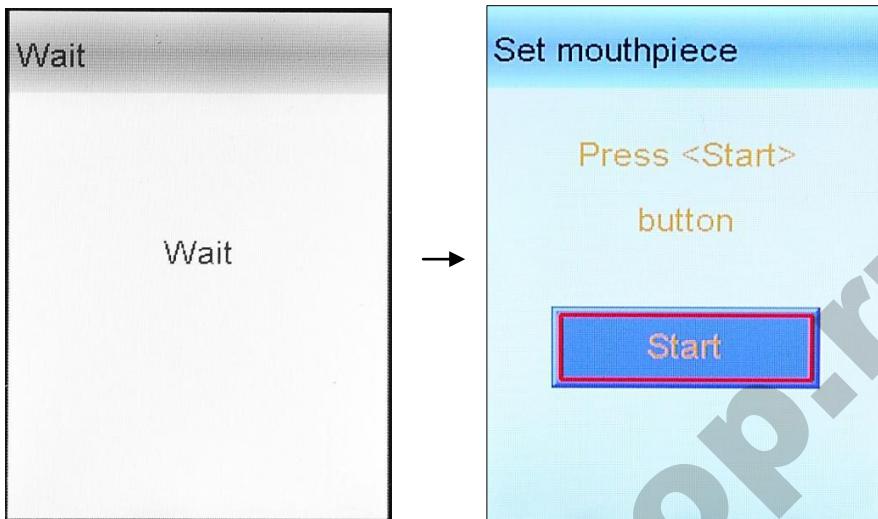


Рисунок 8 – Подготовка к измерению

2.7.5 Нажмите виртуальную кнопку «**Start**» для начала процедуры измерения. В этот момент произойдет отбор пробы воздуха из мундштука (будет слышен двойной щелчок срабатывания заборной системы) для проверки его на отсутствие паров этанола, а также на отсутствие остаточного алкоголя в заборной системе анализатора (рисунок 9, слева).

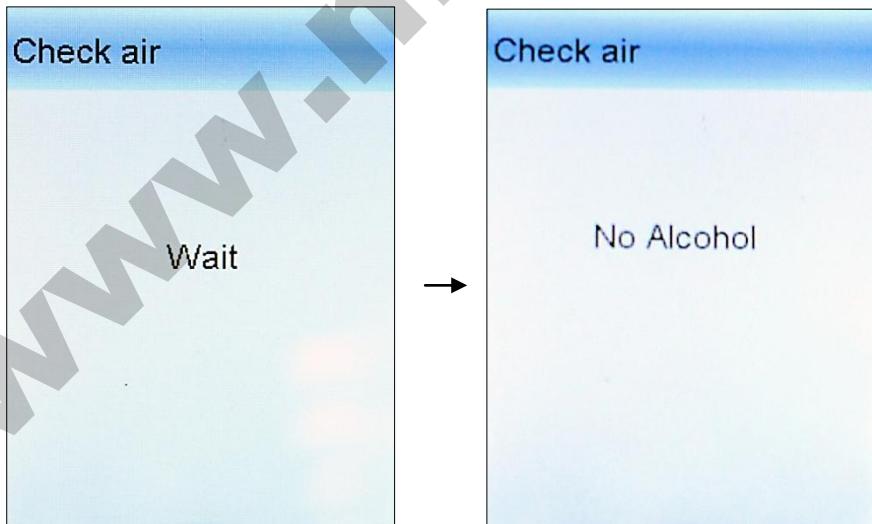


Рисунок 9 – Проверка воздуха

Если в мундштуке и заборной системе алкоголь не обнаружен, на дисплее появится сообщение «**No Alcohol**» (рисунок 9, справа), и анализатор перейдет в режим готовности к отбору пробы (рисунок 10).

Если в мундштуке или заборной системе будет обнаружен алкоголь, анализатор не выйдет в режим готовности к отбору пробы, в этом случае действуйте согласно 2.7.15 настоящего РЭ.

2.7.6 При готовности анализатора к отбору пробы (рисунок 10) выполните выдох согласно 2.7.7 настоящего РЭ.

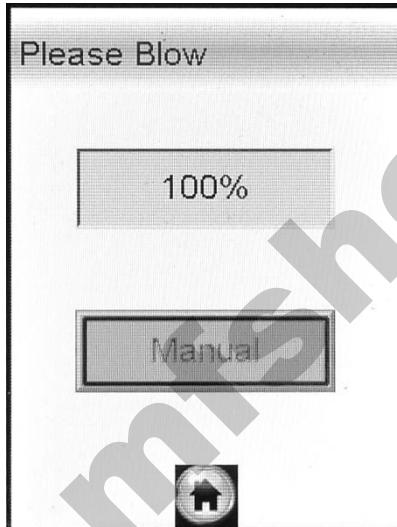


Рисунок 10 – Готовность к отбору пробы

В случае если выдох не был сделан своевременно (в течение 30 секунд с момента появления окна готовности к отбору пробы), то для возврата анализатора в режим готовности к отбору пробы действуйте согласно 2.7.16 настоящего РЭ.

Если обследуемый отказывается делать выдох (отказ от изменения), действуйте согласно 2.9 настоящего РЭ.

2.7.7 Обследуемому лицу следует дуть во входное отверстие мундштука (рисунок 2).

Выдох должен быть спокойным и равномерным (без форсирования) и длиться около 4-5 секунд. Если выдыхаемый воздух поступает с расходом не менее 15 л/мин, то во время выдоха звучит опорный звуковой сигнал, и на индикаторе продолжительности выдоха предъявляется оставшееся время выдоха в процентах (рису-

нок 11). Выдох следует прекратить по окончании опорного звукового сигнала. В этот момент анализатор произведет автоматический отбор пробы выдыхаемого воздуха для измерения массовой концентрации паров этанола.

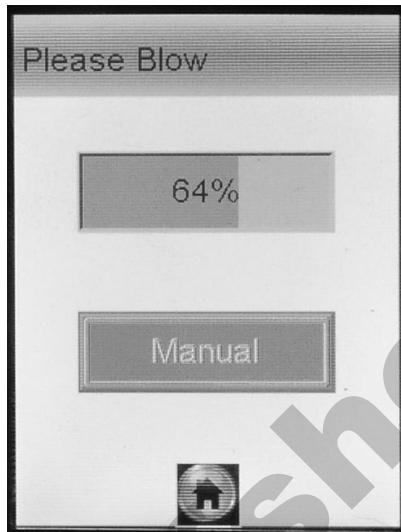


Рисунок 11 – Индикация выдоха

Автоматический отбор пробы производится в самом конце выдоха для обеспечения анализа воздуха из глубины легких.

При выполнении измерения в автоматическом режиме отбора пробы в памяти анализатора в строке режима отбора пробы сохраняется надпись «Auto».

**ВНИМАНИЕ! Для исключения возможного влияния на результат измерения этанола, находящегося на слизистой оболочке ротовой полости, перед измерением должно пройти не менее 20 минут после употребления алкогольсодержащих лекарственных препаратов и спреев для ротовой полости, а так же слабоалкогольсодержащих пищевых продуктов (кисломолочных продуктов, кваса и т.д.).**

Во избежание загрязнения заборной системы анализатора анализируемая пробы воздуха не должна содержать частиц табачного дыма, мокрот (слияны) и остатков пищи. Поэтому перед измерением:

- должно пройти не менее 2-х минут после курения;

*– рекомендуется прополоскать рот водой, если непосредственно перед измерением был прием пищи.*

2.7.8 Если проба выдыхаемого воздуха не соответствует установленным параметрам по расходу или объему (указанным в 1.2.5 настоящего РЭ), т.е. в случае прерывания выдоха, действуйте согласно 2.7.17 настоящего РЭ.

2.7.9 Если обследуемому не хватает выдоха для автоматического отбора пробы, можно воспользоваться ручным отбором пробы согласно 2.8 настоящего РЭ.

2.7.10 После того как проба воздуха отобрана, и произведен анализ, на дисплее предъявляется результат измерения массовой концентрации паров этанола (алкоголя) в отобранный пробе выдыхаемого воздуха: числовое значение и обозначение единицы измерения «mg/L» (рисунок 12).



Рисунок 12 – Предъявление результата измерения

*Примечание – Так как алкоголь всасывается в кровь в течение определенного времени, может пройти более 30 минут после употребления алкоголя до достижения максимальной его концентрации в крови и соответственно в выдыхаемом воздухе. Этот фактор необходимо учитывать при анализе результатов и назначении повторного измерения.*

2.7.11 Удалите мундштук.

2.7.12 Для проведения следующего измерения нажмите виртуальную кнопку  и повторите процедуру согласно 2.7.3÷2.7.11 настоящего РЭ.

2.7.13 Для выхода в главное меню нажмите виртуальную кнопку .

2.7.14 После завершения работы выключите анализатор продолжительным нажатием кнопки вкл/выкл до появления сообщения на дисплее «**POWER OFF**».

2.7.15 Если при выполнении 2.7.5 настоящего РЭ в мундштуке или в заборной системе будет обнаружен алкоголь, на дисплее анализатора появится сообщение «**Alcohol Detected**» (рисунок 13).

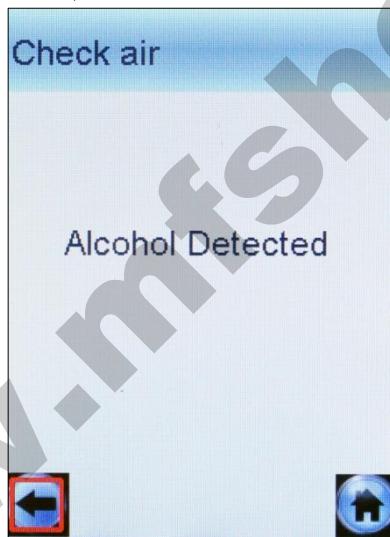


Рисунок 13 – В мундштуке или в заборной системе обнаружен алкоголь

Для выхода в режим готовности к отбору пробы выполните следующее:

– убедитесь в соблюдении правил эксплуатации по 2.1.2 настоящего РЭ, так как пары этанола могли попасть в мундштук из окружающего воздуха;

– нажмите виртуальную кнопку ;

- повторите процедуру по 2.7.5 настоящего РЭ;
- при повторном появлении сообщения «**Alcohol Detected**» удалите мундштук и повторите процедуру по 2.7.3÷2.7.5 настоящего РЭ.

**ВНИМАНИЕ!** *Пока в мундштуке или в заборной системе будет обнаруживаться алкоголь, анализатор не выйдет в режим готовности к отбору пробы.*

2.7.16 Если при выполнении 2.7.6 настоящего РЭ выдох не был сделан своевременно, то окно готовности к отбору пробы «**Please Blow**» (рисунок 14, слева) через 30 секунд сменится окном «**Refuse**» (рисунок 14, справа).


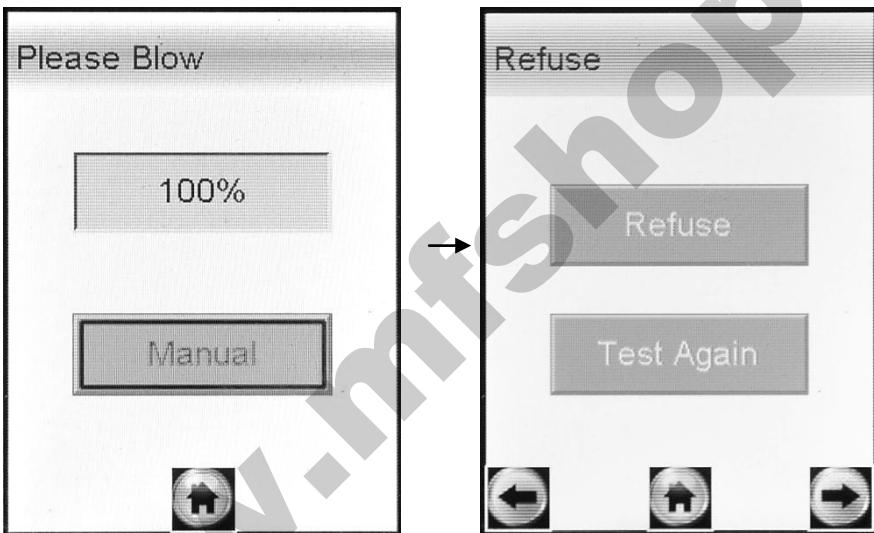



Рисунок 14 – Смена окон при отсутствии выдоха

Для возобновления процедуры измерения нажмите виртуальную кнопку «**Test Again**».

2.7.17 Если при выполнении 2.7.7 настоящего РЭ при выдохе обследуемого в анализатор начинает поступать выдыхаемый воздух с недостаточным расходом, а также в случае слишком раннего прекращения дыхательной пробы, на дисплее появляется окно «**Blow Discontinued**» (рисунок 15, справа).

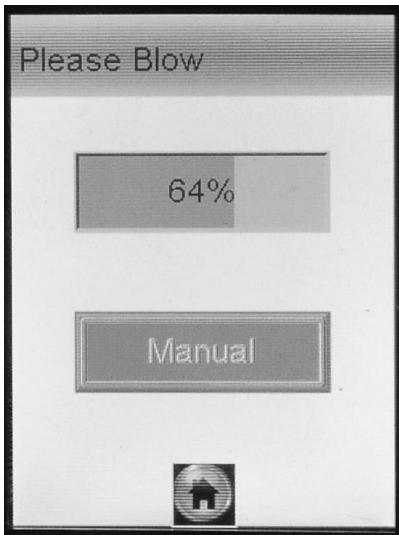

индикация выдоха

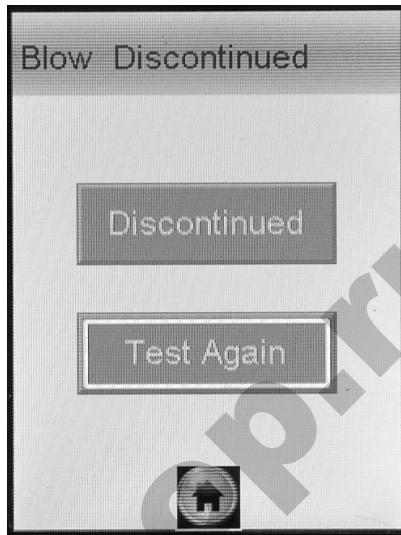

выдох прерван

Рисунок 15 – Срыв дыхательной пробы

Необходимо прекратить выдох, затем обследуемый может повторить выдох.

Для повторного выдоха нажмите виртуальную кнопку «**Test Again**», и после появления на дисплее окна готовности к отбору пробы (рисунок 10), обследуемый должен повторить выдох согласно 2.7.7 настоящего РЭ.

В анализаторе предусмотрена возможность зафиксировать факт(ы) прерывания выдоха, если в этом есть необходимость. Для этого переместите курсор с помощью кнопки А или В на виртуальную кнопку «**Discontinued**» и активируйте ее кратковременным нажатием на кнопку вкл/выкл, на дисплее появится окно с сообщением о прерывании выдоха (рисунок 16).

В памяти анализатора в этом случае в строках режима отбора пробы и результата измерения сохраняется надпись «**Discontinued**», что свидетельствует о том, что была сделана попытка выдоха, которая не завершилась автоматическим отбором пробы с последующим измерением.

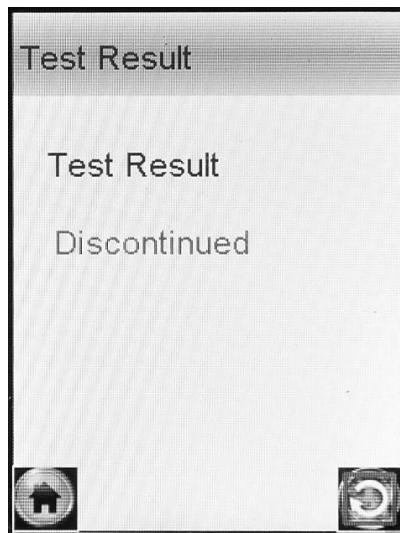


Рисунок 16 – Выдох прерван

*Примечание – Если обследуемому по физиологическим причинам не удается выполнить достаточный для автоматического отбора пробы выдох, можно при необходимости зафиксировать факт попытки выдоха (с результатом «Discontinued»), и провести следующее измерение с ручным отбором пробы согласно 2.8 настоящего РЭ.*

Для продолжения работы следуйте указаниям 2.7.11÷2.7.14 настоящего РЭ.

## 2.8 Ручной режим отбора пробы

2.8.1 Успешно применять выдыхаемый воздух как диагностическую среду для определения содержания алкоголя в крови человека позволяет тот факт, что количество алкоголя, испаряющегося в выдыхаемый воздух, зависит от его содержания в венозной крови. Эта зависимость является следствием закона Генри, который гласит, что давление летучего (газообразного) компонента в растворе и, следовательно, содержание паров этого компонента над раствором прямо пропорционально его содержанию в растворе.

Ближе всего соприкасается с кровью легочный воздух, близкий к альвеолярному, анализ которого становится возможным только при глубоком выдохе. Воздух, находящийся в ротовой полости, а

также в верхней части дыхательных путей, не находится в тесном соприкосновении с венозной кровью.

Именно поэтому для измерения массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе рекомендуется использовать автоматический отбор пробы, при котором обеспечивается соблюдение параметров дыхательной пробы (расхода и объема выдыхаемого воздуха).

**При ручном режиме отбора пробы не обеспечиваются параметры выдоха, указанные в 1.2.5 настоящего РЭ.**

При ручном отборе пробы результат измерения массовой концентрации этанола в отобранный пробе выдыхаемого воздуха может быть занижен<sup>1</sup> по сравнению с результатом, полученным при срабатывании автоматического отбора пробы, вследствие того, что при ручном отборе – проба содержит большую долю воздуха из верхних дыхательных путей. Воздух из верхних дыхательных путей менее насыщен парами этанола, нежели легочный воздух, отбор которого происходит при автоматическом отборе пробы.

2.8.2 Если обследуемому не удается сделать выдох, при котором срабатывает автоматический отбор пробы, можно воспользоваться ручным режимом отбора пробы.

Для этого при готовности анализатора к отбору пробы (рисунок 10) переместите курсор с помощью кнопки А или В на виртуальную кнопку «Manual» и во время выдоха обследуемого активируйте ее кратковременным нажатием на кнопку вкл/выкл, при этом анализатор произведет ручной отбор пробы – будет слышен щелчок срабатывания заборной системы.

Производите ручной отбор пробы в самом конце выдоха, на который способен обследуемый.

2.8.3 При выполнении измерения в ручном режиме отбора пробы в памяти анализатора в строке режима отбора пробы сохраняется надпись «Manual».

## **2.9 Отказ от измерения**

2.9.1 Если выдох не был сделан своевременно, то окно готовности к отбору пробы «Please Blow» через 30 секунд сменится ок-

---

<sup>1</sup> При условии отсутствия этанола, находящегося на слизистой оболочке ротовой полости.

ном «**Refuse**» (рисунок 14).

В случае отказа обследуемого от проведения измерения (обследуемый отказывается делать выдох) в анализаторе предусмотрена возможность зафиксировать факт отказа от измерения; для этого переместите курсор с помощью кнопки А или В на виртуальную кнопку «**Refuse**» и активируйте ее кратковременным нажатием на кнопку вкл/выкл, на дисплее появится окно с сообщением об отказе от измерения (рисунок 17).

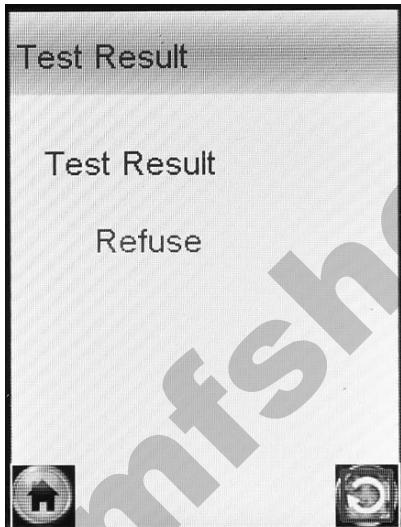


Рисунок 17 – Отказ от измерения

Для продолжения работы следуйте указаниям 2.7.12÷2.7.14 настоящего РЭ.

2.9.2 При отказе от измерения в памяти анализатора в строках режима отбора пробы и результата измерения сохраняется надпись «**Refuse**», что свидетельствует о том, что выдоха обследуемого не было.



## 2.10 Порядок работы в режиме скрининга

2.10.1 Включите анализатор нажатием на кнопку вкл/выкл, удерживая ее до звукового сигнала (около 2-х секунд). После заставки с названием анализатора и версией программного

обеспечения на дисплее появится главное меню анализатора (рисунок 4).

2.10.2 Выберите режим скрининга, переместив курсор с помощью кнопки **A** или **B** на соответствующую иконку и утвердив выбор кратковременным нажатием на кнопку вкл/выкл. Анализатор начнет процедуру подготовки к измерению, на дисплее последовательно появятся окна «Wait» и «Please Blow» (рисунок 18).

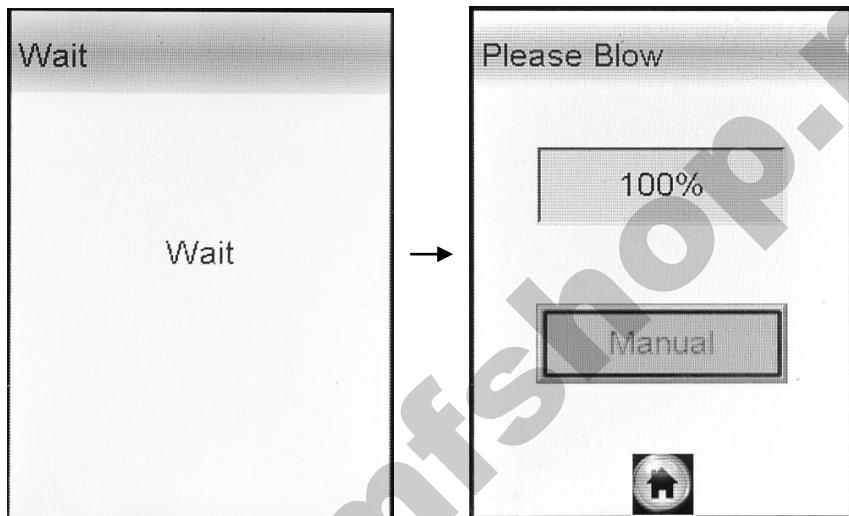


Рисунок 18 – Переход в режим скрининга

2.10.3 Установите мундштук-воронку следующим образом: расположив патрубки соответственно входным портам анализатора, как указано на рисунках 1 и 3, вставьте мундштук-воронку между двумя направляющими анализатора, совместив патрубки мундштука с входными портами анализатора до упора.

Посмотрев на боковую панель анализатора, визуально проверьте правильность установки мундштука-воронки: оба патрубка мундштука должны быть полностью утоплены во входные порты анализатора.

2.10.4 Для проведения тестирования обследуемый должен дуть в мундштук-воронку сильно и непрерывно (но без форсирования) около 3-5 секунд. Мундштук-воронка должен находиться прямо напротив рта обследуемого, почти перпендикулярно поверхности лица, на расстоянии 1,5÷2 см.

*Примечание – Рекомендуется для лучшего срабатывания автоматического отбора пробы поток выдыхаемого воздуха направлять в вытянутую часть мундштука-воронки (напротив отверстия в мундштуке-воронке на датчик давления – на рисунке 3 отмечено стрелкой).*


Если выдыхаемый воздух поступает с достаточным расходом, во время выдоха звучит опорный звуковой сигнал.

Выдох следует прекратить по окончании опорного звукового сигнала; если расход и объем выдыхаемого воздуха будут достаточными, в момент окончания выдоха будет слышен щелчок срабатывания заборной системы – анализатор произведет автоматический отбор пробы выдыхаемого воздуха из мундштука-воронки.


2.10.5 Если обследуемому не хватает выдоха для автоматического отбора пробы, можно воспользоваться ручным отбором пробы согласно 2.8 настоящего РЭ.

***ВНИМАНИЕ! Не удаляйте анализатор от рта обследуемого до окончания отбора пробы. В противном случае будет произведен отбор пробы окружающего воздуха, а не выдыхаемого.***

2.10.6 В зависимости от результата тестирования на дисплее анализатора появляется одно из двух сообщений (рисунок 19).

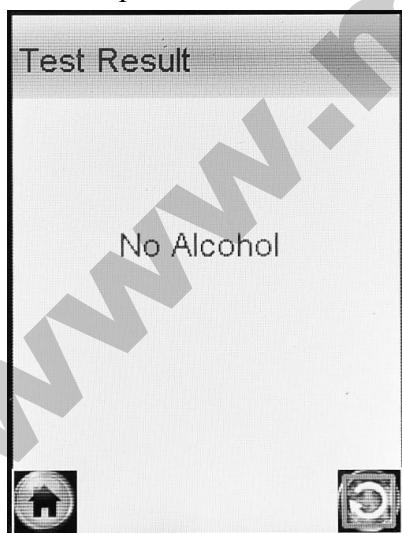

алкоголь не обнаружен

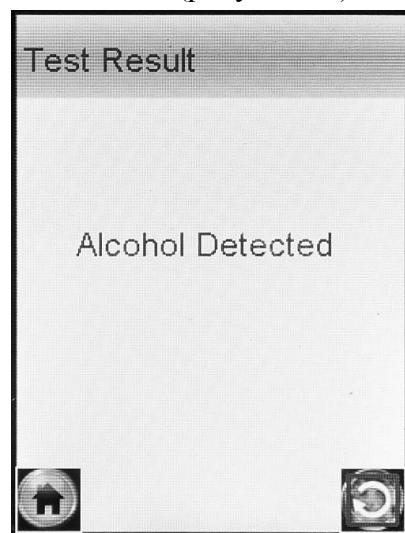

алкоголь обнаружен

Рисунок 19 – Результаты теста в режиме скрининга

Результаты тестирования в режиме скрининга сохраняются в памяти анализатора и выводятся в строке результата измерения в виде соответствующих надписей: «**No Alcohol**» или «**Alcohol Detected**».

2.10.7 Для проведения следующего тестирования нажмите виртуальную кнопку  и повторите процедуру согласно 2.10.4÷2.10.6 настоящего РЭ.

2.10.8 Для выхода в главное меню нажмите виртуальную кнопку .

**ВНИМАНИЕ!** Режим скрининга может использоваться только для оценки наличия этилола в выдыхаемом воздухе, при этом погрешность анализатора может превысить пределы допускаемой погрешности анализатора, указанные в 1.2.1 настоящего РЭ (результат может быть занижен по причине попадания окружающего воздуха в пробу выдыхаемого воздуха).

Если при проведении тестирования в режиме скрининга в выдыхаемом воздухе обнаружен алкоголь, рекомендуется провести измерение в режиме измерения (в соответствии с 2.7 настоящего РЭ).

2.10.9 При использовании анализатора для многократных измерений с использованием многоразового мундштука-воронки, необходимо периодически протирать внутреннюю поверхность воронки, не допуская появления конденсата.

**ВНИМАНИЕ!** Попадание конденсата в заборную систему может привести к выходу из строя электрохимического датчика.

2.10.10 После завершения работы выключите анализатор продолжительным нажатием кнопки вкл/выкл до появления сообщения на дисплее «**POWER OFF**».



## 2.11 Просмотр памяти тестов

2.11.1 Пункт главного меню «**Просмотр памяти**» позволяет вывести на дисплей сохраненные в памяти анализатора результаты измерений (тестов).

2.11.2 Для просмотра результатов измерений, сохраненных в памяти анализатора, выберите «**Просмотр памяти**» в главном меню анализатора, для этого переместите курсор с помощью кнопки А или В до соответствующего пункта-иконки (рисунок 4) и утвердите выбор кратковременным нажатием кнопки вкл/выкл. На дисплее появится окно «**RECORD**» с результатом последнего теста (рисунок 20).

2.11.3 Перебор записей в памяти осуществляется активированием виртуальных кнопок и .

RECORD	
Record No.	00188
Date	26/04/2011
Time	13:06:19
Test Mode	Manual
Test Result	0.000 mg/L

номер измерения (по внутренней нумерации анализатора)  
 дата выполнения измерения (день/месяц/год)  
 время выполнения измерения (час:минуты:секунды)  
 режим отбора пробы воздуха  
 результат измерения

Рисунок 20 – Просмотр памяти

## 2.12 Выключение анализатора

2.12.1 Анализатор выключается продолжительным (около 3 секунд) нажатием на кнопку вкл/выкл до появления на дисплее сообщения «**POWER OFF**».

2.12.2 С целью экономии питания предусмотрена функция автоматического отключения анализатора. Пользователь может самостоятельно установить удобное время автоматического отключения анализатора (согласно 2.5.4 настоящего РЭ).

## 2.13 Возможные неисправности анализатора

Возможные неисправности анализатора и способы их устранения приведены в таблице 6.

Таблица 6

№ п/п	Возможная неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
1	Анализатор не включается	1. Отсутствие/ низкое напряжение элементов питания	Установите/зарядите элементы питания согласно 3.1.3 настоящего РЭ
		2. Анализатор неисправен	Анализатор необходимо отправить в сервисный центр
2	Остановились часы реального времени	1. Пониженное напряжение литиевой батарейки	Анализатор необходимо отправить в сервисный центр для замены литиевой батарейки
		2. Выход из строя микросхемы часов реального времени	Анализатор необходимо отправить в сервисный центр
3	Анализатор не производит автоматический отбор пробы	1. Недостаточный расход или объем выдыхаемого воздуха	Повторите выдох в соответствии с 2.7.7 настоящего РЭ
		2. Анализатор неисправен	Анализатор необходимо отправить в сервисный центр
4	Отсутствует звуковая сигнализация работы анализатора	Анализатор неисправен	Анализатор необходимо отправить в сервисный центр
5	При включении анализатора выводится сообщение «Temperature Extreme high	1. Температура на плате с электрохимическим датчиком выше (ниже) допустимого	Выдержите анализатор в рабочих условиях эксплуатации (в соответствии с 1.1.2 настоящего РЭ) и по-

	(low)» и анализатор отключается	значения 2. Анализатор неисправен	вторите включение Анализатор необходимо отправить в сервисный центр
--	---------------------------------	--------------------------------------	--

### 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание анализатора производится с целью обеспечения постоянной исправности и готовности к эксплуатации.

#### 3.1 Текущее техническое обслуживание

3.1.1 Текущее техническое обслуживание включает в себя:

- внешний осмотр перед началом работы;
- замену/заряд элементов питания при низком напряжении;
- чистку анализатора по мере загрязнения.

3.1.2 При внешнем осмотре анализатора необходимо проверять:

- наличие всех крепежных элементов;
- наличие пломбирования и отсутствие внешних повреждений, влияющих на работоспособность анализатора;
- четкость надписей маркировки.

#### 3.1.3 Замена/заряд элементов питания

3.1.3.1 Уровень напряжения элементов питания отображается на индикаторе питания в главном меню анализатора.

При низком уровне заряда лишь небольшая часть индикатора питания остается закрашенной; когда уровень напряжения элементов питания станет ниже допустимого, анализатор отключится. В этих случаях требуется произвести замену/заряд элементов питания.

*Примечание – Отключение анализатора в случае пониженного питания может произойти на всех этапах его работы, поэтому следите за индикатором питания в главном меню и производите замену/заряд элементов питания заблаговременно.*

3.1.3.2 Для замены элементов питания выключите анализатор, откройте крышку отсека питания на задней панели анализатора, нажав на рычажок под надписью «OPEN» по направлению стрелки, удалите все четыре элемента питания из отсека питания и установите новые/заряженные, соблюдая полярность.

*Внимание! Следует производить замену одновременно всех элементов питания; при этом следует устанавливать элементы*

*ты питания одного типа и производителя (устанавливать аккумуляторы одного производителя и одинаковой емкости).*

#### **3.1.4 Чистка**

3.1.4.1 Чистка корпуса анализатора производится слегка влажной салфеткой.

Нельзя применять абразивные или химические вещества для чистки анализатора – это может повредить корпус, дисплей и/или электрохимический датчик анализатора.

При чистке необходимо убедиться в отсутствии грязи и пыли во входных портах заборной системы анализатора. При наличии загрязнений удалите их.

3.1.4.2 Удаление конденсата из мундштука-воронки анализатора при эксплуатации производится мягкой салфеткой без ворса. Мундштук-воронка периодически должен подвергаться санитарной обработке, после чего его следует тщательно высушивать.

3.1.4.3 Мундштуки могут подвергаться санитарной обработке по МУ-287-113 для повторного использования согласно внутренним распоряжениям эксплуатирующей организации.

*Примечание – Если производится обработка и дезинфекция мундштуков, то после этого их необходимо тщательно высушивать. В противном случае скопившаяся жидкость в мундштуке-воронке или жидкость из мундштука может попасть в заборную систему анализатора, что в свою очередь может привести к выходу из строя электрохимического датчика и других элементов.*

### **3.2 Периодическое техническое обслуживание**

Периодическое техническое обслуживание анализатора в течение всего периода эксплуатации включает в себя:

- поверку анализатора – 1 раз в год;
- корректировку показаний анализатора – по необходимости;
- проверку показаний анализатора – согласно 3.2.1 настоящего РЭ.

#### **3.2.1 Проверка показаний анализатора**

3.2.1.1 Проверка показаний анализатора может выполняться:

- при эксплуатации анализатора (по желанию пользователя);
- перед проведением поверки анализатора.

3.2.1.2 Проверку показаний анализатора может выполнять пользователь или сервисный центр при условии наличия оборудования, указанного в таблице 7.

3.2.1.3 Работу по проверке показаний анализатора рекомендуется отмечать в паспорте анализатора в таблице учета технического обслуживания анализатора.

*Примечание – Записи в паспорте о выполненной проверке показаний делают только сервисные центры; пользователю рекомендуется вести отдельный журнал учета технического обслуживания анализатора.*

3.2.1.4 Проверку показаний анализатора следует проводить при следующих условиях:

- диапазон температуры окружающего воздуха, °С: от 20 до 25;
- диапазон относительной влажности окружающего воздуха, %: от 30 до 80;
- диапазон атмосферного давления, кПа: 101,3±4;
- анализатор выдерживают в помещении, в котором проводят проверку показаний, в течение 1,5-2 ч;
- перед проверкой показаний не допускается подавать на анализатор пробы выдыхаемого воздуха или другие газовые смеси (например, газовой смеси от генератора) в течение не менее 1 ч.

Таблица 7

№ п/п	Наименование, тип, основные технические характеристики
1	Генератор газовых смесей паров этанола в воздухе GUTH модель 10-4D – рабочий эталон 1-го разряда по ГОСТ 8.578–2008. Пределы допускаемой относительной погрешности: ±5%.
2	Стандартные образцы состава водных растворов этанола ВРЭ-2 (ГСО 8789-2006). Границы относительной погрешности при Р=0,95: ± 1 %. Номинальное значение массовой концентрации этанола в растворе $0,386 \pm 0,019 \text{ мг/см}^3$ .
3	Воздух в баллоне под давлением по ТУ 6-21-5-82.
4	Редуктор баллонный кислородный одноступенчатый БКО-50-4.
5	Ротаметр РМ-0,63 ГУЗ по ГОСТ 13045-81. Верхний предел измерений $0,63 \text{ м}^3/\text{ч}$ , пределы допускаемой относительной погрешности ± 2,5 % от верхнего предела измерения.
6	Барометр-анероид БАММ-1 по ТУ 25-11.1513-79. Цена деления 0,5 мм рт. ст.

7	Гигрометр психрометрический ВИТ-2. Цена деления $0,2^{\circ}\text{C}$ .
8	Стандартные образцы состава газовых смесей $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}/\text{N}_2$ в баллонах под давлением (далее – ГС в баллонах под давлением) по ТУ 6-16-2956-92: ГСО 8364-2003 с редуктором, обеспечивающим номинальный расход 1 л/мин. Номинальное значение массовой концентрации этанола в ГС в баллонах под давлением $0,150 \pm 0,015$ мг/л.

**П р и м е ч а н и я:**

- 1 Допускается в качестве источника воздуха (вместо п. 3, 4) использовать компрессор при наличии в помещении приточно-вытяжной вентиляции. Компрессор должен обеспечивать максимальный расход воздуха  $10 \div 15$  л/мин, должен иметь возможность регулировки расхода в диапазоне от 6 л/мин до  $10 \div 15$  л/мин.
- 2 Все средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке, ГС в баллонах под давлением и стандартные образцы состава водных растворов этанола – действующие паспорта.
- 3 Допускается применение других средств измерений, метрологические характеристики которых не хуже указанных в таблице.

### 3.2.1.5 Проверка показаний анализатора с помощью генератора газовых смесей паров этанола в воздухе

3.2.1.5.1 Для проверки показаний анализатора с помощью генератора газовых смесей паров этанола в воздухе (далее – генератора) требуется оборудование, указанное в пп. 1–7 таблицы 7.

3.2.1.5.2 Подготовка к проверке показаний.

а) В соответствии с руководством по эксплуатации генератора приготовьте газовую смесь (далее – ГС), используя соответствующий стандартный образец состава водного раствора этанола (п. 2 таблицы 7).

б) Рассчитайте действительное значение массовой концентрации этанола в ГС на выходе генератора  $C^d$ , мг/л, по формуле:


$$C^d = 0,38866 \times c_p^d, \quad (1)$$

где  $c_p^d$  – аттестованное значение массовой концентрации этанола в используемом стандартном образце состава водного раствора этанола, мг/см<sup>3</sup>.

в) Соберите газовую систему, схема которой изображена на рисунке 21. Сборку ведут ПВХ трубкой. При этом анализатор

включается в систему последним, непосредственно перед отбором пробы ГС.

При сборке газовой системы генератор следует расположить так, чтобы на него не падали прямые солнечные лучи и вблизи отсутствовали источники охлаждения или нагрева. Перед началом работы необходимо убедиться в отсутствии влаги и конденсата на внутренней поверхности соединительных трубок. При наличии влаги или конденсата просушите все элементы.

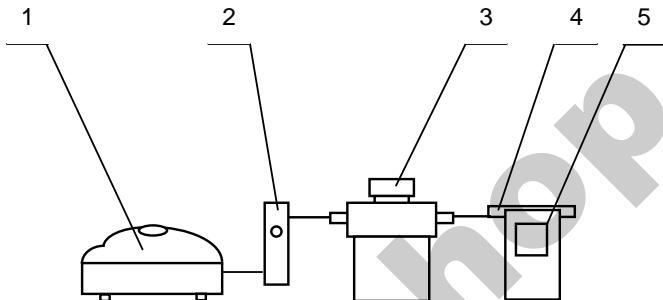

1 – компрессор; 2 – ротаметр; 3 – генератор ГС;  
4 – мундштук из комплекта анализатора; 5 – анализатор.

Рисунок 21 – Схема газовой системы при подаче на анализатор ГС от генератора

г) Включите компрессор. Отрегулируйте расход воздуха компрессора, контролируя по ротаметру, таким образом, чтобы установленся расход газовой смеси 6-7 л/мин.

### 3.2.1.5.3 Проведение проверки показаний анализатора.

Проверку показаний анализатора проводят путем подачи на анализатор газовой смеси и регистрации показаний.

Выполните три измерения в режиме измерения с ручным отбором пробы при подаче на анализатор ГС, следуя указаниям:

а) Включите анализатор, выберите режим измерения. Нажмите виртуальную кнопку «**Start**».

б) Вставьте мундштук и подсоедините анализатор в газовую систему (рисунок 21).

в) Включите компрессор (при этом расход установлен 6-7 л/мин). Через 2-3 секунды выполните ручной отбор пробы, нажав виртуальную кнопку «**Manual**», через 1-2 секунды прекрати-

те подачу газовой смеси от генератора (выключив или отсоединив компрессор из газовой системы) и отсоедините анализатор из газовой системы, удаляя при этом мундштук из анализатора.

г) Зарегистрируйте показание. Перейдите к следующему измерению, нажав виртуальную кнопку , далее нажмите виртуальную кнопку «**Start**».

д) Рассчитайте значение абсолютной погрешности  $\Delta_i$ , мг/л, по формуле:

$$\Delta_i = C_i - C^{\text{д}} , \quad (2)$$

где  $C_i$  – измеренное значение массовой концентрации этанола в ГС, мг/л;

$C^{\text{д}}$  – действительное значение массовой концентрации этанола в ГС, рассчитанное по формуле 1, мг/л.

е) Повторите действия по пунктам б) - д) еще два раза.

*Примечание 1 – Заменяйте мундштук на новый после каждого 5-8 тестов, не допуская скопления конденсата.*

*Примечание 2 – Заменяйте водный раствор этанола в генераторе в соответствии с руководством по эксплуатации генератора.*

ж) Результат проверки показаний считают положительным, если полученные значения абсолютной погрешности  $\Delta_i$  по трем измерениям не выходят за пределы допускаемой абсолютной погрешности, равные  $\pm 0,050$  мг/л.

з) При положительном результате проверки показаний рекомендуется сделать отметку в паспорте анализатора в таблице учета технического обслуживания, например, записью «Проверка показаний».

и) При отрицательном результате проверки показаний – если хотя бы одно из полученных значений абсолютной погрешности  $\Delta_i$  по трем измерениям выходит за пределы допускаемой абсолютной погрешности, требуется выполнить корректировку показаний анализатора (по 3.2.2 настоящего РЭ) с последующей поверкой анализатора.

### 3.2.1.6 Проверка показаний анализатора с помощью газовых смесей в баллонах под давлением

Для проверки показаний анализатора с помощью ГС в баллонах под давлением требуется оборудование, указанное в пп. 6-8 таблицы 7.


#### 3.2.1.6.1 Подготовка к проверке показаний.

Баллоны с газовыми смесями выдерживают в помещении, в котором проводят проверку показаний, не менее 24-х часов.

#### 3.2.1.6.2 Проведение проверки показаний.

Выполните три измерения в режиме измерения с ручным отбором пробы при подаче на анализатор ГС, следуя указаниям:

- a) Приверните редуктор к баллону.
- b) Соберите газовую систему, схема которой изображена на рисунке 22. Присоединять анализатор следует к патрубку редуктора через переходник и мундштук анализатора.
- c) Включите анализатор, выберите режим измерения. Нажмите виртуальную кнопку «**Start**».
- d) Выполните измерение следующим образом:
  - подсоедините анализатор в газовую систему (рисунок 22);
  - нажмите и удерживайте в нажатом состоянии кнопку в верхней части редуктора, подавая ГС в мундштук (в течение 3-4 секунд);
  - выполните ручной отбор пробы, нажав кнопку «**Manual**»;
  - через 1-2 секунды прекратите подачу газовой смеси от баллона, отпустив кнопку в верхней части редуктора;

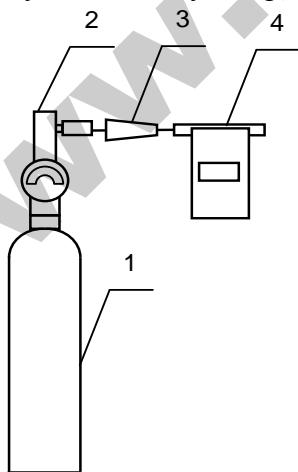

1 – баллон с ГС; 2 – редуктор;  
3 – переходник из комплекта баллона;  
4 – анализатор с мундштуком из комплекта анализатора.

Рисунок 22 – Схема газовой системы при подаче на анализаторы ГС из баллона с редуктором

- отсоедините анализатор из газовой системы, удаляя при этом мундштук из анализатора.

д) Зарегистрируйте показание  $\Pi_i$ . Перейдите к следующему измерению, нажав виртуальную кнопку , далее нажмите виртуальную кнопку «Start».

е) Рассчитайте измеренное значение массовой концентрации этанола в ГС  $C_i$ , мг/л, по формуле:

$$C_i = \Pi_i \cdot \frac{101,3}{P} \cdot K^{GC}, \quad (3)$$

где  $\Pi_i$  – зарегистрированное показание анализатора при подаче ГС из баллона под давлением;

$P$  – атмосферное давление, измеренное с помощью барометра-анероида, кПа;

$K^{GC}$  – коэффициент пересчета показаний анализатора при подаче ГС в баллонах под давлением, равный 1,05.

ж) Рассчитайте значение абсолютной погрешности  $\Delta_i$ , мг/л, по формуле:

$$\Delta_i = C_i - C^{\alpha}, \quad (4)$$

где  $C_i$  – измеренное значение массовой концентрации этанола в ГС, рассчитанное по формуле 3, мг/л;

$C^{\alpha}$  – действительное значение массовой концентрации этанола в ГС в баллоне под давлением, указанное в паспорте, мг/л.

*Примечание – При использовании ГС в баллонах под давлением следите за показаниями шкалы манометра на редукторе. Когда давление опустится до минимального допустимого значения (стрелка манометра опустится до верхней границы области с нулевой отметкой), использование баллона необходимо прекратить (рисунок 23).*



Рисунок 23 – Манометр на редукторе баллона

3) Повторите действия по пунктам г)- ж) еще два раза.

и) Результат проверки показаний считают положительным, если полученные значения абсолютной погрешности  $\Delta_i$  по трем измерениям не выходят за пределы допускаемой абсолютной погрешности, равные  $\pm 0,050$  мг/л.

к) При положительном результате проверки показаний рекомендуется сделать отметку в паспорте анализатора в таблице учета технического обслуживания, например, записью «Проверка показаний».

л) При отрицательных результатах проверки показаний – если хотя бы одно из полученных значений абсолютной погрешности  $\Delta_i$  по трем измерениям выходит за пределы допускаемой абсолютной погрешности, требуется выполнить корректировку показаний анализатора (по 3.2.2 настоящего РЭ) с последующей поверкой анализатора.

### **3.2.2 Корректировка показаний анализатора**

При отрицательных результатах проверки показаний требуется произвести корректировку показаний анализатора.

Корректировка показаний анализатора проводится в соответствии с документом «Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР Mark V. Инструкция по корректировке показаний. Меню инженера».

Инструкция по проведению корректировки показаний анализатора поциальному запросу поставляется фирмой-поставщиком в сервисные центры и в организации, имеющие аккредитацию на право поверки анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе.

Корректировка показаний анализатора производится в организациях, имеющих оборудование, указанное в таблице 7, а также имеющих техническую документацию по проведению корректировки.

Факт проведения корректировки показаний анализатора рекомендуется отметить в паспорте анализатора в таблице учета технического обслуживания, например, записью «Корректировка показаний».

**ВНИМАНИЕ! После проведения корректировки показаний анализатора обязательно проведение поверки анализатора.**

### **3.2.3 Проверка анализатора**

Проверка анализатора проводится в соответствии с документом МП-242-1524-2013 «Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР Mark V. Методика поверки», разработанному и утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 21 марта 2013 г.

3.2.3.1 Межпроверочный интервал – 1 год.

3.2.3.2 Основные средства поверки:

– генератор газовых смесей паров этанола в воздухе GUTH модель 10-4D – рабочий эталон 1-го разряда по ГОСТ 8.578–2008 в комплекте со стандартными образцами состава водных растворов этанола ВРЭ-2: ГСО 8789-2006;

или

– стандартные образцы состава газовых смесей  $C_2H_5OH/N_2$  в баллонах под давлением по ТУ 6-16-2956-92: ГСО 8364-2003, ГСО 8366-2003.

3.2.3.3 На поверку анализатор предоставляется с паспортом и свидетельством о предыдущей поверке (при наличии).

3.2.3.4 Перед поверкой рекомендуется выполнить проверку показаний (по 3.2.1.5 или по 3.2.1.6 настоящего РЭ) и при необходимости корректировку показаний.

3.2.3.5 Факт проведения поверки рекомендуется отмечать в таблице учета технического обслуживания в паспорте анализатора.

## **4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

**4.1** Анализатор транспортируется в транспортной таре фирмы-поставщика в крытых транспортных средствах.

**4.2** Хранение анализатора должно осуществляться в закрытых отапливаемых помещениях.

**ВНИМАНИЕ!** Не допускается хранение анализатора в местах с повышенной запыленностью и загазованностью, а также в которых осуществляется хранение спиртосодержащих веществ в открытых емкостях или проводится обработка поверхностей (оборудования) спиртосодержащими растворами.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)  
**Сообщения анализатора**

<b>Wait</b>	Ждите	<b>Jan</b>	Январь
<b>Set mouthpiece</b>	Установите мундштук	<b>Feb</b>	Февраль
<b>Press &lt;Start&gt; button</b>	Нажмите кнопку Старт	<b>Mar</b>	Март
<b>Check air</b>	Проверка воздуха	<b>Apr</b>	Апрель
<b>Please Blow</b>	Готовность к отбору пробы, Дуйте	<b>May</b>	Май
<b>Blow Discontinued</b>	Выдох прерван	<b>Jun</b>	Июнь
<b>Test Again</b>	Повторить тест	<b>Jul</b>	Июль
<b>Test Result</b>	Результат измерения	<b>Aug</b>	Август
<b>mg/L</b>	мг/л	<b>Sep</b>	Сентябрь
<b>No Alcohol</b>	Алкоголь не обнаружен	<b>Oct</b>	Октябрь
<b>Alcohol Detected</b>	Обнаружен алкоголь	<b>Nov</b>	Ноябрь
<b>Refuse</b>	Выдоха нет/ Отказ от теста	<b>Dec</b>	Декабрь
<b>Discontinued</b>	Выдох прерван	<b>Sun</b>	Воскресенье
<b>Manual</b>	Ручной отбор пробы	<b>Mon</b>	Понедельник
<b>Auto</b>	Автоматический отбор пробы	<b>Tue</b>	Вторник
<b>SETTING</b>	Установки пользователя	<b>Wed</b>	Среда
<b>Time</b>	Меню установки даты и времени	<b>Thu</b>	Четверг
<b>Auto Off</b>	Меню установки автоворыключения	<b>Fri</b>	Пятница
<b>Cal.</b>	Режим корректировки показаний	<b>Sat</b>	Суббота
<b>Advanced</b>	Меню инженера		
<b>Set Time and Date</b>	Установка даты и времени		
<b>Minutes</b>	Минуты		
<b>Update</b>	Обновить установки		
<b>RECORD</b>	Память тестов		
<b>Record No</b>	Номер измерения		

<b>Date</b>	Дата выполнения измерения		
<b>Time</b>	Время выполнения измерения		
<b>Test Mode</b>	Режим отбора пробы		
<b>POWER OFF</b>	Выключение		
<b>Password</b>	Пароль		

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**  
(СПРАВОЧНОЕ)



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

об утверждении типа средств измерений

CNC.39.001.A № 51535

Срок действия до 12 июля 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР Mark V

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма Shenzhen Well Electric Co., Ltd., КНР

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 54185-13

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП-242-1524-2013

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по  
техническому регулированию и метрологии от 12 июля 2013 г. № 813

Описание типа средств измерений является обязательным приложением  
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

Ф.В.Булыгин



..... "июль" 2013 г.

Серия СИ

№ 010761

## Копии разрешительных документов



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE AND SOCIAL DEVELOPMENT CONTROL

### РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ REGISTRATION CERTIFICATE ФС №2006/1967

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО с 11 декабря 2006 года до 11 декабря 2016 года

ИЗДЕЛИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

Анализатор паров этанола "Алкотектор", модели *Mark V, PRO-100 combi, PRO-100* в комплектации (см. приложение на 1 листе).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ *Shenzhen Well Electric Co., Ltd., КНР.*

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ВНЕСЕНО В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР  
ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

Государственная регистрация предусматривает надзор за производством  
в целях обеспечения безопасности, качества, эффективности  
зарегистрированных изделий медицинского назначения и медицинской техники

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения  
и социального развития

*Р.У. Хабриев*



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE AND SOCIAL DEVELOPMENT CONTROL

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**

**ATTACHMENT  
ФС №2006/1967**

Лист 1

1. Модель Mark V в комплектации:
  - прибор Алкотектор Mark V - 1 шт.;
  - кейс - 1 шт.;
  - батарейки типоразмера AAA - 4 шт.;
  - одноразовые мундштуки - 105 шт.
2. Модель PRO-100 combi в комплектации:
  - прибор Алкотектор PRO-100 combi - 1 шт.;
  - кожаный чехол - 1 шт.;
  - кейс - 1 шт.;
  - зарядное устройство - 1 шт.;
  - кабель питания зарядного устройства от бортовой сети - 1 шт.;
  - аккумуляторы типоразмера AA - 4 шт.;
  - адаптер питания прибора от бортовой сети - 1 шт.;
  - кабель связи прибора с компьютером - 1 шт.;
  - рулоны термобумаги - 6 шт.;
  - одноразовые мундштуки - 105 шт.
3. Модель PRO-100 в комплектации:
  - прибор Алкотектор PRO-100 - 1 шт.;
  - беспроводной принтер - 1 шт.;
  - кожаный чехол - 1 шт.;
  - кейс - 1 шт.;
  - зарядное устройство - 1 шт.;
  - кабель питания зарядного устройства от бортовой сети - 1 шт.;
  - аккумуляторы типоразмера AA - 4 шт.;
  - батарейки типоразмера AA - 4 шт.;
  - адаптер питания прибора от бортовой сети - 1 шт.;
  - кабель связи прибора с принтером - 1 шт.;
  - кабель связи прибора с компьютером - 1 шт.;
  - рулоны термобумаги - 2 шт.;
  - одноразовые мундштуки - 105 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения  
и социального развития

Р.У. Хабриев

11 декабря 2006 года



## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ООО «АЛКОТЕКТОР»

Изменившееся название или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

ОГРН № 1077847551429 Выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу от 17.08.2007 г.

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Россия, 191036, г.Санкт-Петербург, ул. 1-я Советская, д.10, лит. А, помещ. 2-Н, телефон (812) 456-22-97, факс (812) 456-22-97

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Сидорова А.С.

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что

Анализатор паров этанола "Алкотектор", модели Mark V, PRO-100 combi, PRO-100 в комплектации

1.Модель Mark V в комплектации:

- прибор Алкотектор Mark V – 1 шт.;
- кейс – 1 шт.;
- батареики типоразмера AAA – 4 шт.;
- одноразовые мундштуки – 105 шт.

2.Модель PRO-100 combi в комплектации:

- прибор Алкотектор PRO-100 combi – 1 шт.;
- кожаный чехол – 1 шт.;
- кейс – 1 шт.;
- зарядное устройство – 1 шт.;
- кабель питания зарядного устройства от бортовой сети – 1 шт.;
- аккумуляторы типоразмера AA – 4 шт.;

3. Модель PRO-100 в комплектации:

- прибор Алкотектор PRO-100 – 1 шт.;
- беспроводной принтер – 1 шт.;
- кожаный чехол – 1 шт.;
- кейс – 1 шт.;
- зарядное устройство – 1 шт.;
- кабель питания зарядного устройства от бортовой сети – 1 шт.;
- аккумуляторы типоразмера AA – 4 шт.;
- батареики типоразмера AA – 4 шт.;
- адаптер питания прибора от бортовой сети – 1 шт.;
- кабель связи прибора с принтером – 1 шт.;
- кабель связи прибора с компьютером – 1 шт.;
- рулоны термобумаги – 2 шт.;
- одноразовые мундштуки – 105 шт.

изменение, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация

Серийный выпуск по контракту № 56 от 16.04.2013 г.

сведения о серийном выпуске и партии (номер партии, номер изделия, реквизиты договора/контракта, и т.п.)

Изготовитель "Shenzhen Well Electric Co., Ltd."

наименование изготовителя

North Wing, 4F, Building 9, Tian Jian Industrial Zone, 80 Shang Bao Road, Fu Tian, Shenzhen, China, Китай. Тел. 86-755-831-60728 Факс 86-755-831-60467

страны и т.п.)

Код ОК 005-93 (ОКП): 94 4160

Код ТН ВЭД России: 9027 10 100 0

соответствует требованиям

ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3, 4)

обозначение нормативных документов, соответствием которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларации принял на основании

регистрационного удостоверения ФС № 2006/1967 от 11.12.2006 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития

информации о документах, являющихся основанием для принятия декларации

даты принятия декларации: 14.05.2013

декларация о соответствии действительна до: 13.05.2016

А.С. Сидоров

инициалы, фамилия

подпись



**Сведения о регистрации декларации о соответствии**

Орган по сертификации продукции ООО "ЮГРесурс"

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 23А, стр. 3, тел. 8 985 766 92 24, E-mail info@ug-resurs.ru

Аттестат пер. № РОСС RU.0001.11АГ98 выдан 28.10.2011г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

**Дата регистрации 14.05.2013, регистрационный номер декларации РОСС СН.АГ98.Д10220**

дата регистрации и регистрационный номер декларации



g.f.  
подпись

Н.В. Линева

инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

\*

www.mfshop.ru

# ПРИЛОЖЕНИЕ В

(СПРАВОЧНОЕ)

## Сервисные центры

Город	Организация	Контакты	Адрес	Вид тех. обслуживания
Абакан	ООО «Медтехника»	(3902) 25-73-41, факс23-15-74 amedtech@khakasnet.ru	655016, Республика Хакасия, Абакан, ул. Комарова, 8А	проверка, проверка и регулировка, ремонт
Архангельск	ФГУ «Архангельский ЦСМ»	(8182) 20-35-77, факс 20-38-32 arhcsn@arh.ru	163060, Архангельск, ул. Шаблина, д. 3	проверка, проверка и регулировка, ремонт
Барнаул	ООО «Дельрус (Алтай)»	(3852) 289-529, факс 289-530 delrusabr@intelbi.ru	656067, Алтайский край, Барнаул, Павловский тракт, 283	проверка, проверка и регулировка, ремонт
Барнаул	АКГУП «Алтаймедтехника»	(3852) 34-01-97, 34-19-33, 77-36-97, altmedc@mail.ru	656023, Барнаул, ул. Тимуровская, 72	проверка, проверка и регулировка, ремонт
Белгород	ФГУ «Белгородский ЦСМ»	(4722) 031-18-29, 31-18-29, 26-43-52	308007, Белгород, ул. Садовая, 110	проверка, проверка и регулировка, ремонт
Благовещенск	ФГУ «Благовещенский ЦСМ»	(4162) 35-23-28, 35-27-69, факс 35-23-28, 35-23-95, metrol@amur.ru	675029, Благовещенск, пер. Чудиновский, 10	проверка, проверка и регулировка, ремонт
Благовещенск	ИП Колчанова Светлана Валерьевна	(4162) 37-66-73	675029, Амурская область, Благовещенск, ул. Заводская, 154, оф. 30	проверка и регулировка, ремонт
Владивосток	ОАО «Медтехника-1»	(4232) 36-52-61	690033, Владивосток, ул. Иртышская, 10А	проверка, проверка и регулировка, ремонт
Владимир	ФГУ «Владимирский ЦСМ»	(4922) 24-23-37, 24-32-78 , 53-12-87, csm@vladcsn.elcom.ru	600022, Владимир, ул. Ново-Ямская, 73	проверка, проверка и регулировка, ремонт
Волгоград	Волгоградское отделение «Всероссийское общество автомобилистов»	(8442) 28-96-70, т.ф.28-96-60, 28-96-70 vooroovoa@vistcom.ru	400040, Волгоград, ул. Штеменко, 66а	проверка и регулировка, ремонт
Волгоград	ИП Горбунов А.Г.	8-903-373-94-32, (8442) 72-69-46, 94-42-45	400054, Волгоград, Чигиринская ул., д. 2, кв. 117	ремонт, проверка и регулировка
Вологда	ФГУ «Вологодский ЦСМ»	(8172) 51-17-18, 53-58-17	160004, Вологодская обл., Вологда, ул. Ленинградская, д. 70-а	проверка, проверка и регулировка, ремонт
Воронеж	ФГУ «Воронежский ЦСМ»	(4732) 52-33-62	Воронеж, ул. Станкевича, д. 2	проверка, ремонт
Воронеж	ООО «Неомедсервис»	(4732) 49-90-02, 49-90-35, 49-90-40 neomeds@yandex.ru <a href="http://www.neomedservice.ru">www.neomedservice.ru</a>	394029, Воронеж, Ленинский проспект, 10А	ремонт, проверка и регулировка
Екатеринбург	ФГУ «Уралтест»	(343) 350-53-15, 350-40-81	620219, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 2а	проверка
Екатеринбург	ГУП СО «ПТП» Медтехника»	(343) 341-05-68, 341-02-11, (факс) 341-04-27, 341-05-76	620137, Екатеринбург, ул. Учителей, д. 30	проверка, проверка и регулировка, ремонт
Иркутск	ООО «Технический центр диагностики автомобилей»	(3952) 44-61-35, 44-57-35, 44-59-74	664040, Иркутск, ул. Розы Люксембург, 172, а/я 224	проверка, проверка и регулировка, ремонт
Йошкар-Ола	ФГУ «Марийский ЦСМ»	(8362) 41-20-18, факс 41-16-94	424006, Йошкар-Ола, ул. Соловьева, д.3	проверка, проверка и регулировка, ремонт
Казань	ФГУ «Татарстанский ЦСМ»	(843) 291-08-21, 72-82-64	420029, Казань, ул. Журавликовых, д. 24	проверка, проверка и регулировка, ремонт
Калининград	ФГУ «Калининградский ЦСМ»	(4012) 53-17-72, 53-61-34	Калининград, ул. Больничная, д.4	проверка, проверка и регулировка
Калуга	ФГУ "Калужский ЦСМ"	(4842) 56-31-29, факс 57-42-69 <a href="mailto:kcsm@kaluga.ru">kcsm@kaluga.ru</a>	248000, г. Калуга, ул. Тульская, д.16а	проверка
Калуга	ООО «ЗдравСервис»	(4842) 544-988, 59-15-30 <a href="http://zdravservice@kaluga.ru">zdravservice@kaluga.ru</a> <a href="http://www.zdravservis.ru">www.zdravservis.ru</a>	248003, г. Калуга, ул. Тульская 189, строение 5, офис 11	проверка и регулировка, ремонт
Кемерово	ФГУ «Кемеровский ЦСМ»	(3842) 36-31-25 kemcsm@kuzbass.net	Кемерово, Дворцовая ул., д. 2	проверка, проверка и регулировка
Киров	ФГУ «Кировский ЦСМ»	(8332) 63-74-66, 63-08-06 <a href="mailto:gost@gost.kirov.ru">gost@gost.kirov.ru</a>	610035 Киров, ул. Попова, д. 9	проверка
Кострома	ФГУ «Костромской ЦСМ»	(4942) 42-80-11, 42-80-12 , 54-62-09, факс 42-05-11 kcsm@kosnet.ru	156005, Кострома, ул. Советская, 118А	проверка, проверка и регулировка, ремонт

Котлас	<b>МУЗ «Котласская ЦГБ»</b>	(8 1837) 2-10-57, т.ф. 2-36-44 Kottgrb@ainet.ru	165313, Архангельская область, Котлас, пр. Мира, 36	ремонт
Краснодар	<b>ФГУ «Краснодарский ЦСМ»</b>	(861) 233-65-33, 233-72-97, 235-36-57	Краснодар, ул. Айвазовского, д. 104 корп. А, Отдел ПИКТСИ,	проверка, проверка и регулировка
Красноярск	<b>ФГУ «Красноярский ЦСМ»</b>	(3912) 36-26-81, 36-12-85, 36-12-54, т.ф. 36-12-94, 36-60-09, тех. центр (ремонт) - 36-60-25 <a href="mailto:krascm@standart.krsn.ru">krascm@standart.krsn.ru</a> <a href="http://www.standart.krsn.ru">www.standart.krsn.ru</a>	660093, Красноярск, ул. Вавилова, д. 1а	проверка, проверка и регулировка, ремонт
Курган	<b>ФГУ «Курганский ЦСМ»</b>	(3522) 53-37-94, 53-85-96, (факс) 53-77-26	Курган, ул. Дзержинского, д. 33	проверка, проверка и регулировка
Курск	<b>ФГУ «Курский ЦСМ»</b>	(4712) 58-05-54, 53-67-74 <a href="mailto:kcsms@sovtest.ru">kcsms@sovtest.ru</a> <a href="mailto:teplotex@kcsms.sovtest.ru">teplotex@kcsms.sovtest.ru</a>	305029, Курск, Южный переулок, 6а	проверка, проверка и регулировка, ремонт
Магнитогорск	<b>ФГУ «Магнитогорский ЦСМ»</b>	(3519) 20-70-52	455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, Спартаковский пер., д. 6/1	проверка, проверка и регулировка, ремонт
Майкоп	<b>ФГУ «Адыгейский ЦСМ»</b>	(8772) 53-48-57 <a href="mailto:acsms@radent.ru">acsms@radent.ru</a>	385020, Майкоп, ул. 8 Марта, 1	проверка, проверка и регулировка, ремонт
Москва	<b>Ф-л ООО «Алкотектор», отдел по работе с клиентами</b>	(916) 041-50-90, т.ф.(495) 684-54-86	127473, г. Москва ул. Садовая-Самотечная, д. 13, стр. 1, оф. 310	сбор и выдача приборов на ТО
Москва	<b>Сологуб Геннадий Романович</b>	(495) 336-15-41		проверка и регулировка, ремонт
Москва	<b>ГУП «Гормедтехника»</b>	(495) 952-74-20, факс 958-15-60	115093, Москва, ул. Дублинская, д. 98	проверка, проверка и регулировка, ремонт
Мурманск	<b>ФГУ «Мурманский ЦСМ»</b>	(8152) 47-31-49, т.ф. 28-60-00 <a href="mailto:mcsm@mcsm.ru">mcsm@mcsm.ru</a> <a href="http://www.mcsm.ru">www.mcsm.ru</a>	183001, Мурманск, ул. Фестивальная, 25	проверка, проверка и регулировка, ремонт
Набережные Челны	<b>Филиал ФГУ «Татарстанский ЦСМ»</b>	(8552) 592-028	423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, р-н Новый город, д. 53/39	проверка, проверка и регулировка, ремонт
Надым	<b>ООО "Аспект-Медсервис"</b>	(3499) 56-11-67		ремонт, проверка и регулировка
Нижневартовск	<b>ООО «Медстар»</b>	(3466) 62-41-72, 62-43-69, 27-01-01, 27-10-65	628616, Тюменская обл., Нижневартовск, ул. Северная, 8-б, строение 1	проверка и регулировка, ремонт
Нижний Новгород	<b>ФГУ «Нижегородский ЦСМ»</b>	(831) 218-57-93, 218-57-48 <a href="mailto:ncsmnnov@sinn.ru">ncsmnnov@sinn.ru</a>	603950, Нижний Новгород, Республикаанская ул., д. 1	проверка
Нижний Новгород	<b>ООО ПТП «Медтехника»</b>	(831) 415-56-46, факс 419-86-71 <a href="mailto:mednn@mail.ru">mednn@mail.ru</a>	603005, Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 23-в, офис 3	проверка и регулировка, ремонт
Нижний Новгород	<b>ООО «Торгово-финансовая Компания «Медтехника»</b>	(831) 240-30-91, 245-77-09, 245-77-08, 245-77-06 <a href="mailto:tfkmed@mail.ru">tfkmed@mail.ru</a>	603011, Нижний Новгород, ул. Анатолия Григорьева 16	проверка и регулировка, ремонт
Нижний Новгород	<b>ООО «ЭКАРС»</b>	(831) 277-98-86, 246-44-00, 277-68-00 <a href="mailto:pribor@pisem.net">pribor@pisem.net</a>	603002, Нижний Новгород, ул. Коммунистическая, 41	проверка проверка и регулировка, ремонт
Нижний Тагил	<b>ООО «Медтехника НТ»</b>	(3435) 31-21-32, т.ф.31-21-36 <a href="http://medtechnika-nt.ru">http://medtechnika-nt.ru</a> <a href="mailto:ims-nt@mail.ru">ims-nt@mail.ru</a>	622002, Свердловская область, Нижний Тагил, Липовый Тракт, д. 13	проверка, проверка и регулировка, ремонт
Нижний Тагил	<b>ООО «Центр медицинской техники»</b>	(3435) 49-56-14, 46-57-86,	622035, Свердловская область, Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 87	проверка, проверка и регулировка, ремонт
Новокузнецк	<b>ООО «Мединфо»</b>	(3843) 46-36-99 <a href="mailto:medinfo@zaoproxy.ru">medinfo@zaoproxy.ru</a>	Новокузнецк, ул. Авиаторов, д. 73 пом. 16.	проверка и регулировка
Новокузнецк	<b>ФГУ «Новокузнецкий филиал Кемеровского ЦСМ»</b>	(3843) 37-25-64, 36-05-70	Новокузнецк, Народная ул. д. 49	проверка, проверка и регулировка, ремонт
Новороссийск	<b>Прибор-сервис</b>	(8617) 61-55-40 доп.100, 61-55-40	353900, Новороссийск, ул. Революции 1905г.,14	ремонт
Новороссийск	<b>ФГУ «Новороссийский ЦСМ»</b>	(8617) 64-81-67, 64-81-66, 64-86-06	353900, Новороссийск, ул. Революции 1905г.,14	проверка, проверка и регулировка
Новосибирск	<b>ООО «МЕТРОН»</b>	(383) 333-33-35, 33-20-100, 332-10-48, 332-10-49 <a href="mailto:metron@ngs.ru">metron@ngs.ru</a>	630128, Новосибирск, ул. Демакова, 30	ремонт
Новосибирск	<b>ЗАО «МЕРА»</b>	(383) 230-30-01, 230-30-02, факс 230-30-55 <a href="mailto:meransk@rambler.ru">meransk@rambler.ru</a> <a href="http://www.sibmera.ru">www.sibmera.ru</a>	630112, Новосибирск, а/я 530, ул. Державина, 73, оф. 8	проверка, проверка и регулировка, ремонт

Норильск	<b>ФГУ «Таймырский ЦСМ» (филиал Красноярского ЦСМ)</b>	(3919) 34-04-63, 34-31-16, 46-74-99	Красноярский край, г. Норильск, ул.Лауреатов, д. 76	проверка, проверка и регулировка
Омск	<b>ФГУ «Омский ЦСМ»</b>	(3812) 68-07-99, т.ф. 68-04-07 info@ocsm.omsk.ru http://csm.omsk.ru	644116, Омск, ул. Северная, д. 117А	проверка, проверка и регулировка, ремонт
Оренбург	<b>ГУП ОПТФ "Медтехника"</b>	(3532) 52-15-65, 52-15-66, 56-45-97, 56-45-98	Оренбург, ул. Минская, д. 2	проверка, проверка и регулировка
Пермь	<b>ФГУ «Пермский ЦСМ»</b>	(342) 236-23-46 (факс), 236-31-00, 236-07-19, 236-04-85 <a href="mailto:pcsm@permcsm.ru">pcsm@permcsm.ru</a> <a href="http://www.pcsm.perm.ru">www.pcsm.perm.ru</a>	614068, г.Пермь, ул.Борчанинова, 85	проверка, проверка и регулировка, ремонт
Пермь	<b>Медицинский центр «Предрейсовый осмотр»</b>	(342) 210-87-99, 210-99-01	Г. Пермь. Ул. Пушкина д. 27	проверка проверка и регулировка, ремонт
Пермь	<b>ООО «УРАЛ-ТЕСТ»</b>	(342) 218-22-42, 218-22-43	614000, Пермь, Главпочтамт а/я 2676, ул. Кирова, д. 8, оф. 1	проверка, проверка и регулировка, ремонт
Петрозаводск	<b>ФГУ «Карельский ЦСМ»</b>	(8142) 577112, факс 57-71-01, 56-22-50, metr@onego.ru	185005, Петрозаводск, ул. Володарского, 5	проверка, проверка и регулировка
Петропавловск-Камчатский	<b>ФГУ «Камчатский ЦСМ»</b>	(4152) 23-23-91, 23-31-06, 23-30-01, факс 23-2391, 23-31-06	683024, Петропавловск-Камчатский, ул. Тельмана, 42/3	проверка, проверка и регулировка, ремонт
Псков	<b>ФГУ «Псковский ЦСМ»</b>	(8112) 66-80-24, 66-85-21 <a href="mailto:pskcsm@ellink.ru">pskcsm@ellink.ru</a>	180000, Псков, ул. Красных Просвещенцев, 3	проверка, проверка и регулировка
Псков	<b>ООО «Псковский ЦСМ»</b>	(8112) 75-25-23, 66-31-02	180006, Псков, Советская набережная, д. 10	проверка и регулировка, ремонт
Ростов-на-Дону	<b>ФГУ «Ростовский ЦСМ»</b>	(863) 290-44-43, 264-41-77. <a href="mailto:andrey_fomin@mail.ru">andrey_fomin@mail.ru</a>	344010, Ростов-на-Дону, пр-т Соколова, дом 58	проверка, проверка и регулировка,
Ростов-на-Дону	<b>ООО «Центр метрологии и технического регулирования»</b>	(863) 200-83-92, 264-41-77. <a href="mailto:andrey_fomin@mail.ru">andrey_fomin@mail.ru</a>	344010, Ростов-на-Дону, пр-т Соколова, дом 59	ремонт
Рязань	<b>ФГУ «Рязанский ЦСМ»</b>	(4912) 44-55-84, 27-47-79 <a href="mailto:asu@rcsm.rzazan.ru">asu@rcsm.rzazan.ru</a>	390011, Рязань, Старообрядческий пр., д. 5	проверка, проверка и регулировка, ремонт
Самара	<b>ОАО «Медтехника»</b>	(846) 242-80-31, 242-79-31, (факс) 242-79-38 <a href="mailto:mtserv@samarainet.ru">mtserv@samarainet.ru</a>	Самара, ул. Садовая, д. 156	проверка, проверка и регулировка, ремонт
Самара	<b>ООО «МЕТА-АВТОТЕСТ»</b>	(846) 932-49-77, 932-49-78 <a href="mailto:meta-avtotest@sama.ru">meta-avtotest@sama.ru</a>	443016, Самара, ул. Матросова, 153, оф. 217	проверка, проверка и регулировка, ремонт
Санкт-Петербург	<b>ООО «Синтез СПб»</b>	(812) 456-22-96 <a href="http://www.alcotest.ru/support/reg.htm">http://www.alcotest.ru/support/reg.htm</a>	Прием приборов на обслуживание: 199178, Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5-7.	проверка, проверка и регулировка, ремонт
Санкт-Петербург	<b>ООО «АЛКОТЕКТОР»</b>	(812) 456-22-97 <a href="http://www.alcotector.ru/support/reg.htm">http://www.alcotector.ru/support/reg.htm</a>	Прием приборов на обслуживание: 199178, Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5-7.	проверка, проверка и регулировка, ремонт, гарантийное обслуживание
Саранск	<b>ФГУ «Мордовский ЦСМ»</b>	(8342) 35-72-06	430027, Саранск, ул. А. Невского, д. 64	проверка, проверка и регулировка, ремонт
Саратов	<b>ФГУ «Саратовский ЦСМ»</b>	(8452) 63-26-77, 63-26-09, (факс) 63-24-26 <a href="mailto:meter@renet.ru">meter@renet.ru</a>	Саратов, Тверская ул., д. 51-а	проверка
Саратов	<b>ООО "РСИ и К"</b>	(8452) 35-00-53 <a href="mailto:rciko@rambler.ru">rciko@rambler.ru</a>	410065, Саратов, ул. Тверская, 53	ремонт
Сергиев Посад	<b>Сергиево-Посадский филиал ФГУ «Менделеевский ЦСМ»</b>	(496) 540-43-45, 547-70-99; (495) 995-19-87, 995-19-89 <a href="mailto:sergposcsm@mail.ru">sergposcsm@mail.ru</a> <a href="mailto:chumerina@spmcsm.ru">chumerina@spmcsm.ru</a>	141300, Московская обл., Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, 212, кор. 4	проверка, проверка и регулировка, ремонт
Смоленск	<b>ООО «Пульсар»</b>	(4812) 27-05-48, факс 21-88-95, 8-910-786-0293	2114000, Смоленск, ул. Б. Краснофлотская 11	проверка, корректировка показаний, ремонт
Ставрополь	<b>ФГУ «Ставропольский ЦСМ»</b>	(8652) 95-61-94, 35-21-77, 35-28-73	355029, Ставрополь, ул. Доваторцев, 7а	проверка
Сыктывкар	<b>ФГУ "Коми ЦСМ"</b>	(8212) 24-30-03, т.ф. 44-27-60 <a href="mailto:mail@comicsm.ru">mail@comicsm.ru</a> <a href="http://www.komi.com/csm">www.komi.com/csm</a>	167982, г.Сыктывкар, ГСП-2, Октябрьский проспект, 27	проверка, проверка и регулировка
Тамбов	<b>ООО «ТамбовМедик»</b>	(4752) 58-36-21, 52-63-14, факс 52-63-18 <a href="mailto:mt@hopetmb.ru">mt@hopetmb.ru</a> <a href="mailto:tambovmedik@mail.ru">tambovmedik@mail.ru</a> <a href="mailto:89108502850@mail.ru">89108502850@mail.ru</a>	392003, г. Тамбов, ул. Рылеева, 53 ул. Магистральная, 10	проверка и регулировка, ремонт
Томск	<b>ООО «Медэлектроника»</b>	(3822) 52-64-60, 52-67-59, 8-903-913-55-41	634029, г. Томск, ул. Белинского, д. 15, оф. 905	проверка и регулировка, ремонт

Томск	<b>ФГУ «Томский ЦСМ»</b>	(3822) 55-44-86, т.ф.56-19-61, 55-36-76 <a href="mailto:tomsk@tcsms.tomsk.ru">tomsk@tcsms.tomsk.ru</a>	634012, Томск, ул. Косарева, д.17а	проверка, проверка и регулировка, ремонт
Тула	<b>ФГУ «Тульский ЦСМ»</b>	(4872) 24-70-17 <a href="mailto:teplo@ulacsm.ru">teplo@ulacsm.ru</a> <a href="http://www.ulacsm.ru">www.ulacsm.ru</a>	Тула, ул. Болдина, д. 91	проверка
Тюмень	<b>ФГУ «Тюменский ЦСМ»</b>	(3452) 20-50-58	625027, Тюмень, Минская ул. д. 88	проверка
Тюмень	<b>ЗАО «Деозал»</b>	(3452) 59-10-01 <a href="mailto:master@deozal.ru">master@deozal.ru</a> <a href="http://www.deozal.ru">http://www.deozal.ru</a>	Тюмень, ул. 9 Января, д. 124	проверка и регулировка, ремонт
Тюмень	<b>ООО «Мера»</b>	(3452) 200-900, 200-909, 200-003, <a href="mailto:mera@tyumen.ru">mera@tyumen.ru</a>	625027, Тюмень, ул. Минская, д. 53/3	проверка и регулировка, ремонт
Улан-Удэ,	<b>ФГУ «Бурятский ЦСМ»</b>	(3012) 41-40-54, 41-06-44, (факс) 41-26-38	670013, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская,72 б	проверка
Уфа	<b>ЦСМ республики Башкортостан</b>	(3472) 76-72-96, 76-74-10	Уфа, бульвар Ибрагимова, д. 55/59	проверка
Уфа	<b>Малое предприятие средств измерений</b>	(3472) 76-78-60, 76-72-81 <a href="mailto:mp_si@mail.ru">mp_si@mail.ru</a>	Уфа, бульвар Ибрагимова, д. 55/60	ремонт
Ухта	<b>ООО «Электротехмаш»</b>	(82147)59-464, 89129468-517 <a href="mailto:eitm@nm.ru">eitm@nm.ru</a>	169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Печорская 57, строение 5	ремонт
Хабаровск	<b>ФГУ «Хабаровский ЦСМ»</b>	(4212) 30-18-54, 32-92-62, 70-40-63 <a href="mailto:khcsm@mail.redcom.ru">khcsm@mail.redcom.ru</a> <a href="http://www.khcsm.marketcenter.ru">www.khcsm.marketcenter.ru</a>	680000, Хабаровск, ул.К.Маркса, 65	проверка
Хабаровск	<b>ОАО «Торговый дом «Медтехника»</b>	(4212) 21-99-99, 22-35-13 <a href="mailto:medtech@mail.khv.ru">medtech@mail.khv.ru</a>	680030, г. Хабаровск, пер. Облачный, 78а	проверка и регулировка, ремонт
Челябинск	<b>ОГУП «Медтехника»</b>	(351) 260-89-03, 232-79-52	Челябинск, Медгородок, Варненская ул. д. 6-а	проверка, проверка и регулировка, ремонт
Челябинск	<b>ФГУ «Челябинский ЦСМ»</b>	(351) 232-02-92 т.ф.232-04-01 <a href="mailto:stand@chel.surnet.ru">stand@chel.surnet.ru</a> <a href="http://www.chelcsm.r">www.chelcsm.r</a>	454048, Челябинск, ул. Энгельса, 101	проверка, проверка и регулировка, ремонт
Ярославль	<b>ЗАО «Магистраль-Контроль»</b>	(4852) 73-69-83, 58-01-78 <a href="mailto:MagistralKontrol@mail.ru">MagistralKontrol@mail.ru</a>	150044, Ярославль, пр. Октября, 87, оф. 408	проверка и регулировка, ремонт

Для оказания услуг по техническому обслуживанию анализаторов организация должна иметь все необходимые разрешительные документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Для выполнения работ по поверке – атtestат аккредитации на право поверки средств измерений, область аккредитации должна распространяться на газоанализаторы для определения паров этанола в выдыхаемом воздухе.

Обращаясь в данные организации для оказания услуг по техническому обслуживанию, ремонту, поверке – спрашивайте о наличии вышеуказанных разрешительных документов.

# **ИНСТРУКЦИЯ**

## **по работе с программой «Статистика MarkV»**

Программа «Статистика MarkV» предназначена для сбора и сохранения данных из памяти анализатора паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР Mark V (далее – анализатора) на персональном компьютере. Создаваемая на компьютере база данных имеет удобный интерфейс, позволяет легко найти и вывести на печать необходимые данные (результаты измерений) с возможностью сортировки по дате, порядковому номеру измерений, заводскому номеру анализатора и другим признакам.

Настоящая инструкция содержит сведения, необходимые для формирования базы данных из памяти анализатора паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР Mark V на ПК с помощью программы «Статистика MarkV» (далее – программы).

**ВНИМАНИЕ!** Программа «Статистика MarkV» не защищена от несанкционированного вмешательства в базу данных ПК. Правильность отображаемых данных в базе данных ПК можно проверить только путем сравнения этих данных с данными на дисплее анализатора, используя меню просмотра памяти тестов (в соответствии с 2.11 руководства по эксплуатации анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР Mark V).


### **Минимальные системные требования к ПК**

- Intel Pentium или совместимый процессор
- 256 Мб RAM
- 6,4 Мб свободного места на HDD
- Операционная система Windows
- Наличие свободного USB-порта для подключения кабеля
- Манипулятор мышь
- Дисплей VGA или выше

### **1 Установка программы «Статистика MarkV»**

Включите компьютер. После включения и запуска операционной системы вставьте диск в привод компакт-дисков, откройте ярлык **«Мой Компьютер»**, откройте диск с программой установки и запустите на исполнение файл **setup-MarkV.exe**.


Вы увидите на экране монитора следующее информационное окно:

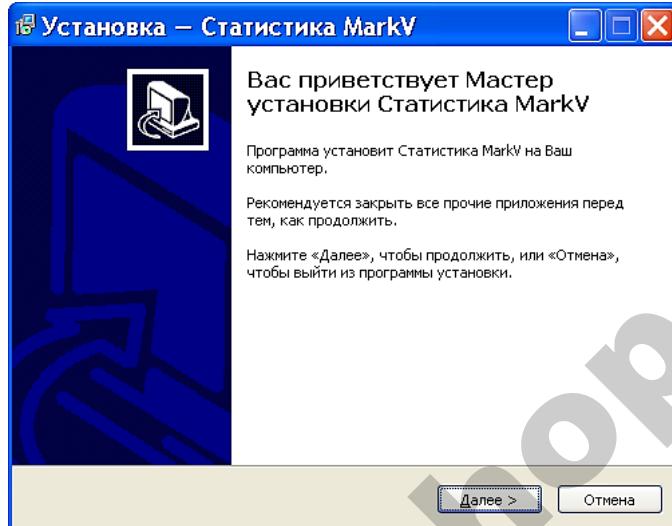

*Примечание – При установке программы следуйте указаниям информационных окон Мастера установки «Статистика MarkV».*

Для установки программы нажмите кнопку «**Далее**», для отмены установки нажмите кнопку «**Отмена**».


В следующем информационном окне Вам будет предложено выбрать каталог, в который будет установлена программа:

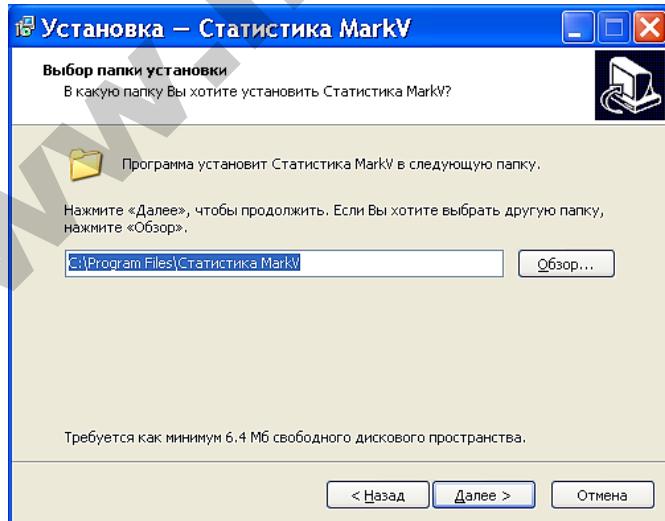

*Примечание – По умолчанию программа устанавливается в каталог «C:\Program Files\Статистика MarkV». Для выбора другого каталога нажмите кнопку «Обзор» и выберите каталог на Ваше усмотрение.*

Для продолжения установки программы нажмите кнопку «**Далее**», для отмены установки нажмите кнопку «**Отмена**», для возврата в предыдущее окно установки нажмите «**Назад**».


На следующем этапе установки Вам будет предложено выбрать (создать) папку в меню «Пуск», где должны быть созданы значки для программы «Статистика MarkV».

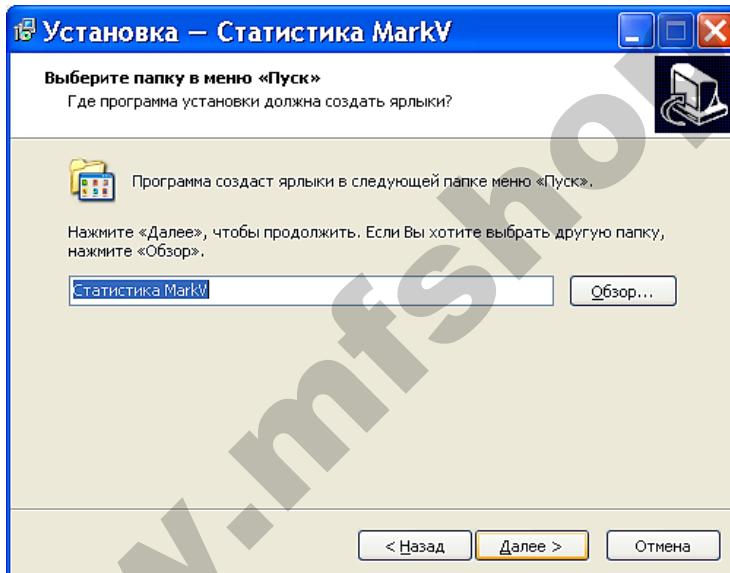

Для продолжения установки программы нажмите кнопку «**Далее**», для отмены установки нажмите кнопку «**Отмена**», для возврата в предыдущее окно установки нажмите «**Назад**».


В следующем информационном окне отметьте флажками опции, которые Вам необходимы:

- создание ярлыка программы на рабочем столе;
- создание ярлыка программы в панели быстрого запуска.

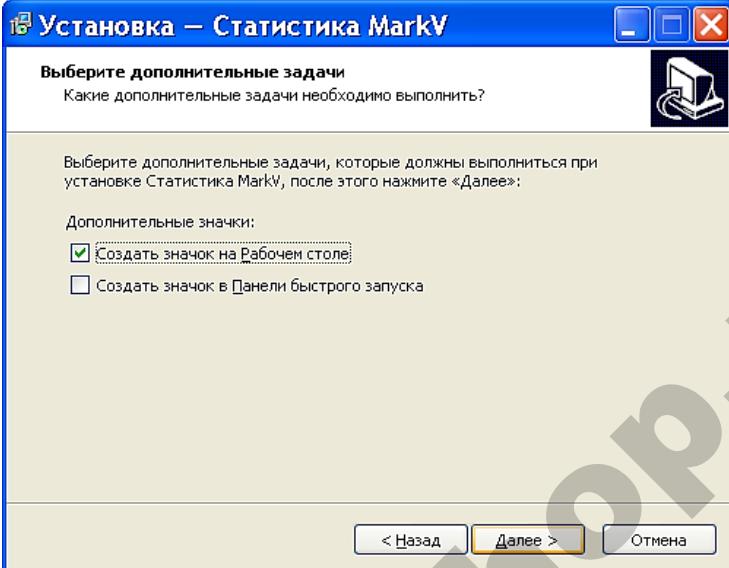


Для продолжения установки программы нажмите кнопку «**Далее**», для отмены установки нажмите кнопку «**Отмена**», для возврата в предыдущее окно установки нажмите «**Назад**».


После нажатия кнопки «**Далее**» появится информационное окно с указанием выбранных параметров установки программы:

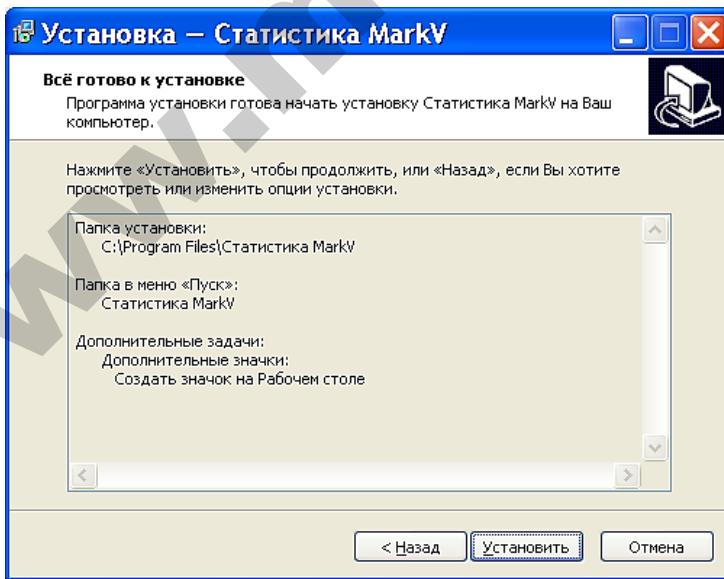

При нажатии кнопки «Установить» будет произведено копирование файлов программы «Статистика MarkV» на жесткий диск Вашего ПК.

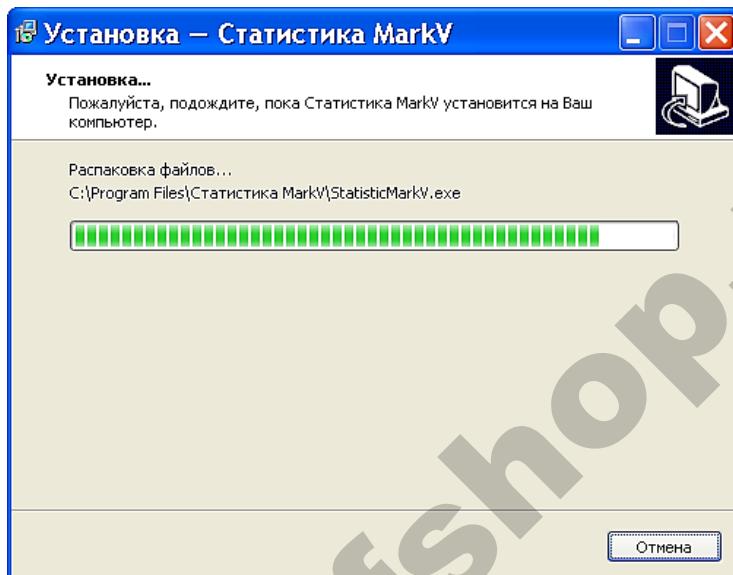

По окончании копирования файлов Мастер установки сообщит об успешном выполнении установки программы.

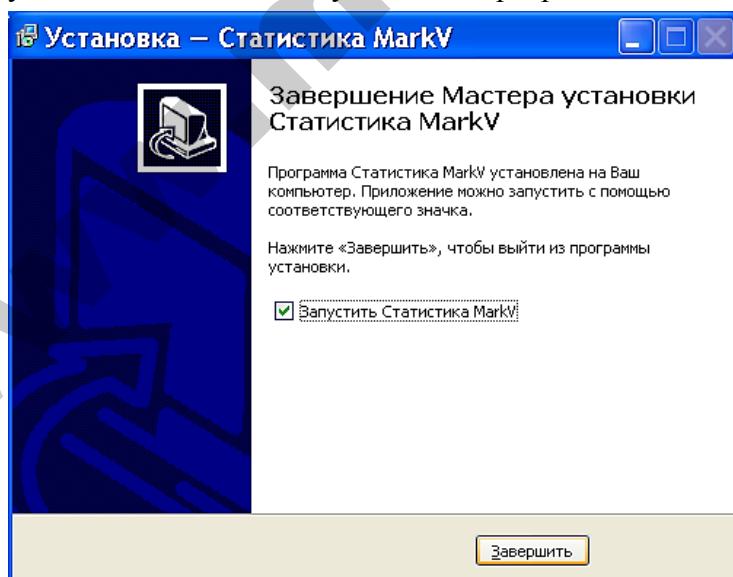

Вы можете начать работу с программой сразу же после завершения ее установки (флажок на запуск программы отмечен по умолчанию). Для завершения установки нажмите кнопку «**Завершить**».

## 2 Запуск программы

Подключите кабель для соединения анализатора с ПК к USB-порту компьютера.

**Внимание! Рекомендуется все подключения к компьютеру проводить при выключенном питании компьютера.**

Включите компьютер. Запустите программу «Статистика MarkV» двойным щелчком левой кнопки мыши по ярлыку на рабочем столе или через меню кнопки «**ПУСК**».

На экране монитора появится рабочее окно программы:




Основное поле (на белом фоне) в рабочем окне программы служит для отображения сохраненных в ПК данных (результатов измерений) из памяти анализатора.

## 3 Начало работы

Подсоедините кабель для соединения анализатора с ПК к порту mini USB анализатора (на боковой панели).

Включите анализатор нажатием на кнопку вкл/выкл. Анализатор автоматически перейдет в режим передачи данных в ПК, пред-

назначенный для сохранения данных из памяти анализатора (сохраненных результатов измерений) в базу данных на персональном компьютере. На экране анализатора появится следующее окно:

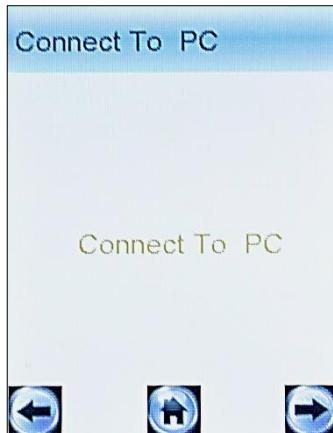


Открывшееся окно сообщает пользователю, что анализатор переведен в режим передачи данных и готов к сохранению данных из памяти в базу данных ПК (при условии, что кабель подсоединен к ПК).

*Примечание – Если анализатор при подсоединении кабеля не перешел в режим передачи данных автоматически, то это может свидетельствовать о неисправности разъема mini USB анализатора или кабеля. В этом случае анализатор с кабелем необходимо направить на техническую диагностику в сервисный центр.*

#### 4 Загрузка данных из памяти анализатора

 **Загрузить** Для загрузки из памяти анализатора в компьютер сохраненных протоколов измерений нажмите кнопку «**Загрузить**» в правой части рабочего окна программы.

На экране монитора появится сообщение о параметрах загрузки данных из памяти анализатора с указанием заводского номера анализатора:

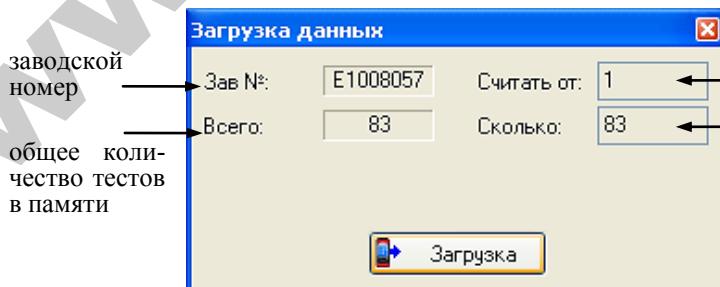

номер теста, с которого будут загружаться данные из памяти  
количество тестов, которые будут загружаться из памяти

Введите параметры загрузки:

- порядковый номер измерения (теста), начиная с которого (включительно) будет произведена загрузка данных из памяти анализатора;

- количество протоколов измерений (тестов), которое будет загружено.


*Примечание – По умолчанию параметры загрузки задают считывание всех данных (тестов) из памяти анализатора.*

Например:

– Если Вам требуется загрузить, только последние 20 тестов, то в графе «**Считать от:**» укажите число, равное общему количеству тестов в памяти за вычетом (20+1), а в графе «**Сколько**» укажите число 20.

– Если Вам требуется считать, тесты с порядковым номером с 15 по 32 включительно, то в графе «**Считать от:**» укажите число 15, а в графе «**Сколько**» укажите число, равное  $(32-15)+1=18$ .

После того, как Вы указали параметры загрузки, щелкните левой кнопкой мыши по кнопке «**Загрузить**». На экране монитора появится окно, сообщающее о ходе выполнения процесса загрузки данных в компьютер; после того как данные загрусятся, появится отчет в виде следующего сообщения:

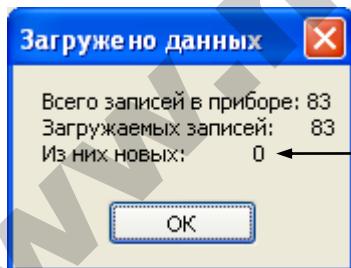

количество тестов, которые были впервые считаны из памяти анализатора в ПК при данной загрузке (т.е. которые отсутствовали в базе данных ПК на момент загрузки)

**ВНИМАНИЕ! Если после загрузки данные в основном поле программы не появились, то проверьте и задайте корректные параметры фильтрации (согласно раздела 8 настоящей инструкции).**

The screenshot shows a Windows application window titled 'Статистика MarkV 2.04'. The main area contains a table of test results with columns: Зав. № (Sample ID), № теста (Test No.), Дата/Время (Date/Time), Результат (Result), Ед.измер. (Unit), and Режим (Mode). The results are listed from 62 to 79. The results for tests 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, and 79 are in red, while 67 and 79 are in green. The modes are mostly 'Ручной забор' (Manual collection) except for test 65 which is 'Отказ' (Failure) and test 79 which is 'Выдох прерван' (Breath suspended). The unit for all results is 'mg/L'. The top bar includes a 'Фильтр:' (Filter) dropdown, a date range selector ('От: 08.03.2013 до: 14.03.2013'), a search button ('Поиск'), and a toolbar with icons for 'Загрузить' (Load), 'Печать' (Print), 'Экспорт' (Export), and 'Импорт' (Import). On the right side, there is a vertical panel labeled 'База данных' (Database) containing the company name 'ООО "АЛКОТЕКТОР"' and a 'Выход' (Exit) button.

Зав. №	№ теста	Дата/Время	Результат	Ед.измер.	Режим
E1008057	62	15.01.2013 16:00:09	0,150	mg/L	Ручной забор
E1008057	63	15.01.2013 16:01:22	0,523	mg/L	Ручной забор
E1008057	64	15.01.2013 16:02:16	0,533	mg/L	Ручной забор
E1008057	65	17.01.2013 15:13:53			Отказ
E1008057	66	17.01.2013 15:14:44			Выдох прерван
E1008057	67	17.01.2013 15:15:14	Не обнаружен		Ручной забор
E1008057	68	17.01.2013 15:17:15	0,000	mg/L	Автоматический
E1008057	69	21.01.2013 16:34:58	0,000	mg/L	Автоматический
E1008057	70	08.02.2013 16:56:19	0,000	mg/L	Ручной забор
E1008057	71	08.02.2013 18:09:17	0,000	mg/L	Ручной забор
E1008057	72	22.02.2013 12:41:13	0,000	mg/L	Ручной забор
E1008057	73	22.02.2013 12:41:55	Не обнаружен		Ручной забор
E1008057	74	22.02.2013 12:43:42	0,000	mg/L	Ручной забор
E1008057	75	22.02.2013 13:31:35	0,000	mg/L	Ручной забор
E1008057	76	22.02.2013 13:32:14	0,000	mg/L	Ручной забор
E1008057	77	22.02.2013 20:36:01	0,000	mg/L	Ручной забор
E1008057	78	22.02.2013 21:12:43	0,000	mg/L	Ручной забор
E1008057	79	26.02.2013 13:21:25	0,000	mg/L	Ручной забор

Показано записей: 83 | Текущая запись: 78

В рабочем окне программы Вам доступны следующие действия:

- печать;
- сортировка;
- поиск;
- фильтрация;
- экспорт;
- импорт.

Отсоедините кабель от анализатора и выключите анализатор, нажав и удерживая около 2-3 секунд кнопку вкл/выкл.

*Примечание – анализатор не выключится, пока кабель не будет отсоединен.*

## 5 Сортировка данных

Данные можно сортировать по колонкам таблицы в порядке возрастания или убывания признака.

Чтобы произвести сортировку данных по какому-либо признаку, Вам следует навести курсор на заголовок колонки и выполнить двойной щелчок левой кнопкой мыши; появившийся справа от названия колонки треугольник покажет направление возрастания признака.

В данном примере сортировка данных выполнена по колонке «Дата/Время» в порядке возрастания:

№ теста	Дата/Время	Рез
1	28.09.2010 21:40:56	0.45
2	28.09.2010 21:41:30	0.48
3	28.09.2010 21:41:43	0.48

## 6 Печать таблицы данных




Кнопка «Печать» в правой верхней части рабочего окна программы позволяет вывести на печать те результаты измерений из базы данных, которые на данный момент находятся в рабочем окне.


При нажатии кнопки «Печать» на мониторе появится изображение печатной формы таблицы данных:

При необходимости перед печатью можно настроить положение таблицы на странице с помощью пункта меню «**Поля**»; для от правки на печать нажмите «**Печать**».

## 7 Поиск данных

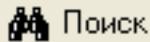

Щелчок левой кнопкой мыши по кнопке «**Поиск**» в верхней части рабочего окна программы открывает окно для задания признаков, по которым будет вестись поиск данных:

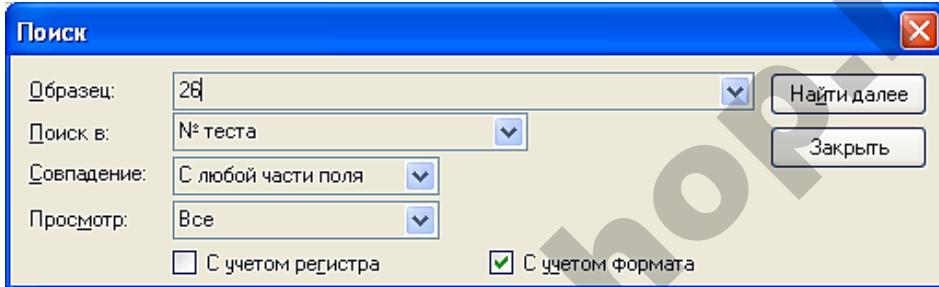

В графу «**Образец**» вводится искомый текст, например, заводской номер анализатора, дата или номер измерения и т. д.

В графу «**Поиск в**» вводится признак, по которому будет вестись поиск. В качестве признака выбирается один из заголовков колонок.

В графе «**Совпадение**» выбирается желательная степень совпадения содержимого ячейки и содержимого графы «**Образец**».

В графе «**Просмотр**» выбирается направление поиска.

*Примечание – Для изменения значения в графе поиска нажмите стрелку справа. В выпадающем списке выберите требуемую позицию.*

Чтобы найти искомый текст, удовлетворяющий условиям поиска, щелкните левой кнопкой мыши по кнопке «**Найти далее**». По мере поиска в рабочем окне программы поочередно будут выделяться цветом строки, в которых будет найден искомый текст.

Статистика MarkV 2.04

Фильтр:	Прибор:	Дата:	Поиск	База данных
E1008057	<b>№</b>	От: 22.02.2013 до: 14.03.2013		Загрузить Печать Экспорт Импорт
Зав. №	№ теста	Дата/Время	Результат	Ед. измер.
E1008057	9	01.12.2012 14:08:43	0,150	mg/L Ручной забор
E1008057	10	01.12.2012 14:09:05	0,149	mg/L Ручной забор
E1008057	11	01.12.2012 14:19:56	0,463	mg/L Ручной забор
E1008057	12	01.12.2012 14:20:34	0,457	mg/L Ручной забор
E1008057	13	01.12.2012 16:53:46	0,143	mg/L Ручной забор

**Поиск**

Образец: 26 Найти далее

Доиск в: № теста Закрыть

Совпадение: С любой части поля

Просмотр: Все С учетом регистра С учетом формата

E1008057 23 11.01.2013 14:43:09 0,830 mg/L Ручной забор

E1008057 24 11.01.2013 16:55:19 0,144 mg/L Ручной забор

E1008057 25 11.01.2013 17:01:39 0,146 mg/L Ручной забор

E1008057 26 11.01.2013 17:08:02 0,143 mg/L Ручной забор

Показано записей: 83 Текущая запись: 26

ООО "АЛКОТЕКТОР"

Выход

## 8 Фильтрация

Для удобства работы с базой данных в ПК в программе «Статистика MarkV» предусмотрена фильтрация результатов измерений по заводскому номеру анализатора и дате проведения измерений.

**ВНИМАНИЕ! При загрузке данных из памяти анализатора по умолчанию установлен фильтр для вывода в рабочее окно данных за последние 7 дней по отношению к текущей дате.**

Поле функции «Фильтр» выглядит следующим образом:

Фильтр:	Прибор:	Дата:	
E1008057	<b>№</b>	От: 22.02.2013 до: 14.03.2013	


кнопка фильтрации

Задание начала и конца периода в поле «Дата» позволяет вывести на экран (в рабочее окно программы) только те данные, которые были сохранены в памяти анализатора в этот период.

Для того чтобы применить или отменить фильтрацию по датам, следует нажать на кнопку фильтрации – .

Выбор позиции в выпадающем списке поля «Прибор» позволяет выводить либо все данные (всех анализаторов), либо данные анализатора с выбранным заводским номером.

Задать заводской номер анализатора в качестве параметра для фильтрации можно также, нажав на кнопку № и осуществив ввод заводского номера в открывшемся диалоговом окне:

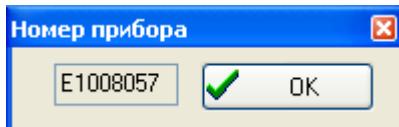


Нажмите кнопку «OK»; в случае если данные анализатора с таким заводским номером присутствуют в базе данных, то в рабочем окне программы будут отображаться данные только с выбранного анализатора с учетом условий фильтрации по дате.


## 9 Экспорт данных

В программе есть возможность для переноса (экспорта) данных и их объединения с другой базой данных, хранящейся на другом компьютере.

Для экспорта базы данных нажмите кнопку «Экспорт», откроется окно экспорта данных, где необходимо выбрать, куда сохранить экспортируемую базу. Имя файла по умолчанию – текущая дата. При необходимости измените каталог (папку), а также имя файла по своему усмотрению.

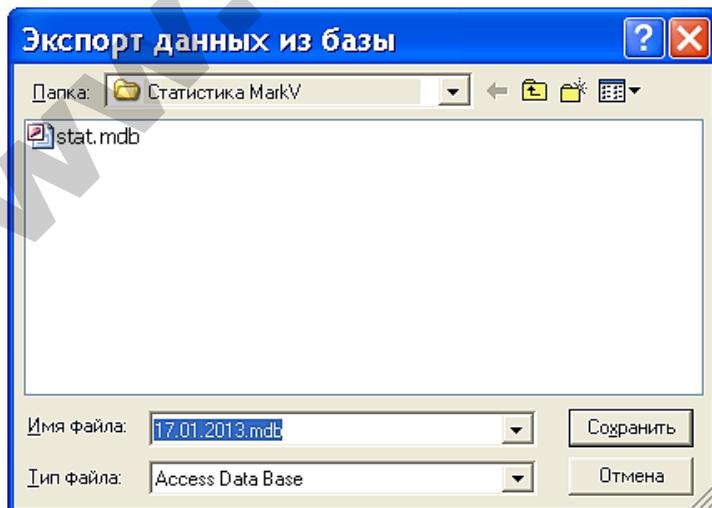

Нажмите кнопку «***Сохранить***»:

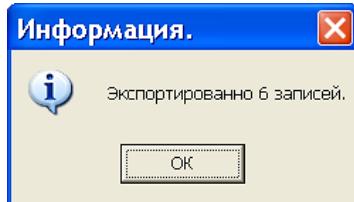

**ВНИМАНИЕ!** Экспортируются только те данные, которые отображены в рабочем окне программы, т.е. если включена фильтрация, то экспортируться будет только часть базы. Для экспорта всей базы необходимо выбрать все приборы и отменить фильтрацию по датам (согласно раздела 8 настоящей инструкции).


Для переноса экспортируемых данных в базу данных другого компьютера созданный при экспортировании файл следует скопировать на другой компьютер и объединить базы с помощью функции импортирования данных (согласно раздела 10 настоящей инструкции).

## 10 Импорт данных


Для импорта данных из другой базы нажмите кнопку «***Импорт***», на экране появится окно импорта данных, где необходимо выбрать папку, откуда будет импортироваться база данных.

*Примечание – Следует выбрать папку, в которую предварительно был скопирован файл с экспортируемыми данными из базы данных другого компьютера.*

Выберите файл с базой, которую необходимо импортировать:

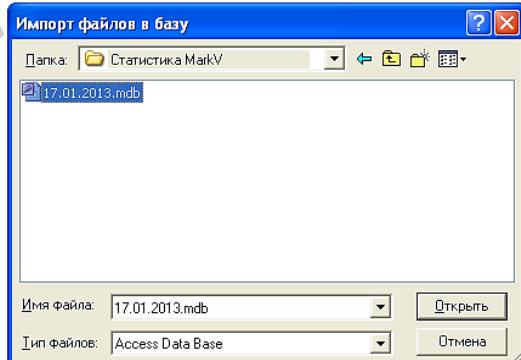

Нажмите кнопку «**Открыть**»:

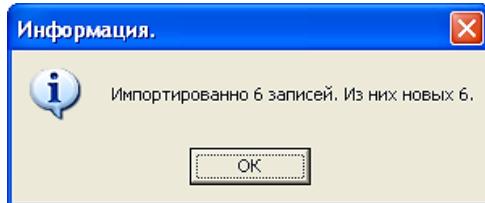

Просмотрите базу данных с учетом импортируемых данных в рабочем окне программы.

## **11 Завершение работы**

По окончании работы с программой «Статистика MarkV» закройте программу, нажав кнопку «**Выход**» в нижнем правом углу рабочего окна программы.

## **12 Удаление программы «Статистика MarkV»**

Для удаления программы нажмите «**Пуск > Программы > название папки с программой**, которую Вы указали при установке программы (по умолчанию «**Статистика MarkV**») > Удалить (дe-инсталлировать) «**Статистика MarkV**».

**ВНИМАНИЕ! Удаление программы «Статистика MarkV» приведет к ПОЛНОЙ ПОТЕРЕ базы данных.**

Следуйте инструкциям программы по удалению на мониторе Вашего ПК.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГЦИ СИ

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»



Н.И. Ханов

« 21 » марта 2013 г.

**Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе**

**АЛКОТЕКТОР Mark V**

**МЕТОДИКА ПОВЕРКИ**

МП-242-1524-2013

Руководитель научно-исследовательского  
отдела госэталонов в области  
физико-химических измерений  
ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

Л.А. Конопелько

Ведущий инженер  
О.В. Фатина

Санкт-Петербург

2013

Настоящая методика поверки распространяется на анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР Mark V (далее – анализаторы), предназначенные для экспрессного измерения массовой концентрации паров этанола в отобранный пробе выдыхаемого воздуха, и устанавливает методику их первичной поверки и периодической поверки в процессе эксплуатации.

Интервал между поверками – 1 год.

## 1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении первичной поверки и периодической поверки в процессе эксплуатации выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта методики поверки
1 Внешний осмотр	6.1
2 Опробование	6.2
– проверка общего функционирования	6.2.1
– проверка функционирования автоматического режима отбора пробы	6.2.2
3 Подтверждение соответствия программного обеспечения (далее – ПО)	6.3
4 Определение метрологических характеристик	6.4
– определение погрешности	

1.2 Если при проведении той или иной операции поверки получен отрицательный результат, дальнейшую поверку прекращают.

## 2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки применяют средства, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Номер пункта методики поверки	Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования и (или) метрологические (МХ) и основные технические характеристики средства поверки
6	Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 по ТУ 25-11.1513-79. Цена деления: 0,1 кПа. Психрометр аспирационный М-34-М по ГРПИ 405132.001 ТУ. Диапазон измерений от 10 % до 100 %. Термометр лабораторный ТЛ4 по ГОСТ 28498-81 Диапазон измерений от 0 °C до 50 °C. Цена деления: 0,1 °C. Поверочный нулевой газ воздух <sup>1)</sup> марки Б по ТУ 6-21-5-82 в баллоне под давлением. Ротаметр РМ-А-0,16 ГУЗ по ГОСТ 13045-81. Верхний предел измерений объемного расхода 0,16 м <sup>3</sup> /ч, пределы допускаемой относительной погрешности ± 2,5 % от верхнего предела измерения. Ротаметр РМ-0,63 ГУЗ по ГОСТ 13045-81. Верхний предел измерений объемного расхода 0,63 м <sup>3</sup> /ч, пределы допускаемой относительной погрешности ± 2,5 % от верхнего предела измерения. Ротаметр РМ-1,6 ГУЗ по ГОСТ 13045-81. Верхний предел измерений объемного расхода 1,6 м <sup>3</sup> /ч, пределы допускаемой относительной погрешности ± 2,5 % от верхнего предела измерения. Вентиль точной регулировки ВТР-1 или ВТР-1-М160. Диапазон рабочего давления от 0 до 150 кгс/см <sup>2</sup> , диаметр условного прохода 3 мм. Трубка медицинская из поливинилхлорида, 6×1,5 мм.

6.4	<p>Рабочие эталоны 1-го или 2-го разряда по ГОСТ 8.578–2008:</p> <p>а) Генератор газовых смесей паров этанола в воздухе GUTH модель 10-4D в комплекте со стандартными образцами состава водных растворов этанола ВРЭ-2: ГСО 8789-2006 (МХ приведены в таблице Б.1 приложения Б). Пределы допускаемой относительной погрешности: <math>\pm 5\%</math>.</p> <p>или</p> <p>б) Стандартные образцы состава газовых смесей этанол/азот в баллонах под давлением (далее – ГС в баллонах под давлением) по ТУ 6-16-2956-92: ГСО 8364–2003, ГСО 8366–2003 (МХ приведены в таблице Б.1 приложения Б).</p> <p>Границы относительной погрешности при <math>P=0,95</math>: <math>\pm 2\%</math>.</p>
	<p><sup>1)</sup> При поверке вместо поверочного нулевого газа воздух допускается применять азот газообразный особой чистоты 1-го или 2-го сорта по ГОСТ 9293–74 в баллоне под давлением.</p>

2.2 Допускается применение других средств поверки, не приведенных в таблице 2, метрологические характеристики которых не хуже указанных в таблице 2.

2.3 Все средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке, ГС в баллонах под давлением и стандартные образцы состава водных растворов этанола – действующие паспорта.

### 3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Помещение, в котором проводят поверку, должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей кратность воздухообмена не менее 4-х в 1 час.

3.2 Концентрации вредных компонентов в воздухе рабочей зоны (помимо этанола) должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005–88.

3.3 При проведении поверки должны быть соблюдены правила безопасности по ГОСТ 12.2.007.0–75 и «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденные Госгортехнадзором.

3.4 К проведению поверки анализаторов допускают лиц, ознакомленных с ГОСТ 8.578–2008, ГОСТ Р 8.676–2009 и руководством по эксплуатации (далее – РЭ) анализаторов, имеющих квалификацию поверителя, действующий аттестат и прошедших инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

### 4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

4.1 При проведении поверки соблюдают следующие условия:

- диапазон температуры окружающего воздуха, °С: от 15 до 25;
- диапазон относительной влажности окружающего воздуха, %: от 30 до 80;
- диапазон атмосферного давления, кПа: от 84 до 106;
- массовая концентрация этанола в окружающем воздухе<sup>2)</sup>, мг/л: не более 0,010.

Примечание – При проведении поверки с помощью генераторов газовых смесей паров этанола в воздухе дополнительно учитывают требования к рабочему диапазону температуры окружающего воздуха, указанному в их РЭ.

4.2 При выполнении операций поверки по 6.4.3 и 6.4.4 настоящей методики не допускается поочередно подавать на поверяемый анализатор ГС от генераторов газовых смесей паров этанола в воздухе и ГС этанол/азот из баллонов под давлением (таблица 2).

4.3 При проведении поверки с помощью генераторов газовых смесей паров этанола в воздухе соблюдают следующие условия применения стандартных образцов состава водных растворов этанола:

- бутыль с раствором вскрывают непосредственно перед использованием;
- раствор используют для однократной заливки в генератор;
- раствор подлежит замене при превышении максимального количества генерируе-

<sup>2)</sup> Данное условие поверки считается выполненным при проведении поверки в помещении с приточно-вытяжной вентиляцией согласно 3.1 настоящей методики.

мых проб ГС без замены водного раствора этанола, указанного в РЭ генератора, или при нахождении в генераторе более 6 часов;

- после использования раствор хранению и повторному использованию не подлежит.

## 5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

5.1 Подготавливают анализатор к работе в соответствии с требованиями раздела «Подготовка к работе» РЭ, в том числе проверяют и при необходимости корректируют текущую дату и время, установленные в анализаторе, и при необходимости выполняют корректировку показаний анализатора.

Примечание – Инструкция по корректировке показаний предоставляется официальным представителем изготовителя анализаторов в России ООО «АЛКОТЕКТОР»<sup>3)</sup> по отдельному запросу.

5.2 Подготавливают к работе средства поверки в соответствии с требованиями их эксплуатационной документации.

5.3 Проверяют наличие паспортов и сроков годности ГС в баллонах под давлением и стандартных образцов состава водных растворов этанола. Проверяют наличие и целостность защитных этикеток на бутылях со стандартными образцами состава водных растворов этанола.

5.4 Баллоны с ГС выдерживают в помещении, в котором проводят поверку, не менее 24 ч, поверяемый анализатор – не менее 2 ч. Перед проведением поверки не допускается подавать на поверяемый анализатор пробы выдыхаемого воздуха или другие газовые смеси в течение не менее 1 ч.

## 6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

### 6.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре устанавливают соответствие анализатора следующим требованиям:

- отсутствуют внешние повреждения, влияющие на работоспособность и безопасность;
- органы управления и разъемы исправны;
- надписи и маркировка на корпусе анализатора четкие, соответствующие РЭ;
- в анализаторе установлены точные дата и время.

Результаты внешнего осмотра считают положительными, если анализатор соответствует перечисленным требованиям.

### 6.2 Опробование

#### 6.2.1 Проверка общего функционирования

Проверку проводят путем включения анализатора согласно РЭ, при этом анализатор выполняет автоматическую диагностику работоспособности.

Результаты проверки общего функционирования считают положительными, если все тесты автоматической диагностики работоспособности завершены успешно согласно РЭ.

#### 6.2.2 Проверка функционирования автоматического режима отбора пробы

6.2.2.1 Проверку проводят путем последовательной подачи на вход анализатора воздуха из баллона под давлением с разным расходом и контроля срабатывания автоматического режима отбора пробы ГС. Подачу воздуха на вход анализаторов осуществляют через мундштук, входящий в комплект анализаторов.

Примечания:

1) При выполнении операции поверки по 6.2.2 измерения на анализаторе выполняют в режиме измерения в автоматическом режиме отбора пробы ГС.

2) При проведении проверки функционирования автоматического режима отбора пробы допускается вместо воздуха или азота из баллона под давлением подавать на анали-

3)

затор сжатый воздух от компрессора.

#### 6.2.2.2 Проверку выполняют в следующей последовательности:

а) Открывают баллон с воздухом и с помощью вентиля точной регулировки, контролируя по ротаметру РМ-1,6 ГУ3, устанавливают расход воздуха 12 л/мин; отсоединяют ротаметр;

б) Включают анализатор согласно РЭ и после выхода анализатора в режим готовности к отбору пробы подают на него воздух из баллона под давлением, при этом анализатор не должен выполнить автоматический отбор пробы ГС;

в) Открывают баллон с воздухом и с помощью вентиля точной регулировки, контролируя по ротаметру РМ-1,6 ГУ3, устанавливают расход воздуха 18 л/мин; отсоединяют ротаметр;

г) Включают анализатор согласно РЭ и после выхода анализатора в режим готовности к отбору пробы подают на него воздух из баллона под давлением, при этом анализатор должен выполнить автоматический отбор пробы ГС.

6.2.2.3 Результаты проверки функционирования автоматического режима отбора пробы ГС считают положительными, если анализатор соответствует требованиям, указанным в 6.2.2.2 настоящей методики.

### 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения

6.3.1 Подтверждение соответствия программного обеспечения проводят визуально путем идентификации номера версии программы обеспечения, выводящегося на дисплей при включении анализаторов.

6.3.2 Результаты проверки соответствия программного обеспечения считают положительными, если номер версии встроенного программного обеспечения анализаторов не ниже RU 1.11.

### 6.4 Определение метрологических характеристик

6.4.1 Определение погрешности проводят в четырех точках диапазона измерений (далее – точки поверки) путем поочередной подачи на вход анализаторов ГС и регистрации показаний анализаторов.

Основные метрологические характеристики анализаторов приведены в приложении А.

6.4.2 ГС подают на вход анализатора в последовательности №№ 1–2–3–4–1 (таблица Б.1 приложения Б).

В каждой точке поверки проводят по три цикла измерений путем подачи на вход анализатора i-ой ГС и регистрации показаний анализатора согласно 6.4.3 или 6.4.4 в зависимости от выбранного средства поверки.

Если при подаче на вход анализатора ГС № 1 в первом цикле измерений зарегистрированы нулевые показания, допускается для ГС № 1 второй и третий цикл измерений не выполнять.

### 6.4.3 Выполнение измерений с помощью генераторов газовых смесей паров этанола в воздухе:

а) Собирают газовую систему согласно рисунку 1. Генератор располагают так, чтобы на него не падали прямые солнечные лучи и вблизи отсутствовали источники охлаждения или нагрева. Длина соединительной трубы на выходном штуцере генератора – не более 5 см. Перед заливкой раствора в генератор проверяют отсутствие влаги и конденсата на внутренней поверхности емкости для раствора генератора, соединительных трубок и мундштуков, при наличии влаги или конденсата необходимо просушить все элементы генератора. Подачу ГС на вход анализаторов осуществляют через мундштук, входящий в комплект анализаторов.

б) В соответствии с РЭ генератора приготавливают ГС, используя соответствующий водный раствор этанола согласно таблице Б.1 приложения Б.

в) Включают анализатор в соответствии с РЭ.

г) Выбирают режим измерения в соответствии с РЭ и нажимают виртуальную кнопку «Start» для перехода в режим готовности к отбору пробы.

д) Каждый цикл измерения проводят по схеме:

– при отсоединенном анализаторе открывают баллон с воздухом и с помощью вентиля точной регулировки, контролируя по ротаметру РМ-0,63 ГУ3, устанавливают расход ГС на выходе генератора от 6 до 7 л/мин;

- после выхода анализатора в режим готовности к отбору пробы и появления на дисплее сообщения «Please Blow» подсоединяют анализатор и подают ГС на анализатор;
- через 3-4 с выполняют ручной отбор пробы ГС путем нажатия на виртуальную кнопку «Manual»;
- через 1 с после отбора пробы отсоединяют анализатор и закрывают вентиль на баллоне;

– регистрируют показание анализатора  $C_i^A$ , мг/л;

– соблюдают интервал между циклами измерений: не менее 10 с.

- е) Рассчитывают действительное значение массовой концентрации этанола в ГС на выходе генератора  $C_i^A$ , мг/л, по формуле

$$C_i^A = 0,38866 \cdot C_p^A, \quad (1)$$

где  $C_p^A$  – аттестованное значение массовой концентрации этанола в используемом стандартном образце состава водного раствора этанола, указанное в паспорте, мг/см<sup>3</sup>.

ж) При выполнении измерений с помощью генератора регистрируют количество генерируемых проб ГС без замены водного раствора этанола. При превышении максимального количества генерируемых проб ГС, указанного в РЭ генератора, выполняют замену стандартного образца состава водного раствора этанола.

Максимальное количество поверяемых анализаторов с помощью генератора газовых смесей паров этанола в воздухе GUTH модель 10-4D: 10.

#### 6.4.4 Выполнение измерений с помощью газовых смесей в баллонах под давлением:

а) Собирают газовую систему согласно рисунку 2. Длина соединительной трубы – не более 10 см. Подачу ГС на вход анализаторов осуществляют через мундштук, входящий в комплект анализаторов.

б) Включают анализатор в соответствии с РЭ.

в) Выбирают режим измерения в соответствии с РЭ и нажимают виртуальную кнопку «Start» для перехода в режим готовности к отбору пробы.

г) Каждый цикл измерения проводят по схеме:

– при отсоединенном анализаторе открывают баллон с ГС и с помощью вентиля точной регулировки, контролируя по ротаметру РМ-А-0,16 ГУЗ, устанавливают расход ГС от 1 до 2 л/мин;

– после выхода анализатора в режим готовности к отбору пробы и появления на дисплее сообщения «Please Blow» подсоединяют анализатор и подают ГС на анализатор;

– через 3-4 с выполняют ручной отбор пробы ГС путем нажатия на виртуальную кнопку «Manual»;

– через 1 с после отбора пробы отсоединяют анализатор и закрывают вентиль на баллоне;

– регистрируют показание анализатора  $\Pi_i$ , мг/л.

д) Рассчитывают измеренное значение массовой концентрации этанола в  $i$ -ой ГС


$C_i$ , мг/л, (для всех ГС, кроме ГС № 1) по формуле

$$C_i = \Pi_i \cdot \frac{1013}{P} \cdot K^{GC}, \quad (2)$$

где  $P$  – атмосферное давление, измеренное с помощью барометра, кПа;


$K^{GC}$  – коэффициент пересчета показаний анализаторов при поверке с использова-

нием ГС состава этанол/азот в баллонах под давлением,  $K^{GC} = 1,05$ .

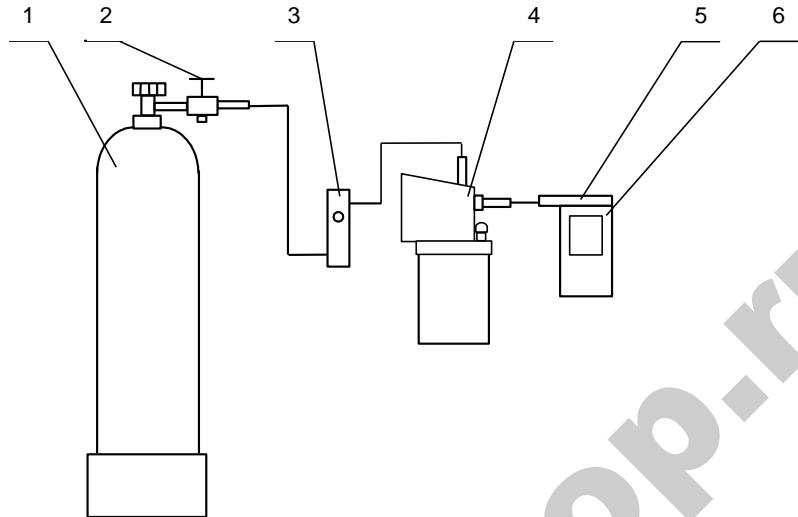

1 – баллон с воздухом; 2 – вентиль; 3 – ротаметр; 4 – генератор;  
5 – мундштук из комплекта анализатора; 6 – анализатор

Рисунок 1 – Газовая система для подачи на анализатор ГС от генератора газовых смесей паров этанола в воздухе GUTH модель 10-4D

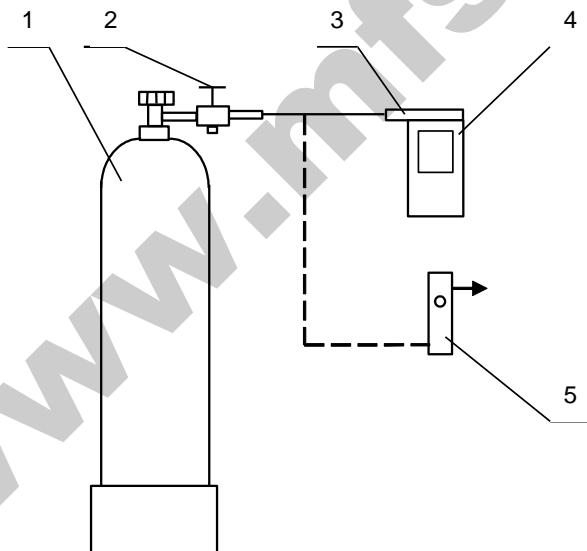

1 – баллон с ГС; 2 – вентиль; 3 – мундштук из комплекта анализатора;  
4 – анализатор; 5 – ротаметр

Рисунок 2 – Газовая система для подачи на анализатор ГС из баллона под давлением

## 7 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

7.1 По результатам измерений, полученным по 6.4 настоящей методики в каждой точке поверки по каждому циклу измерений, рассчитывают значение абсолютной или относительной погрешности анализаторов, в зависимости от того, какая погрешность нормирована для данной точки поверки.

Значение абсолютной погрешности анализатора  $\Delta_i$ , мг/л, при подаче  $i$ -ой ГС рассчитывают по формуле

$$\Delta_i = C_i - C_i^d, \quad (3)$$

где  $C_i$  – измеренное значение массовой концентрации этанола при подаче  $i$ -ой ГС, мг/л;

$C_i^d$  – действительное значение массовой концентрации этанола в  $i$ -ой ГС (при поверке с помощью генераторов рассчитывается по формуле (1), при поверке с помощью ГС в баллоне под давлением указано в паспорте), мг/л.

Значение относительной погрешности анализатора  $\delta_i$ , %, при подаче  $i$ -ой ГС рассчитывают по формуле

$$\delta_i = \frac{C_i - C_i^d}{C_i^d} \cdot 100 \quad (4)$$

7.2 Результаты определения погрешности анализатора считают положительными, если полученные значения погрешности анализатора в каждой точке поверки по каждому циклу измерений не превышают пределов допускаемой погрешности, установленных при утверждении типа и указанных в РЭ анализаторов (см. приложение А).

## 8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Составляют протокол поверки по форме, приведенной в приложении В.

8.2 При положительных результатах поверки анализатор признают годным к применению и выписывают на него свидетельство о поверке установленной формы согласно ПР 50.2.006–94. Форма оборотной стороны свидетельства о поверке анализаторов приведена в приложении Г.

Примечание – На оборотной стороне свидетельства о поверке допускается не дублировать информацию, если она приведена на лицевой стороне свидетельства о поверке.

При первичной поверке до ввода в эксплуатацию допускается вместо оформления свидетельства о поверке наносить знак поверки (поверительное клеймо) в паспорт анализатора.

8.3 При отрицательных результатах поверки анализатор не допускают к применению и выдают извещение о непригодности установленной формы согласно ПР 50.2.006–94 с указанием причин непригодности.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
**(обязательное)**

**Основные метрологические характеристики анализаторов**

Таблица А.1 – Диапазон измерений и пределы допускаемой погрешности

Диапазон измерений массовой концентрации этанола, мг/л	Пределы допускаемой погрешности	
	абсолютной	относительной
0 – 0,500	± 0,050 мг/л	–
св. 0,500 – 0,950	–	± 10 %

**Примечания:**

- 1) В таблице указаны пределы допускаемой погрешности анализаторов в рабочих условиях эксплуатации.
- 2) В анализаторах программным способом установлен минимальный интервал показаний, которые выводятся на дисплей анализаторов в виде нулевых показаний: от 0,000 до 0,020 мг/л.
- 3) На дисплее единицы измерений массовой концентрации этанола «мг/л» отображаются в виде «mg/L».
- 4) При поверке анализаторов с использованием газовых смесей состава этанол/азот в баллонах под давлением используют коэффициент пересчета показаний  $K_{GC}$ , равный 1,05.

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**  
**(обязательное)**

**Метрологические характеристики газовых смесей, используемых при поверке анализаторов**

Таблица Б.1 – Метрологические характеристики газовых смесей, используемых при поверке анализаторов

Номер ГС	Номинальное значение массовой концентрации этанола в ГС, подаваемых на анализатор, пределы допускаемого отклонения, мг/л	Номинальное значение массовой концентрации этанола в водных растворах этанола <sup>1)</sup> , пределы допускаемого отклонения, мг/см <sup>3</sup>	Номинальное значение массовой концентрации этанола в ГС в баллонах под давлением <sup>2)</sup> , пределы допускаемого отклонения, мг/л
ГС № 1	0	вода	воздух
ГС № 2	0,150±0,015	0,386±0,019	0,150±0,015
ГС № 3	0,475±0,048	1,22±0,06	0,475±0,048 <sup>3)</sup>
ГС № 4	0,850±0,085	2,19±0,11	0,850±0,085

<sup>1)</sup> При проведении поверки анализаторов с помощью генераторов газовых смесей паров этанола в воздухе используют стандартные образцы состава водных растворов этанола ВРЭ-2; ГСО 8789-2006. Границы относительной погрешности при Р=0,95: ± 1 %.

<sup>2)</sup> При проведении поверки анализаторов с помощью стандартных образцов состава газовых смесей  $C_2H_5OH/N_2$  в баллонах под давлением: ГСО 8364-2003, ГСО 8366-2003. Границы относительной погрешности при Р=0,95: ± 2 %.

<sup>3)</sup> При проведении поверки анализаторов с помощью стандартных образцов состава газовых смесей  $C_2H_5OH/N_2$  в баллонах под давлением допускается в качестве ГС № 3 использовать ГС в баллоне под давлением с массовой концентрацией этанола от 0,33 до 0,52 мг/л.

**ПРИЛОЖЕНИЕ В  
(рекомендуемое)**  
**Форма протокола поверки анализаторов**

**ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

- 1) Наименование анализатора, тип .....
- 2) Заводской номер .....
- 3) Принадлежит .....
- 4) Наименование изготовителя.....
- 5) Дата выпуска .....
- 6) Наименование нормативного документа по поверке .....

7) Средства поверки<sup>4)</sup>

- генератор газовых смесей паров этанола в воздухе

.....  
(указывают тип, заводской номер генератора, номер и дату действия свидетельства о поверке)

- стандартные образцы состава водных растворов этанола

.....  
(указывают регистрационный номер<sup>5)</sup> и номера используемых экземпляров стандартных образцов)

- стандартные образцы состава газовых смесей этанол/азот в баллонах под давлением

.....  
(указывают регистрационный номер<sup>2)</sup>, номера используемых баллонов, номера и сроки действия паспортов)

8) Вид поверки (первичная/периодическая)

(нужное подчеркнуть)

9) Условия поверки:

- температура окружающего воздуха .....
- относительная влажность окружающего воздуха .....
- атмосферное давление .....

<sup>4)</sup> Указывают средства поверки, применяемые при поверке анализатора.

<sup>5)</sup> Указывают регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.

## 10) Результаты проведения поверки

Внешний осмотр .....

Опробование .....

Проверка общего функционирования .....

Проверка функционирования автоматического режима отбора пробы .....

Подтверждение соответствия программного обеспечения .....

## Определение метрологических характеристик

Диапазон измерений, мг/л	Пределы допускаемой погрешности		Действительное значение массовой концентрации этанола в ГС, мг/л	Измеренное значение массовой концентрации этанола в ГС, мг/л	Значение погрешности, полученное при поверке	
	абсолютной	относительной			абсолютной, мг/л	относительной, %

Вывод: .....

Заключение \_\_\_\_\_, зав. № \_\_\_\_\_  
(тип СИ)соответствует (не соответствует) предъявляемым требованиям и признано годным  
(не годным) для эксплуатации.

ФИО и подпись поверителя .....

Выдано свидетельство о поверке \_\_\_\_\_ от .....  
(Выдано извещение о непригодности \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_)

**ПРИЛОЖЕНИЕ Г**  
**(обязательное)**  
**Форма обратной стороны свидетельства о поверке**

Поверка проведена в соответствии документом МП-242-1524-2013 «Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР Mark V. Методика поверки», разработанным и утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 21 марта 2013 г.

- 1 Результаты внешнего осмотра .....
- 2 Результаты опробования .....
- 3 Результаты подтверждения соответствия программного обеспечения .....
- 4 Результаты определения метрологических характеристик

Диапазон измерений, мг/л	Пределы допускаемой погрешности		Максимальное значение погрешности, полученное при поверке	
	абсолютной	относительной	абсолютной	относительной
0 – 0,500	± 0,050 мг/л	–	–	–
св. 0,500 – 0,950	–	± 10 %	–	–

5 Условия поверки:

- температура окружающего воздуха .....
- относительная влажность окружающего воздуха .....
- атмосферное давление .....

6 Средства поверки<sup>6)</sup>:

Генератор газовых смесей паров этанола в воздухе .....  
 (указывают тип и заводской номер генератора)  
 в комплекте со стандартными образцами состава водных растворов этанола .....  
 .....  
 (указывают регистрационный номер<sup>7)</sup>)

Стандартные образцы состава газовых смесей этанол/азот в баллонах под давлением .....

.....  
 (указывают регистрационный номер<sup>2)</sup> и номера используемых баллонов)

Поверитель \_\_\_\_\_  
 (Ф.И.О., подпись)

Дата \_\_\_\_\_  
 (число, месяц, год)

<sup>6)</sup> Указывают средства поверки, применяемые при поверке анализатора.

<sup>7)</sup> Указывают регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.